



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Lékařský teploměr PRT 1000

BRAUN



Obj. č.: 39 84 72

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lékařského teploměru Braun.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento vynikající vysokorychlostní digitální měřič tělesné teploty byl zkonstruován pro měření tělesné teploty pod jazykem, v podpaží nebo v konečníku. Stejně jako u ostatních teploměrů je opatrné zacházení a pečlivé ukládání nezbytné k tomu, abyste obdrželi přesné výsledky měření.

Rozsah dodávky

- Lékařský teploměr vč. 1,55V baterie typu SR41
- Kryt na měřicí hrot
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

1 Vysokorychlostní měřicí senzor

2 Obzvláště jemná ohebná špička


3 Tlačítko «on/off» (ZAP./VYP.)

4 Veliký displej

5 Kryt bateriového prostoru

(v balení najdete 1 ks baterie SR41 1,55 V)

6 Ochranný kryt

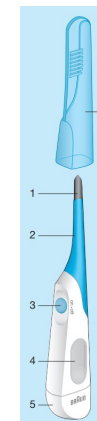

Pokyny k měření

Měření v ústech

Nepijte horké ani studené nápoje, necvičte, nekuřte ani neprovádějte jiné aktivity, které by mohly zvýšit nebo snížit teplotu ve srovnání s vaší normální tělesnou teplotou. Měřit teplotu v ústech doporučujeme pouze u dětí starších čtyř let. Ústa by měla být před provedením měření až 5 minut zavřená. Umístěte snímač dobře pod jazyk. Poučte děti, aby do snímače nekousaly. Otevírání úst nebo nesprávné umístění snímací špičky teploměru může vést k delší době měření. Nejvyšší teploty musí být dosaženo po cca 20 sekund.

Měření v podpaží

Podpaží není ideálním místem pro měření tělesné teploty, protože teplota se tímto způsobem měří na povrchu pokožky, nikoli v uzavřené tělesné dutině (jako jsou ústa a konečník).

Čas nezbytný pro přesné určení teploty v podpaží proto může být 90 vteřin nebo déle.

Pro přesné změření teploty potřebujete: Osušte si podpaží suchým ručníkem.

Před umístěním teploměru do podpaží je držte několik minut uzavřené. Při zasouvání teploměru do podpaží je příliš dlouho neotvírejte. Umístěte teploměr do podpaží a přitiskněte ruku co nejtěsněji k tělu. Ujistěte se, že máte celý měřicí senzor uzavřen v podpaží. Během měření podpaží neotvírejte.

Pro zabezpečení přesného měření v oblasti podpaží doporučujeme odečíst naměřenou teplotu z displeje nejdříve po 90 vteřinách. Teplota odečtená v okamžiku těsně po zvukovém signálu by mohla být zkreslená výše zmíněnými nedostatky spojenými s měřením v podpaží.

Rektální měření

Opatrně zasuňte špičku teploměru do konečníku. Nesouvejte špičku do konečníku násilím (pokud se narazí na odpor). Konečník je v těsné blízkosti vnitřní dutiny těla a umožňuje rychlejší změření.

Jak používat digitální teploměr Braun

Teploměr zapnete stisknutím světle zeleného tlačítka zapnutí/vypnutí (on/off).

Krátké zvukové znamení (pípnutí) signalizuje, že je teploměr zapnutý «Thermometer on».

Proběhne test displeje rozsvícením všech symbolů na displeji. Při okolní teplotě pod 32 °C

se zobrazí «---» a «°C» a teploměr je nyní připraven k použití na různých místech těla.

(Při teplotě okolí vyšší než 32 °C se na displeji zobrazí tato teplota a blikající «°C»).

Během měření se na displeji průběžně zobrazuje aktuální teplota. Symbol «°C» v průběhu této doby bliká. Proces měření je ukončen, jakmile zazní zvukový signál (píp píp píp 10krát) a «°C» přestane blikat.

Abyste prodloužili životnost baterie, vypněte teploměr krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. Jinak se teploměr automaticky vypne po cca 10 minutách.

Režim paměti

Pokud při zapínání teploměru stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí na déle než 3 sekundy, zobrazí se na displeji naposledy změřená teplota, která se automaticky uloží. Současně se v pravé části displeje zobrazí malé «M» jako Memory (paměť). Po dalších 3 sekundách tato hodnota zmizí a teploměr se vypne. Uložená hodnota bude nahrazena novou hodnotou, která se také automaticky uloží.

Čištění a desinfekce

Aby se předešlo kontaminaci, po každém použití digitální teploměr důkladně očistěte.

Doporučujeme použít volně prodejně desinfekční prostředky. Neponechávejte v takovém roztoku teploměr déle než 24 hodin.

Tělesná teplota

Normální tělesná teplota se pohybuje v určitém rozsahu. Následující tabulka ukazuje, že se rozsah normálních teplot liší také v závislosti na místě měření. Z tohoto důvodu nelze teploty naměřené na různých místech těla porovnávat přímo.

Rozsahy normálních teplot podle místa měření:

Podpaží: 34,7–37,3 °C (94,5– 99,1 °F)

Orální měření: 35,5–37,5 °C (95,9– 99,5 °F)

Rektální měření: 36,6–38,0 °C (97,9–100,4 °F)

Řešení problémů

«ERR»

Při každém zapnutí teploměru proběhne automaticky test, aby se zkontrolovala jeho funkčnost. Pokud se na displeji zobrazí «ERR», obraťte se na servis.

«▽»

Jakmile se zobrazí symbol «▽» je baterie vybitá a je jí třeba zlikvidovat.

«H»

Měřená teplota přesahuje rozsah zobrazování teplot (>42,9 °C).

«- - - °C»

Měřená teplota je nižší než rozsah zobrazování teplot (<32,0 °C).

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do lékařského teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

IP22: Vnitřní komponenty chraňte před dotykem prstů větších než 12 mm v průměru a před stříknutím vody v kolmém směru +/- 15°.

Rozsah zobrazovaných teplot: 32,0 °C až 42,9 °C

Předpokládaná životnost přístroje: 2000 měření

Životnost baterií: 500 měření během 2 let

Záruka: 2 roky

Provozní teplota: +10 °C až +40 °C

Provozní vlhkost: až 85 % RV

Přesnost měření: ± 0,1 °C mezi 35,5 °C a 42 °C tělesné teploty při teplotě okolí 18 °C až 28 °C

Displej: Displej z tekutých krystalů (LCD) se třemi číslicemi. Nejmenší zobrazovaná jednotka: 0,1 °C

Doporučené skladovací teplota: –25 °C až +55 °C

Baterie: 1,55 V typu SR41

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.