

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics®

CONRAD
partner

Elektronický zásobník na léky s měřením pulsu Vergiss nix

Obj. č.: 86 00 49


Zvláštnosti

Krabička na léky vám pomůže organizovat vaše denní brání léků a upozorní vás nastaveným alarmem v požadovanou dobu. Krabička na léky disponuje zařízením pro měření pulsu.

Ostatní přednosti krabičky na léky:

- vestavné hodiny s velkým LCD displejem (velikost písma 13 mm)
- 5 časů alarmu jsou denně programovatelné, jedno programování, alarm se opakuje denně v nastavený čas.
- Alarm vás upozorní akusticky, vibračně, nebo akusticky a vibračně.
- Modré osvětlené osvětlení umožňuje snadnou obsluhu také ve tmě.


Přístroj

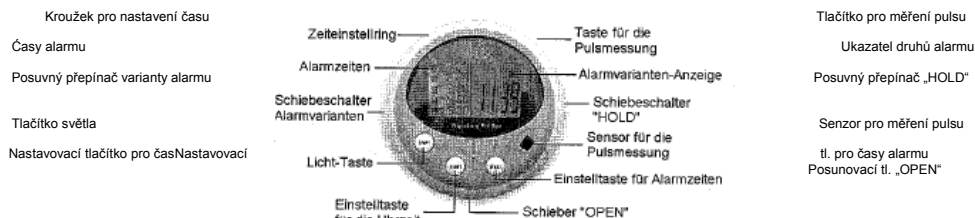

Krabička na léky je provozována pomocí 2 baterií. Lithiová baterie CR2025 zajišťuje zdroj proudu pro čas a měření pulsu a AAA baterie (LR03,R03) je za potřeby pro funkci alarmu (akustický, vibrační, nebo akustický a vibrační) a osvětlení LCD displeje. Vložte připravenou baterii CR2025, vložte před uvedením do provozu AAA baterie. Pro výměnu baterií případně pro vložení AAA baterií otevřete krabičku na léky tak že, posuvný přepínač OPEN umístěný na boku přístroje, posunete ve směru šipky. Tím uvolníte aretaci mezi horním a spodním dílem a můžete obě části oddělit od sebe.

Bateriové pouzdro v horní části je nyní přístupné výměně baterií. Prosím dbejte při vkládání baterií pozor na jejich správnou polaritu.

Výměna baterií je zapotřebí, pokud LCD displej ztrácí na kontrastu (CR2025), případně pokud jsou alarm nebo osvětlení slabé (LR03,R03).

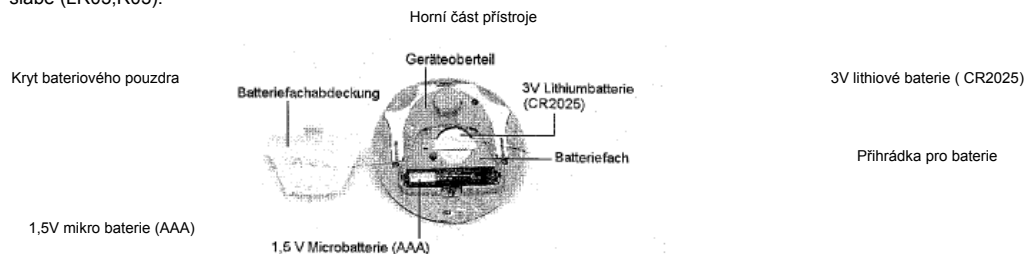

Nastavení časů

1. Posuvný přepínač HOLD umístěný na boční straně přístroje, posuňte do pozice: HOLD
2. Držte po dobu ca. 3 sekund stisknuté tlačítko „T-SET“, umístěné pod LCD displejem.

Na LCD displeji se rozsvítí **TSET** a hodiny začnou blikat.

3. Otočením kroužku pro nastavení času můžete nastavit hodiny.

4. Stiskněte znovu tlačítko „T-SET“ a začnou blikat minuty. Otočením kroužku pro nastavení času můžete nastavit minuty.

5. Dalším stisknutím tlačítka „T-SET“ uzavřete nastavení času. Na LCD displeji zhasne symbol **TSET**.

Pokud je posuvný přepínač „HOLD“ posunut do pozice: HOLD, jsou všechna tlačítka nefunkční. To znamená, že posuvný přepínač „HOLD“ je pojistka proti nezamýšlené obsluze tlačítek.

Nastavení pěti časů alarmu

1. Posuvný přepínač HOLD umístěný na boční straně přístroje, posuňte do pozice: HOLD
2. Držte po dobu ca. 3 sekund stisknuté tlačítko „VSET“, umístěné pod LCD displejem.

Na LCD displeji se rozsvítí **ALSET** a první čas alarmu začne blikat „1 :-: -..“.

3. Otočením kroužku pro nastavení času můžete nastavit v 30-ti minutových krocích první čas alarmu.

4. Stiskněte znovu tlačítko „VSET“ a ukončíte nastavení prvního času alarmu. začne blikat druhý čas alarmu „2 :-: -..“ (Stejným způsobem jako první čas alarmu můžete libovolně nastavit druhý, třetí, čtvrtý i pátý čas alarmu, nebo pokud vám stačí pouze jeden čas alarmu, přeskákejte pomocí stisku tlačítka „VSET“ až k pátému času alarmu a dalším stiskem tohoto tlačítka („VSET“) ukončíte nastavovací režim. Na LCD displeji zhasne symbol **ALSET**.

Poté co ukončíte programování časů alarmu, přesuňte posuvný přepínač „HOLD“ zpět do pozice HOLD

Vynulování všech časů

Öffnung "RESET"



Otevřete krabičku na léky tím, že posuvný přepínač „OPEN“ umístěný na boční straně přístroje posunete ve směru šipky. Potom stiskněte pomocí zubního páráčka, nebo něčeho podobného tlačítko „RESET“ umístěné v otvoru. Všechny nastavené časy budou okamžitě zrušeny. Čas nyní ukazuje 12: a čas alarmu ?:-: -..“.

Naplnění krabičky na léky medikamenty



Krabička na léky má na zadní straně pět očíslovaných přihrádek k brání medikamentů. Otočením průhledného krytu můžete jednotlivé přihrádky naplnit svými léky.

Kryt pouzdra pro medikamenty

Osvětlení LCD displeje

Pro aktivaci osvětlení LCD displeje na cca. 10 vteřin, přesuňte nejprve posuvný přepínač „HOLD“ do pozice:



„HOLD“ a následně stlačte světelné tlačítko „Light“.

Nastavení druhu alarmu

Pomocí posuvného přepínače „BEEP VIB BEEP+VIB“ můžete zvolit mezi akustickým alarmem, vibračním alarmem, nebo akustickým a vibračním alarmem. Toto je možné i bez předchozího posunutí posuvného přepínače „HOLD“.

Alarm / odebrání medikamentů

Povšimnete-li si alarmu, je čas vzít si váš medikament odpovídající přihrádce, podle nastaveného času užívání. Otočte průhledný kryt a vezměte si z vhodné přihrádky váš medikament. Otočením se alarm deaktivuje (vypne) a čas alarmu na LCD displeji zhasne. Proto stojí na pozici opět „:-: -..“. Alarm zní, případně vibruje ca. 30 vteřin.

Pokud zmeškáte vaše léky v nastavený čas, bude vám alarm připomínat po 5 následujících minutách ještě dvakrát, že je čas na váš medikament.

Pokud vezmete z přihrádky lék do 15-ti minut od času alarmu, případně otočíte průhledným krytem, bude alarm přerušeno. Pokud jste propásli první čas alarmu a neodebrali z přihrádky váš medikament, zůstane pro připomenutí na LCD displeji čas alarmu.

V normálním případě jsou všechny medikamenty vybrány z přihrádek a všechny časy alarmů na LCD displeji se změní do tvaru „:-: -..“. Denně v 0:13 budou všechny nastavené časy alarmů znovu aktivovány, takže krabička na léky je znovu připravena na příští den s již dříve nastavenými časy alarmů.

Zařízení pro měření tlaku

Krabička na léky disponuje samostatnou funkcí pro měření tlaku. Na základě vyhodnocení měření vaší tepové frekvence (tepový úder za minutu) můžete určit možnou nesnášlivost (nekompatibilitu) medikamentů a ihned tak konsultovat váš stav s lékařem. **Neměňte v žádném případě sami od sebe lékařem předepsané dávkování vašich medikamentů!**

Použití měřiče pulsu

1. Posuvný přepínač „HOLD“ umístěný na boční straně přístroje posuňte do pozice: HOLD
2. Stiskněte krátce tlačítko pro měření tepu „PULSE START“ na boční straně krabičky na léky. Na LCD displeji se zobrazí srdce a „- - -“.
3. Umístěte prst na senzor pro měření pulsu tak, že symbol srdce začne blikat. Blikání symbolizuje, že přístroj nalezl vhodný měřicí bod.
4. Po 15 až maximálně 60 vteřinách bude zobrazen váš tep (tepový úder za minutu).

Po ukončení měření pulsu, přesuňte posuvný přepínač „HOLD“ zpět do pozice:  HOLD 

Technická data

Provozní napětí	Funkce hodin, měřiče tepu: 3V (1xCR 2025)
Hodiny	Světlo a funkce alarmu: 1,5V (LR03 nebo R03)
Alarm	Hodiny řízené krystalem (přesnost +/- 20 sekund/měsíc)
Počet alarmů za den	Akustický, vibrační, nebo akustický a vibrační
Příhrádek pro medikamenty	5
Ukazatel	5
Rozměry	LCD ukazatel s výškou čísel 13mm (čas)
Hmotnost	Průměr 80mm, výška 31mm
Měření pulsu	96g (včetně baterií, s výjimkou medikamentů)
Osvětlení LCD displeje	Počet tepových úderů za minutu
	Modré

Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.


Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali!

Upozornění: Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Bezpečnostní předpisy

 Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.


- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí!
- Tento výrobek nesmí být používán k informování veřejnosti. Předpovědi počasí této stanice považujte pouze za orientační. Výrobce nezodpovídá za případné nesprávné zobrazení předpovědi počasí na displeji této stanice a za následky, které by z toho vyplynuly.
- Nenamáčejte přístroje nikdy do vody. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům nebo velkým výkyvům teplot.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů.

Manipulace s bateriemi (akumulátory)

 Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou!

Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vytekly elektrolyty může navíc poškodit přístroje.

Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovychto případech hrozí nebezpečí exploze!

 Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Čištění a údržba

- K čištění displeje a pouzder přístrojů používejte jen měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdra přístrojů.
- Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s nimi vedou k zániku záruky.
- Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot, neboť toto vede k velmi rychlým změnám při zobrazování na displeji a může to ovlivnit přesnost naměřených hodnot.

Důležitá upozornění (ručení)

- Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny.
- Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí.
- Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat.

