

## Mini masážní přístroj

# SANITAS



**Obj. č.: 86 04 49**

### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini masážního přístroje.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


### Vložení / výměna baterií

- Víčko přihrádky na baterie otočte proti směru hodinových ručiček.
- Vložte do přihrádky na baterie 3 alkalické nebo 3 normální baterie typu AAA. Za každých okolností při tom respektujte správnou polaritu baterií.
- Víčko přihrádky na baterie znovu nasadte na přihrádku na baterie. Za každých okolností při tom dejte pozor na správnou orientaci víčka!

## Obsluha

### Stisknutí tlačítka

- 1x zapnutí
- 2x vypnutí

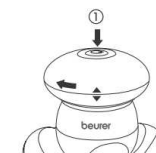

### Použití

Masážní přístroj nepoužívejte:

- u dětí
- u patologických změn na kůži nebo poranění na části těla, která má být masírována (např. popáleniny, otevřené rány, jizvy, vyrážky nebo jiná zranění)
- při onemocnění krevního oběhu a bolesti hlavy
- na hlavě, kostech (kloubech, páteři) nebo jiných citlivých místech na těle
- po operacích
- během těhotenství
- po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!)
- během obsluhy přístrojů a zařízení
- určeno pouze k vnějšímu použití.

Použití masážního přístroje konzultujte se svým lékařem:

- pokud používáte kardiostimulátor, máte implantáty nebo jiné pomocné prostředky,
- při bolestech s nevyjasněnou příčinou,
- jestliže si nejste jistí, zda je pro Vás přístroj vhodný.



Masáž by měla být za každých okolností příjemná a uvolňující. Masáž přerušte nebo změňte svou polohu nebo přítlak, jestliže vnímáte masáž jako bolestivou nebo nepříjemnou.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do masážního přístroje. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Masážní přístroj nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vřazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Záruka

Na masážní přístroj poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/03/2014