

Mini masážní přístroj Beurer MG 16

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLERFINDEN

Obj. č.: 86 04 50



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup masážního přístroje MG 16.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Tento přístroj je určen k masáži jednotlivých částí lidského těla.

Upozornění!

Masážní přístroj nepoužívejte

- u dětí,
- při patologických změnách nebo poranění v masírované oblasti těla (např. popáleniny, otevřené rány, jizvy, vyrážky nebo jiná poranění),
- při onemocnění krevního oběhu a bolestech hlavy,
- na hlavě, kostech (např. klouby, páteř) nebo jiných citlivých částech těla,
- nepoužívejte po operacích,
- během těhotenství,
- po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!),
- při obsluze strojů,
- k vnějšímu použití.

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými psychickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely informace, jak mají přístroj správně používat. Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

Použití přístroje nenahrazuje lékařskou konzultaci a ošetření. Před použitím se dotázte svého lékaře.

Přístroj nepoužívejte pokud:


- pokud nosíte kardiostimulátor, implantáty nebo jiná pomocná zařízení
- při bolestech nejasné příčiny
- pokud si nejste jisti, zda je pro Vás vhodný.

Upozornění!

Masáž by měla být vždy vnímána jako příjemná a uvolňující. Pociťujete-li masáž jako bolestivou nebo nepříjemnou, přerušte ji či změňte polohu nebo tlak.

Vložení/výměna baterií

- Otočte kryt přihrádky na baterie proti směru hodinových ručiček!
- Vložte 3 alkalické nebo 3 normální baterie typu AAA podle obrázku v přihrádce na baterie. Dbejte přitom bezpodmínečně na správnou polaritu baterií!
- Na přihrádku na baterie nasadte kryt. Dbejte přitom bezpodmínečně na správný směr krytu!

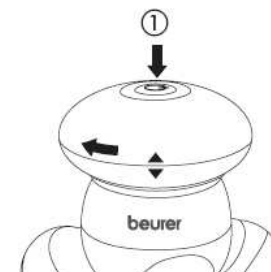

Stisknutí tlačítka

① 1x Zap

① 2x Vyp

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do masážního přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Masážní přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na masážní přístroj poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/1/2012