



CZ **Infračervený masážní přístroj pro poklepovou masáž**
Návod k použití

Rozsah dodávky

- Infračervený masážní přístroj pro poklepovou masáž
- 2 vyměnitelné masážní nástavce
- tento návod k použití

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:



VAROVÁNÍ Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.



POZOR Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.



Upozornění Upozornění na důležité informace.



Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak bezpečnostní třídě 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorách.

1. Seznámení

Funkce přístroje

Pomocí tohoto elektrického infračerveného masážního přístroje můžete sobě nebo jiným osobám dopřát účinnou a blahodárnou masáž bez cizí pomoci. Masáže mohou působit relaxačně a povzbudivě a jsou oblíbené při léčbě natažených svalů, bolestí a únavy. Přístroj umožňuje silnou, intenzivní masáž zad. Přístroj je určen pouze k soukromému používání, ne pro lékařské nebo komerční používání.

2. Použití k určenému účelu

Tento přístroj je určen k masáži jednotlivých částí lidského těla. Nemůže nahradit lékařské ošetření. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud se Vás týká jeden nebo více z následujících výstražných upozornění. Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás masážní přístroj vhodný, dotázte se svého lékaře.



VAROVÁNÍ

Masážní přístroj nepoužívejte

- u dětí,
- u zvířat,
- při vyřezu meziobratlové ploténky nebo patologických změnách páteře,
- v žádném případě pro masáže v oblasti srdce, jestliže máte kardiostimulátor, a dotázte se nejprve svého lékaře i ohledně ostatních částí těla,
- nikdy na oteklých, popálených, zanícených nebo poraněných částech kůže a těla,
- během těhotenství,
- v obličeji (oči), na hrtanu nebo jiných obzvláště citlivých částech těla,
- nikdy během spánku,
- po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!).

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzoryckými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely informace, jak mají přístroj správně používat.

Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

Před použitím masážního přístroje se dotázte svého lékaře

- pokud trpíte těžkou nemocí nebo jste po operaci,

- při horečnatých nachlazeních, křečových žilách, trombózách, zánětu žil, žloutence, cukrovce, onemocnění nervů (např. ischias) nebo akutních zánětech.

Přístroj je určen pouze k účelu popsanému v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

3. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.

VAROVÁNÍ

Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

Elektrický proud

VAROVÁNÍ

Jako každý elektrický přístroj, také tento masážní přístroj používejte opatrně a uvážlivě, aby se zabránilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Přístroj proto

- připojujte pouze k napětí, které je uvedeno na přístroji,
- nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
- nepoužívejte při bouřce.

V případě závady nebo poruchy provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem.

Přístroj za žádných okolností neotevírejte.

Jestliže je poškozen síťový kabel přístroje, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu. Ujistěte se, že masážní přístroj, zástrčka a kabel nemohou přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami.

Přístroj proto

- používejte pouze v suchých vnitřních místnostech,
- používejte pouze suchýma rukama,
- nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo u plného umyvadla,
- nepoužívejte v bazénu, vířivce nebo sauně,
- nepoužívejte venku.

Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.

Oprava

VAROVÁNÍ

Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Nebezpečí požáru

VAROVÁNÍ

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Proto přístroj

- nepoužívejte déle než 15 minut (nebezpečí přehřátí) a před dalším použitím jej nechte minimálně 15 minut vychladnout,
- neoponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,

- nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...

Manipulace

POZOR

Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Dbejte na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
- Dbejte na to, aby se do přístroje nezapletly žádné vlasy.
- Zamezte kontaktu se špičatými nebo ostrými předměty.
- Nepřehýbejte přístroj ani kabel.
- Chraňte přístroj od tepelných zdrojů v blízkosti, např. od kamen, topných těles nebo přímého slunečního záření.


Likvidace

POZOR

Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.



4. Popis přístroje

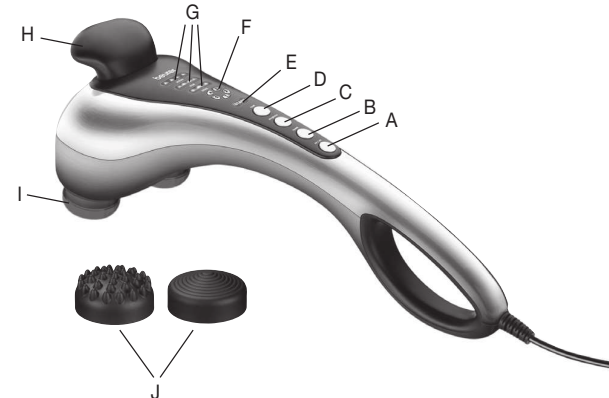

- A Vypínač
- B Rychlost
Nastavení rychlosti masáže
- C Programy
Výběr různých masážních programů
- D Zahřívání
Infračervené záření
- E Spuštění
Spuštění programu
- F Zobrazení rychlosti masáže
- G Masážní program
- H Přídavné držadlo
- I Masážní plocha s infračerveným ohřevem
- J Vyměnitelné masážní nástavce

5. Uvedení do provozu

- Odstraňte obal a ochranné fólie přístroje .
- Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
- Připojte přístroj k síti. Přístroj přitom musí být vypnutý.
- Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.

6. Obsluha

Před zapojením kabelu do sítě se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Přístroj zapněte vypínačem. Spustí se masážní program.

Stisknutím tlačítka rychlosti (speed) můžete v případě potřeby rychlost masáže zvýšit nebo snížit, a to vždy o jeden stupeň.

Stisknutím tlačítka programů můžete vybrat jeden ze tří různých masážních programů (s automaticky nastavovanými stupněm rychlosti).

- **Relax:** Plynulá a uklidňující masáž.
- **Vital:** Intenzivní a pulzující masáž.
- **Active:** Hlubková a pulzující masáž.

Infračervený ohřev se zapíná stisknutím tlačítka zahřívání a může se používat při všech masážních programech.

Přiložte přístroj jednou nebo oběma rukama k části těla, kterou chcete masírovat. Můžete stát, sedět, nebo ležet a masírovat sebe či jinou osobu. Silným nebo slabším stisknutím masážního přístroje můžete měnit intenzitu masírování. Nemasírujte jedno místo na těle déle než 3 minuty a potom přejděte na jinou partii. Po maximálně 15 minutách používání znovu přístroj vypněte a nechte ho vychladnout. Skladujte přístroj v suchu.

Upozornění

- Masážní přístroj nepoužívejte krátce před ulehnutím. Masáž může mít i stimulační účinek a způsobit poruchy při usínání.
- Masážní přístroj má zabudovanou ochranu proti přehřátí, díky níž se přístroj v případě přehřátí automaticky vypne. V tomto případě nechte přístroj 30 minut zchladit, než ho opět začnete používat.

VAROVÁNÍ

- Masáž musí být vždy vnímána jako příjemná a uvolňující. Pociťujete-li masáž jako bolestivou nebo nepříjemnou, přerušete ji či změňte polohu masážního přístroje.
- Nestrkejte ani netlačte žádnou část svého těla, zejména ne prsty, do oblasti masážní hlavy.

7. Péče a skladování

Čištění

Při čištení musí být přístroj odpojený od sítě a vychladlý, otírejte ho pouze lehce navlhčenou utěrkou z mikrovlákna. Můžete k tomu použít slabý čisticí prostředek.

VAROVÁNÍ

- Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Přístroj čistěte pouze popsáním způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v žádném případě vniknout kapalina.
- Přístroj znovu použijte teprve tehdy, až bude zcela suchý.

Skladování

Přístroj skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném místě. Doporučujeme skladování v originálním obalu.

8. Jak si poradit s problémy?

Problém	Příčina	Řešení
Masážní hlava se nepohybuje.	Přístroj není připojen k elektrické síti.	Zasuňte síťovou zástrčku do.
	Přístroj není zapnutý.	Zapněte přístroj.
	Byla spuštěna ochrana proti přehřátí.	Odpojte přístroj od sítě, vyčkejte nejméně 15 minut, opět připojte a zapněte.

9. Technické údaje

Rozměry (š/v/h)	~ 160/150/450 mm
Hmotnost	~ 1740 g
Jmenovitý výkon	25 W
Jmenovité napětí	220-240 V ~ 50 Hz