

Rychlý vodotěsný digitální lékařský teploměr SC 28 flex s ohebným měřicím hrotem a alarmem v případě horečky

Obj. č.: 261 43 12



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lékařského teploměru Scala.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

SC 28 flex je teploměr s ukazatelem maxima, to znamená, že se teplota zobrazí po asi 10 sekundách. Poslední naměřená hodnota se vždy uloží.

Uvedení do provozu

Pro zapnutí stiskněte tlačítko I/O. Krátký signální tón indikuje stav „zapnuto“.

Současně proběhne test segmentů (kontrola všech segmentů na displeji a test funkčnosti, viz „Test funkčnosti“). Následně se v případě teploty naměřené senzorem, která je nižší než 32 °C, symbol „L“ a „°C“. Asi po 1 sekundě začne blikat „°C“. Symbol „L“ znamená „low“ (nízká – tedy nižší než 32 °C).

Popis a ovládací prvky



Použití

Během měření se průběžně zobrazuje aktuální teplota a po celou dobu měření bliká „°C“. Asi po 10 sekundách je měření dokončené.

Po měření zůstane naměřená teplota zobrazená na displeji teploměru SC 28 flex až do jeho vypnutí. Po použití přístroj vypněte stisknutím tlačítka I/O. Opět při tom uslyšíte signální tón. Pokud přístroj nevypnete, zazní po asi 3 minutách signální tón a přístroj se vypne sám.

Alarm v případě horečky:

Pokud je naměřena tělesná teplota nad 37,5 °C, přístroj vás varuje rychlým sledem signálních tónů a blikajícím displejem.

Zobrazení poslední naměřené hodnoty:

Poslední naměřená hodnota se zobrazí, jestliže při zapínání podržíte tlačítko O/I stisknuté déle než 3 sekundy. Jakmile tlačítko O/I uvolníte, přejde přístroj do stavu připravenosti k měření.

Test funkčnosti:

Funkčnost teploměru je automaticky prověřena při zapnutí. Pokud teploměr nefunguje správně (nepřesnost měření), zobrazí se na displeji „ERR“ (error = chyba).


Rozptýl naměřených hodnot:

Naměřená teplota kolísá v závislosti na místě měření. Důvodem je různé rozmístění teploty v lidském těle. Pokud máte při rektálně naměřené teplotě 36,6 °C orálně naměřenou teplotu 36,1 °C a teplotu naměřenou v podpaží 35,6 °C.

Místa měření:

V dutině ústní (orálně)

V dutině ústní jsou drobná kolísání teploty mezi jednotlivými měřeními normální. Rozdíly jsou způsobené odlišným rozložením teploty v dutině ústní. Teploměr zaveďte do jedné z obou tepelných kapes pod jazykem, vlevo a vpravo od kořene jazyka. Snímač teploty musí mít dobrý kontakt s tkání. Zavřete ústa a klidně dýchejte nosem. Výsledek měření tak nebude zkreslen vdechovaným vzduchem. Doba měření asi 10 sekund.

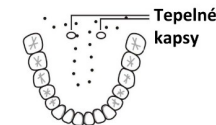

V konečníku (rektálně)

Toto je nejspolehlivější metoda. Hodí se zejména pro kojence a malé děti. Hrot teploměru se opatrně zavede do konečníku, cca 2–3 cm hluboko. Doba měření: asi 10 sekund.

V podpaží (axilárně)

Tento způsob měření poskytuje z medicínského hlediska příliš nepřesné hodnoty. Proto není vhodný pro provádění přesných měření.

Měření bazální teploty

Také ke stanovení plodných, resp. neplodných dnů u žen na základě měření teploty lze přístroj pohodlně a prakticky používat.

Výměna baterie

Jakmile se na displeji zobrazí symbol , je baterie vybitá a je nutná výměna baterie. Vybitou baterii vyměňte za baterii stejného typu. Víčko příhrádky na baterie stáhněte a sejměte. Baterie ve víčku je nyní přístupná. Vybitou baterii vyjměte pomocí nějakého špičatého předmětu (pinzety, malého šroubováku apod.) a vložte novou baterii (AG3, LR 41 nebo SR 41). Dejte pozor na montážní polohu. Baterie lze zakoupit u hodináře nebo ve specializovaných obchodech elektro.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do lékařského teploměru. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Každá lékárna nabízí tampony s alkoholem (od různých výrobců), kterými lze celý přístroj otřít.

Mikrobakteriální kontaminace:

Protože je stoprocentní dezinfekce v domácím prostředí často nemožná, doporučujeme vám, aby každá osoba používala pouze svůj teploměr. Tak lze zamezit riziku infekce.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Typ	Teploměr s ukazatelem maxima
Rozsah měření	32,0 °C až 43,9 °C
Teplota < 32,0 °C	Ukazatel „L“ pro příliš nízkou teplotu (low).
Teplota > 43,9 °C	Ukazatel „H“ pro příliš vysokou teplotu (high).
Přesnost měření	±0,1 °C: 35,5 °C až 42,0 °C; ±0,2 °C ve zbytku rozsahu měření při okolní teplotě: 18 °C až 28 °C
Alarm v případě horečky	Akustický a optický alarm při naměřené teplotě > 37,5 °C.
Samočinný test	Automatická interní kontrola vzhledem k testované hodnotě 37,0 °C. Při odchylce > 0,1 °C se zobrazí „Err“.
Displej	3místný displej z tekutých krystalů (LCD displej).
Typ baterie	1 kus: AG3, LR 41 nebo SR 41.
Ukazatel baterie	Symbol se objeví, pokud je baterie vybitá.
Teplota skladování	–10 °C až 50 °C.



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/11/2024