

Body Balance Active Shape



BEDIENUNGSANLEITUNG	3
OPERATING INSTRUCTIONS	5
MODE D'EMPLOI	7
ISTRUZIONI PER L'USO	9
GEBRUIKSAANWIJZING	11
INSTRUCCIONES DE MANEJO	13
MANUAL DE INSTRUÇÕES	15
BRUKSANVISNING	17
BRUGSANVISNING	19
ΚΑΥΤΤΟΗΓΕΕΤ	21
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ	23
INSTRUKCJA OBSŁUGI	25
NÁVOD K POUŽITÍ	27
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	29
KULLANMA KILAVUZU	31
Οδηγίες λειτουργίας	33
NAVODILA ZA UPORABO	35
UPUTA ZA UPORABU	37

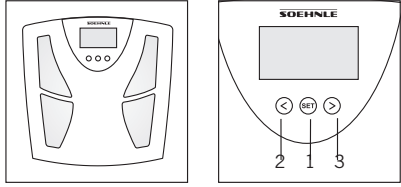
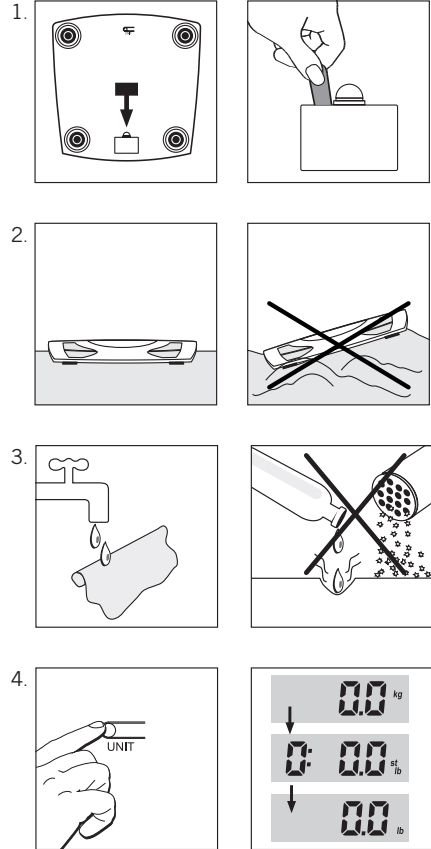
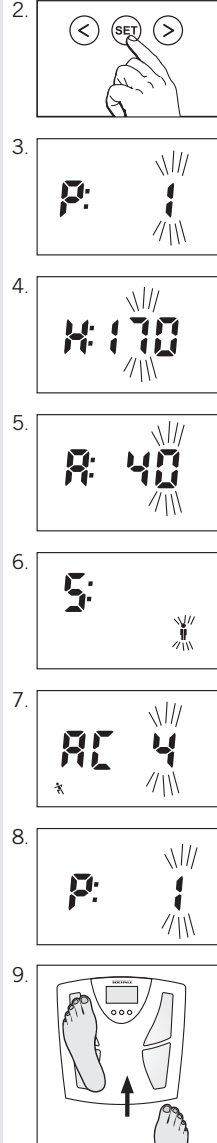
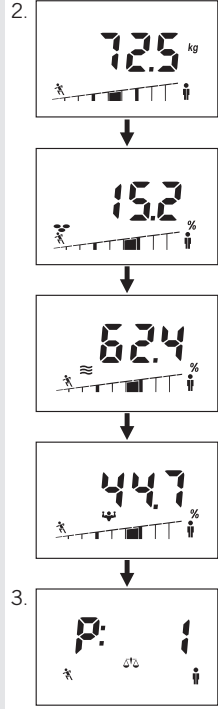
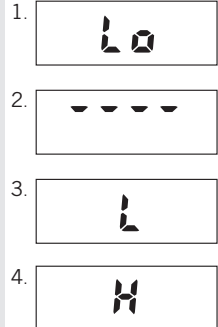


- Nicht geeignet für Personen mit elektronischen Implantaten (Herzschrittmacher).
- It is not suitable for persons with electronic implants (pacemaker, etc.).
- Les personnes qui portent des implants médicaux (p. ex. un stimulateur cardiaque etc.) ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Non è adatto per persone con impianti elettronici (pacemaker, ecc.).

- Niet geschikt voor personen met elektronische implantaten (pacemaker, enz.).
- No es apropiado para personas con implantes electrónicos (marcapasos, etc.).
- Não é adequado para pessoas com implantes eletrônicos (pacemakers, etc.).
- Ej lämplig för personer med elektroniska implantat (Pace-maker etc).
- Tuote ei soveltu henkilöille, joilla on elektronisia istutteita (sydämen tahdistin tms.).
- Nem alkalmazható olyan személyeknél, akielektronikus implantátumokkal (például szívritmusszabályozóval stb.) rendelkeznek.
- Nie nadaje się dla osób, którym wszczepiono elektroniczne implanty (np. rozruszniki serca).
- Není vhodný pro osoby s elektronickými implantáty (kardiostimulátory, atd.).
- Никогда не используйте данный прибор вместе с электронными медицинскими приборами, например, кардиостимуляторами.
- Elektronik parçalar (kalp pili, vs.) taşıyan insanlar için uygun değildir.
- Δεν είναι κατάλληλο για άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, κλπ.).
- Ni primerno za osebe z elektronskimi implantacijami (spodbujevalec srca itd.).
- Nije pogodan za lica sa elektroničnim implantatima (bajpas, itd.).

Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	< - 12 %	- 12 %	- 7 %	- 3 %	0 %	+ 3 %	+ 7 %	+ 12 %	> +12 %
	< - 6 %	- 6 %	- 4 %	- 2 %	0 %	+ 2 %	+ 4 %	+ 6 %	> + 6 %
	< - 6 %	- 6 %	- 4 %	- 2 %	0 %	+ 2 %	+ 4 %	+ 6 %	> + 6 %

A**B****C****D****E****A. Bedienelemente**

- Bestätigen (SET)
- Minus (<)
- Plus (>)

B. Vorbereitung

- Batteriestrip entfernen.

Hinweis:

Die Körperanalysewaage sofort (solange noch 0.0 angezeigt wird) auf eine ebene Fläche stellen und abwarten bis Waage selbstständig ausschaltet.

Erst dann die Dateneingabe starten. Ansonsten wäre es möglich, dass das Waagengewicht in die erstmalige Wägung fälschlicher Weise mit einfließt. Dasselbe kann auch im normalen Betrieb passieren, wenn die Waage vor der Wägung in die Hand genommen wird.

- Für alle Messungen Waage eben und auf festem Untergrund aufstellen (nicht auf Teppichboden).
- Reinigung und Pflege: Nur mit leicht feuchtem Tuch reinigen. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden. Waage nicht in Wasser tauchen.
- Möglichkeit der länderspezifischen Umstellung von kg/cm auf st/in oder lb/in durch Umschalten mit der Bedientaste auf der Rückseite der Waage.

Achtung! Rutschgefahr bei nasser Oberfläche.

**C. Dateneingabe**

Für die richtige Funktion der Körperanalysewaage ist es notwendig, dass die persönlichen Daten der jeweiligen Personen eingegeben werden und die Waage anschließend sofort barfuß betreten wird.

- Waage zum Einstellen auf einen Tisch stellen.
- Dateneingabe starten (SET- Taste 1 Sekunde drücken).
- Speicherplatz (P1 ... P8) auswählen (< = minus, > = plus) und bestätigen (SET).

- Körpergröße einstellen (< = minus, > = plus) und bestätigen (SET).
- Alter einstellen (< = minus, > = plus) und bestätigen (SET).
- Geschlecht mit </> auswählen (♂ = männlich, ♀ = weiblich) und bestätigen (SET).
- Wert des persönlichen Aktivitätsgrades gemäß der Tabelle einstellen (< = minus, > = plus) und bestätigen (SET).

Aktivitätsgrad*

1-3	Normal aktive Menschen mit leichter sitzender oder stehender Beschäftigung	max. 2 Std./ Tag stehen oder bewegen
4	Sportler, Menschen mit viel Bewegung	min. 5 Std./ Woche intensives Training
5	Schwerarbeiter, stark aktive Sportler	min. 10 Std./ Woche intensives Training

- Die Nummer des Speicherplatz wird angezeigt.



SET -Taste drücken und **3 Sekunden** halten bis 0.0 in der Anzeige erscheint.

- Dann sofort Körperanalysewaage auf Boden stellen, 0.0-Anzeige abwarten und barfuß betreten.

Die erste Messung ist zur Speicherung der Daten für die spätere automatische Personenerkennung unerlässlich. Wird die Waage nicht betreten, muss die Dateneingabe wiederholt werden.

Nach Betreten der Waage erfolgt die erste Körperanalyse.

Die Waage verfügt über einen Time out-Modus. Sie schaltet nach ca. 40 Sekunden ohne Tastenbedienung wieder aus.

Nach einem Batteriewechsel müssen die Daten erneut eingegeben werden.

***Hinweis:** Bei diesem Gerät hat die Auswahl der Aktivitätsgrade 1-3 keine unterschiedlichen Messergebnisse zur Folge.

DE 3 Jahre Garantie auf die Waage. **EN** 3 years guarantee for the scale. **FR** 3 ans de garantie sur la balance. **IT** Garanzia di 3 anni sulla bilancia. **NL** 3 jaar garantie op de weegschaal. **ES** 3 años de garantía para la báscula. **PT** 3 anos de garantia sobre a balança. **SV** 3 års garanti på vågen. **DK** 3 års garanti på vægten. **FI** 3 vuoden takuu vaa'alle. **HU** 3 év garancia a mérlegre. **PL** 3-letnia gwarancja na wagę. **CS** 3 roky záruka na váhu. **RU** 3 года гарантии на весы. **TR** Terazî için 3 yıllık garanti sunulmaktadır. **EL** Εγγύηση 3 ετών για τη ζυγαριά. **SL** 3 let garancije za tehtnico. **HR** 3 godine garancije za vagu.

DE Absender **EN** Sender **FR** Expéditeur **IT** Mittente **NL** Afzender **ES** Remitente **PT** Remetente **SV** Avsändare **DK** Afsender **FI** Lähetäjä **HU** Feladó **PL** Nadawca **CS** Odesílatel **RU** Отправиведь **TR** Gönderen **EL** Αποστολέας **SL** Odpošiljatelj **HR** Pošiljatelj

DE Beanstandungsgrund **EN** Reason for complaint **FR** Motif de réclamation **IT** Motivo del reclamo **NL** Reclamegrond **ES** Motivo de la queja **PT** Motivo da reclamação **SV** Orsak till reklamationen **DK** Reklamationsårsag **FI** Reklamaation syy **HU** Kifogás indoka **PL** powód reklamacji **CS** Důvod reklamace **RU** причина рекламации **TR** Şikayet nedeni **EL** Αίτία παραπόνου **SL** Vzrokî za reklamacijo **HR** Razlog reklamacije

DE Kaufdatum **EN** Date of purchase **FR** Date d'achat **IT** Data d'acquisto **NL** Koopdatum **ES** Fecha de compra **PT** Data da compra **SV** Inköpsdatum **DK** Købsdato **FI** Ostopäivä **HU** Vásárlás napja **PL** Data zakupu **CS** Datum zakoupení **RU** Дата покупки **TR** Satınalma tarihi **EL** Ημερομηνία αγοράς **SL** Datum nakupa **HR** Datum kupnje