


HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DES DEEP TISSUE MASSAGER PRO.

Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Hinweise auf der Verpackung, auf diesem Blatt und in der Anleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält.


LIEFERUMFANG

- a. Tiefengewebsmassagegerät Pro
- b. Austauschbare Massageknoten (x6)
- c. Netzteil
- d. Tragekoffer

a.

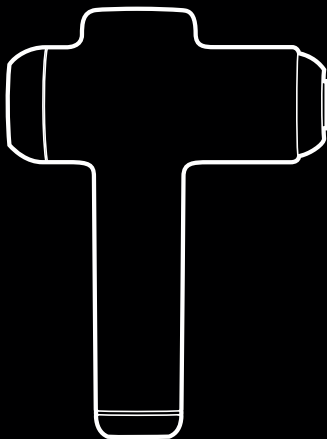


b.

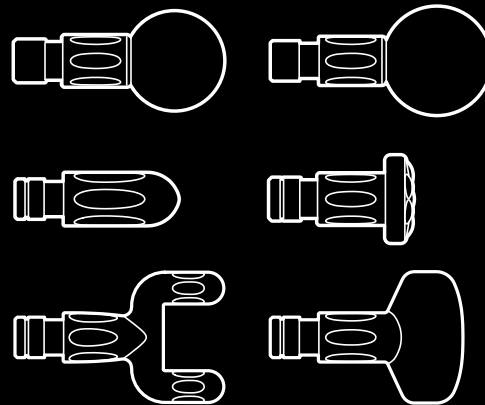

c.



d.

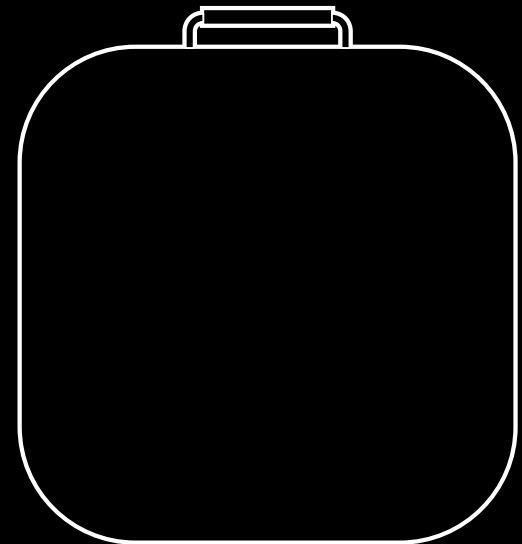

PFLEGEANLEITUNG

- Nur punktuell reinigen. Von der Stromquelle trennen und einem feuchten Tuch abwischen.
- Nur an der Luft trocknen.
- Vollständig trocknen lassen, bevor das Gerät wieder mit einer Stromquelle verbunden wird.
- Nicht ins Wasser tauchen.
- Zur Reinigung kein Reinigungsmittel oder Seife verwenden.

SICHERHEITSWARNUNGEN

- Kein Spielzeug. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Verletzung oder Krankheit haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, falls Sie aufgrund gesundheitlicher Beschwerden nicht sicher sind, ob Sie dieses Produkt gefahrlos verwenden können.
- Keine anderen als die eventuell mitgelieferten Aufsätze verwenden.
- Schlafen Sie nicht ein, während Sie das Gerät benutzen.
- Dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit einer Steckdose verbunden ist. • Gerät immer abkühlen lassen, wenn es zu heiß wird.
- Niemals unter einer Decke benutzen, wo die Luftöffnungen blockiert werden könnten. Das Gerät kann sich übermäßig erhitzen und ein Feuer, einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
- Vor extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit schützen.
- Von Wasserquellen und beheizten Flächen fernhalten.
- Den Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Dieses Produkt nicht an seinem Kabel tragen.
- Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Dieses Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
- Das Gerät darf nur mit dem Batterieladegerät verwendet werden (AUSGABE: DC 9V 1A), das mit dem Gerät geliefert wurde.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

AKKU-BATTERIEWARNUNG

- Dieses Produkt enthält nichtaustauschbare Batterien.
- Es besteht Feuer- und Verletzungsgefahr, falls die Batterie beschädigt oder falsch verwendet wurde.
- Nicht die Batterie zerlegen, beschädigen, verbrennen oder kurzschließen.
- Die Batterie niemals extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Von brennbaren Materialien und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Nur mit dem beigegefügteten Ladegerät, -kabel oder -adapter aufladen.
- Die aufladbare Batterie darf nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Während des Aufladens ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
- Vor dem Aufladen die Batterie auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Auf einer nichtbrennbaren Oberfläche aufladen und von brennbaren Gegenständen fernhalten.
- Ladevorgang abbrechen, wenn die Batterie heiß wird, sich verformt, raucht oder einen starken Geruch abgibt.
- Die Ladegeräte für dieses Produkt müssen regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Abdeckung oder anderen Bestandteilen überprüft werden. Falls eine Beschädigung vorliegt, darf das Ladegerät erst nach Reparatur des Schadens wieder verwendet werden.
- Recyceln oder entsorgen Sie leere Batterien entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen und Gesetze.
- Diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

FCC-ERKLÄRUNGEN

FCC-ERKLÄRUNGEN

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ANMERKUNG: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Interferenzen kommt. Falls dieses Gerät Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht, was

durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, diese Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne umstellen oder anders ausrichten.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die, an die der Receiver angeschlossen ist.
- Händler oder einen erfahrenen Funk- und Fernsehtechniker konsultieren.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.



Um das Stromschlagrisiko zu verringern, den Netzstecker dieses Geräts immer sofort nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen aus der Steckdose ziehen.




Distributed by and © 2020 ThreeSixty Sourcing Ltd. All rights reserved.

For US only: Distributed by and © 2020 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. All rights reserved. Tel: 1-800-374-2744.

Sharper Image® name and logos (including the 77 logo) are trademarks or registered trademarks.

Printed in China

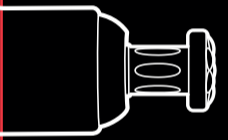


DIE ZUKUNFT DER ENTDECKUNG

01

Zum Aufladen das Netzteil mit dem Massagegerät verbinden und dann mit einer Steckdose.


Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot, sobald das Gerät aufgeladen ist, leuchtet sie weiß. Der Akku muss für sechs Stunden vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Das Massagegerät nicht benutzen, während es aufgeladen wird.

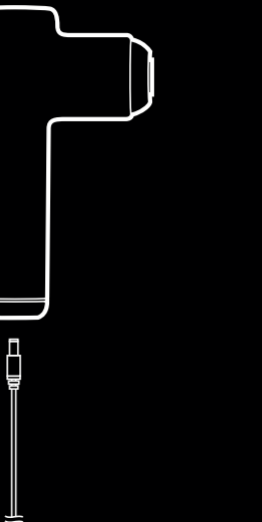

02

Den gewünschten Massageknoten auswählen und anbringen.

Auf der Rückseite finden Sie eine Anleitung zum Austauschen der Knoten.

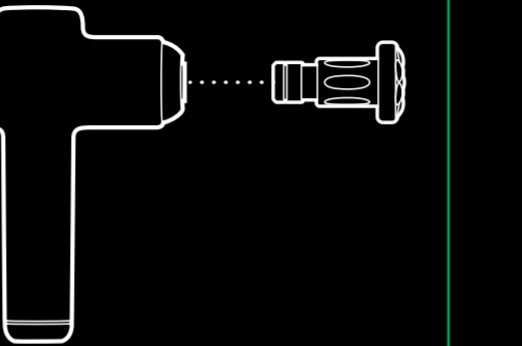

03

Ein/Ausschalter am Boden des Geräts auf ON stellen. Ein/Aus-Taste drücken, um das Massagegerät einzuschalten. Erneut drücken, um durch die sechs Intensitätsstufen zu zirkulieren.

Die Knoten können ausgetauscht werden, um die Massage individuell anzupassen. Knoten nur austauschen, wenn das Massagegerät ausgeschaltet ist.

Anzeige des Akkustands
der Intensität

Betrieb/Intensität



04

Pro Bereich 60 Sekunden benutzen. Nicht am Nacken, Kopf oder auf den harten bzw. knöchigen Bereichen des Körpers verwenden.

Genießen Sie Ihre Massage bis zu 10 Minuten.



SHARPER IMAGE®


ANLEITUNG ZUM
AUSTAUSCHEN DER KNOTEN

BALL

Wirkung auf große Bereiche für allgemeinen Massagekomfort.


GUT FÜR:

Gesäßmuskulatur, Quadrizeps, Arme

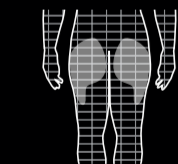

TIEFENWIRKUNG

Niedrig

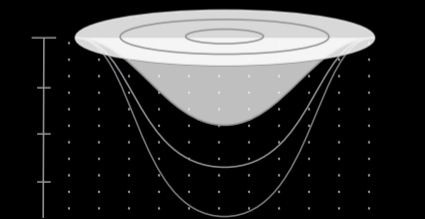


RUND

Hergestellt aus haltbarem Schaumstoff, aber für mehr Präzision konzipiert.


GUT FÜR

Unterarme, Bizeps, Schienbeine

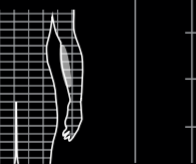

TIEFENWIRKUNG

Niedrig

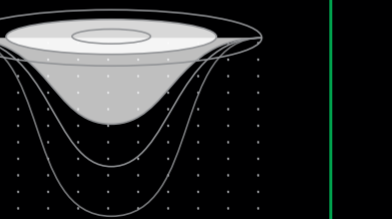


FLACH

Die klopfende Wirkung dringt tiefer in die Muskeln.


GUT FÜR

Brustmuskeln, Quadrizeps, Gesäßmuskulatur, Waden

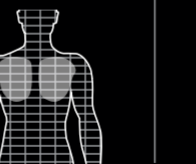

TIEFENWIRKUNG

Medium

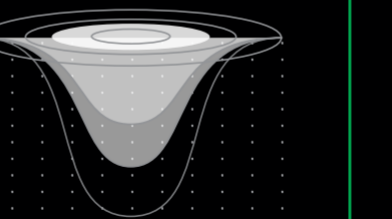


GABEL

Behutsam hin und her schwingen, um Knoten und Verspannungen zu lösen.


GUT FÜR

Trapezius, Quadrizeps, Waden, Füße

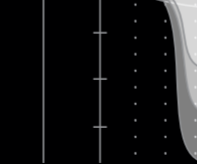

TIEFENWIRKUNG

Hoch

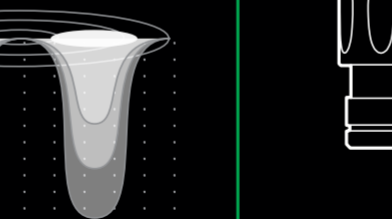


RECHTECK

Der abgerundete Rand bietet Komfort mit überraschender Kraft.


GUT FÜR

Tractus Iliotibialis (IT-Band), Bizeps

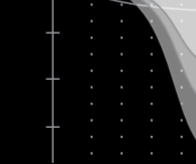

TIEFENWIRKUNG

Hoch

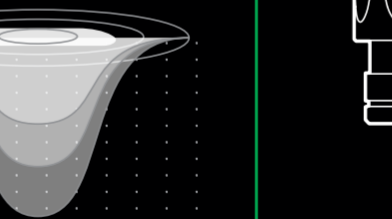


KEGEL

Dieser punktgenaue Massagekopf bietet eine beispiellose Tiefenwirkung.


GUT FÜR

Füße, Schulterblatt, Unterarm

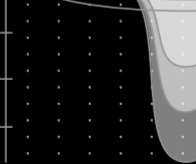

TIEFENWIRKUNG

Hoch

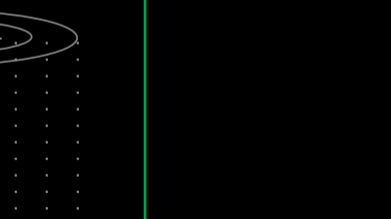

SHARPER IMAGE®

VORBEREITUNG