BEHEIZTES NACKEN- UND SCHULTERMASSAGEGERÄT

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres beheizten Nacken- und Schultermassagegeräts. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Warnhinweise. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sie enthält wichtige Informationen.

INHALT

- · Beheiztes Nacken- und Schultermassagegerät
- AC-Netzadapter

FASER INHALT


LEINENSTOFF: 50 % Polyester, 50 % Kation. PLÜSCH: 100 % Polyester.

MERKMALE

- · vibrierende Massage für schmerzende oder verspannte Muskeln
- · einstellbare Wärme niedrig, hoch oder aus
- 5 Impuls-Massage-Modi
- · unabhängiger Massage- und Wärmebetrieb
- · schaltet sich zur Sicherheit nach 30 Minuten automatisch ab

ERSTE SCHRITTE

- 1. Stecken Sie den Netzadapter in das beheizte Nacken- und Schultermassagegerät und in eine Steckdose.
- 2. Legen Sie das Massagegerät an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
 - Drücken Sie die Heizungswahltaste, um eine Heizstufe zu wählen oder sie auszuschalten.
 - Drücken Sie die Impulsauswahl, um aus 5 Vibrationsmodi zu wählen.
- 3. Genießen Sie Ihre Massage!

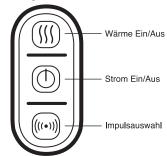

ANMERKUNG: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird. Interferenzen des Funkverkehrs verursachen.

Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Interferenzen kommt. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne umstellen oder anders ausrichten.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen . Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose

Vertrieb von und © 2020 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Nur für US: Vertrieb von und © 2020 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. Alle Rechte vorbehalten. Tel.: 1-800-374-2744.

Sharper Image® Name und Logos (einschließlich des 77-Logos und Tomorrow's Tomorrow) sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen. Made in China

Produktname: Beheiztes Nacken- und Schultermassagegerät

Modell-Nummer: 1216001841

Nennleistungsaufnahme: DC 12 V, 2,5 A Hersteller: ThreeSixty Sourcing Ltd.

Bewertung des Adapters: Eingangsleistung:100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0,8 A.

Ausgangsleistung: DC 12 V, 2,5 A 30,0 W

FEHLERSUCHE

- 1. Wenn das Massagegerät plötzlich abschaltet
- Der Timer hat sich möglicherweise eingeschaltet. Fahren Sie mit der Verwendung fort, indem Sie die Netztaste drücken. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, lassen Sie es 15 Minuten ruhen und versuchen Sie es
- Der Überhitzungsschutz hat möglicherweise angesprochen. Lassen Sie das Massagegerät 15 bis 30 Minuten ruhen.
- 2. Das Massagegerät schaltet sich nicht ein
 - Prüfen Sie, ob der Adapter in der Steckdose steckt und ob er mit dem
 - Eingangskabel des Massagegeräts verbunden ist
 - Prüfen Sie, ob das Massagegerät zuvor benutzt wurde und lassen Sie es 15 Minuten lang ruhen. Das Gerät benötigt in wärmeren Umgebungen möglicherweise eine längere Zeit zum Abkühlen .

PFLEGEHINWEISE:

- Reinigen Sie das Gerät nur punktuell. Ziehen Sie den Netzstecker und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab.
- Nur an der Luft trocknen lassen. Geben Sie es niemals in einen Trockner.
- Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einstecken.
 Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- · Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungsmittel oder Seife.
- · Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort.
- Wenn Sie das Gerät lagern, lassen Sie es vor dem Zusammenklappen abkühlen.
- Weim Sie das Gerät nicht, indem Sie es von ein Zusammennappen abküllen.
 Knicken Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf legen.
 Untersuchen Sie das Gerät häufig auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden. Wenn solche Anzeichen vorhanden sind, das Gerät missbraucht wurde oder nicht funktioniert, senden Sie es an den Lieferanten zurück, bevor Sie es wieder einschalten.
 Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern vorgesehen.
- · Verwenden Sie es nicht in nassem Zustand.
- Dieses Gerät darf nicht von hitzeunempfindlichen Personen und anderen sehr gefährdeten Personen benutzt werden, die nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.

 Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht auf Überhitzung
- reagieren können.

SICHERHEITSHINWEISE: BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

- Kein Artikel für Kinder, Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Tragen Sie bei der Verwendung immer ein Hemd/Kleidung. Nicht auf nackter Haut verwenden, um mögliche Reizungen zu vermeiden. Verwenden Sie diesen Artikel nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Verletzung oder Krankheit haben.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie an einer Krankheit leiden, die eine sichere Verwendung dieses Artikels verhindern könnte.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile.
 Schlafen Sie während der Anwendung nicht ein.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
 Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, wenn es zu heiß wird.
- Betreiben Sie das Geräf niemals unter Decken, unter denen die Luftöffnung blockiert werden kann.
 Übermäßige Hitze kann auftreten und zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
- Niemals extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aussetzen.
 Halten Sie das Gerät von Wasser und erhitzten Oberflächen fern.
- · Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an
- Tragen Sie diesen Artikel nicht am Kabel.
- Nur zur äußeren Anwendung.
- Produkte vor jeder Benutzung gründlich inspizieren. Wenn das Produkt abgenutzt, ausgefranst/gesplittert, rissig oder in irgendeiner Weise gebrochen erscheint, verwenden Sie es nicht mehr und entsorgen Sie es
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten AC-Netzadapter (AUSGANGSLEISTUNG DC 12 V 2,5 A) betrieben werden.



Nicht für die Verwendung durch sehr kleine Kinder geeignet. (0 bis 3 Jahre)



Nicht bügeln.



Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände (z.b. Sicherheitsnadeln)



Lesen Sie die Anleitung.



Nicht waschen.



Nicht chemisch reinigen.



Nicht bleichen.



Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEE). Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden, und so seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die WAH), sein Produkt beim Kauf eines neuen elektrischen oder elektronischen Geräts an eine kompetente Recycling-Organisation oder an den Einzelhändler zu geben. Geräte.

WICHTIGE HINWEISE. FÜR ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.

Aufgrund ständiger Produktverbesserungen kann die Abbildung in der Anleitung leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen

Artikelnummer: 701911

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

HAFTUNG

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

ENTSORGUNG

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Der Fachhandel stellt diese Sammelstellen für Batterien bereit. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.





Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. *Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: https://productip.com/?f=138f73



GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN

Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Materialoder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

DIE GARANTIE GILT NICHT:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- Für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- Bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- Wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- · Bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- Bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- · Bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- Bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- · Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

BATTERIEN/AKKUS UNTERLIEGEN KEINER GARANTIE, DA DIESE VERBRAUCHSTEILE SIND.

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

Service-Adresse

Lived non food GmbH I Friedrich-Seele-Straße 20 DE-38122 Braunschweig, Germany +49 (0) 531 224356-82 Lived non food GmbH I Friedrich-Seele-Straße 20 DE-38122 Braunschweig, Germany www.lived-non-food.de