


Aufblasbares Nackenmassagekissen

Best-Nr.: 2498118

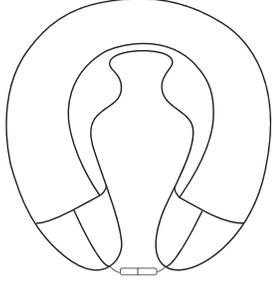

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen.....	01
Grundlegendes.....	02
Auflademethode.....	03
Anweisungen.....	04
Produktdetails.....	05-06
Gewährleistung.....	07
Gewährleistungskarte.....	08

Vorsichtsmaßnahmen

Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt richtig und sicher verwenden, lesen Sie bitte auf jeden Fall die Bedienungsanleitung. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen gilt der folgende Satz. Das Unternehmen ist nicht für die Folgen verantwortlich.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, während Sie in einem Auto fahren.
- Entfernen Sie bei der Benutzung Zubehör oder andere Gegenstände, die die Massage beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung, wie z. B. in einem Badezimmer.
- Halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer und korrosiven Umgebungen fern.
- Wenn es in einer bestimmten Umgebung verwendet wird, beachten Sie bitte die Sicherheitsvorschriften.
- In bestimmten Massagebereichen dürfen Sie es nicht verwenden.
- Verwenden Sie es nicht, wenn in dem Massagebereich Beschwerden wie Hautschäden, eine Rötung, eine Entzündung oder ein Blutandrang vorliegen.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie unter Herz- oder anderen Erkrankungen leiden; Patienten mit akuten Erkrankungen, Patienten mit Hauterkrankungen, Patienten mit bösartigen Tumoren oder Patienten mit körperlichen Anomalien sollten ebenfalls von einer Verwendung absehen.
- Verwenden Sie es nicht bei Patienten mit Blutkrankheiten wie Blutungsneigung, Osteoporose, Weichteilerkrankungen und Schlaganfall.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie eine Bewegungseinschränkung, geistige oder körperliche Beschwerden haben oder geistig zurückgeblieben sind. Wenn Sie es verwenden müssen, beachten Sie bitte die Anweisungen Ihres Arztes.
- Bitte beenden Sie die Anwendung, wenn Sie währenddessen Beschwerden haben. Schwangere und Frauen während der Menstruation sollten das Massagekissen nicht verwenden.
- Die Verwendung durch Kinder unter 6 Jahren ist verboten. Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren dürfen das Massagekissen nur unter Anleitung und Aufsicht der Eltern oder anderer Personen benutzen.
- Wenn Sie das Massagekissen reinigen müssen, sollten Sie in Alkohol getränkte Watte verwenden, um eine Reinigung mit Wasser zu vermeiden.
- Halten Sie scharfe Gegenstände von dem Produkt fern, da diese es beschädigen können.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Gesundheitsprodukt für den Hausgebrauch, es ist nicht als medizinisches Gerät gedacht und nicht für diagnostische, therapeutische oder andere kommerzielle Zwecke bestimmt.

- Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Produkts ausschließlich das von unserem Unternehmen mitgelieferte Ladegerät und achten Sie bei dessen Verwendung auf Ihre Sicherheit.
- Sollte während der Verwendung etwas Anomales auftreten, schalten Sie bitte sofort den Strom ab.
- Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Produkt verfügt über eine heiße Moxibustionsfunktion und eine Heizfläche, sodass nicht hitzeempfindliche Personen bei der Verwendung vorsichtig sein müssen.

Grundlegendes

* Die Häufigkeit der Verwendung
Verwenden Sie das Produkt je nach Bedarf. Es wird empfohlen, die Dauer der Massage innerhalb eines Zeitrahmens von 10 - 30 Minuten zu belassen und angemessene Intervalle einzuhalten. Übermäßige Verwendung kann körperliche Beschwerden, Hals- und Hautverletzungen verursachen. Daher sollten Sie bei der ersten Verwendung Ihre körperliche Verfassung und eventuelle Veränderungen von Schulter, Nacken und Haut beobachten, um die Anwendungszeit gegebenenfalls zu minimieren.

* Die passende Größe
Dieses Produkt ist für einen Halsumfang von etwa 30 bis 40 cm geeignet.

* Die Verwendung
Wenn Sie dieses Produkt verwenden, lehnen Sie sich bitte an die Rückenlehne Ihres Stuhls und entspannen Sie Ihren Körper vollständig. Bitte nehmen Sie Schmuck wie Halsketten, Kopfhörer mit Nackenbügel und Halsanhänger ab. Wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein im Schulter- und Nackenbereich verspüren, stoppen Sie bitte die Verwendung des Produkts und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

* Ihr Zustand nach dem Verwenden
Der Nacken und der umliegende Bereich können sich kurzzeitig röten, erholen sich aber nach einiger Zeit von selbst.

* Sonstiges
Während der Verwendung gibt das Produkt ein spezielles Geräusch von sich, das von der Rotation des Massagekopfes herrührt; außerdem ist das Geräusch, das beim Einstellen des Luftstroms entsteht, keine Anomalie des Produkts.

Produktdetails	5	4	3	2
Modell	FE-4003			
Nennleistung	5 W			
Nennspannung	5 V- 1 A			
Akkukapazität	2200 mAh			
Schnittstelle zum Aufladen	USB-C™			
Lagerung	Wenn die Lagerungszeit 3 Monate überschreitet, sollte das Produkt vor dem erneuten Verwenden überprüft und aufgeladen werden.			
Laufzeit	Heizen Sie das Produkt von Wasser, starker Wärme oder einer feuchten Umgebung fern. Lichteinwirkung und Einfluss von korrosiven Gasen sind zu vermeiden.			
Transport	Die Produktverpackung ist mit einfachen stabilsten Elementen ausgestattet, die für den Transport per Flugzeug, Bahn, Straße und Schiff geeignet sind.			
Stromversorgung	Überprüfen Sie die Stromversorgung. Wenn die Versorgungsspannung den angegebenen Bereich überschreitet, dürfen Sie das Produkt nicht verwenden.			
Wartung	Ergreifen Sie Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit, Nässe und Verschmutzung. Das Reinigen sollte in ausreichendem Abstand erfolgen. Das Produkt sollte nach der Verwendung an einen sicheren Ort gebracht werden. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Wenn ein Fehler auftritt, sollte ein professioneller Techniker mit der Reparatur beauftragt werden. Das Produkt darf nicht von Lötlern zerlegt werden.			
Umwelt	Ergänzung und Recycling Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie sich entscheiden, dieses Produkt zu entsorgen, entsorgen Sie es in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltafgesetzen und -richtlinien.			

Richtige Verwendung

- Schließen Sie das USB-Ladekabel an den Host an.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
Das Hauptgerät gibt die Ladetemperatur an, dann blinkt die Ladetemperatur auf dem Bedienelement. Nach Abschluss des Ladevorgangs fuchtet die Ladetemperatur ab.
* Es ist normal, dass sich das Hauptgerät und das Netzteil während des Aufladens leicht erwärmen.
- Ein-/Aussschalten
Langes Drücken der [Ein-/Aussschalt-Taste] (2 s) schaltet das Produkt ein oder aus, Massagenfunktion
3. Massagenfunktion
Es gibt 2 Modi für die Drehung des Massagekopfes. Drücken Sie kurz auf die [Ein-/Aussschalt-Taste], um den Modus zu wechseln, dabei ertönt der Summer. Der Summer gibt drei kurze „Piepöne“ ab; Ausschalten: Der Einschalter gibt einen kurzen „Troffen-Ton“ ab; Ausschalten: Der Summer gibt drei kurze „Piepöne“ ab; Ausschalten: Der [Ein-/Aussschalt-Taste] (2 s) schaltet das Produkt ein oder aus, Massagenfunktion
4. Aufhalsfunktion
Das Produkt wird beim Einschalten aufgebblasen. Nachdem der Luftsack voll ist, beginnt der Massagekopf sich zu drehen;
5. LED-Kontrollleuchte
LED-Kontrollleuchte
Zweifarbiges Licht, normaler Betrieb beim Einschalten - LED blinkt grün; Unterbrechung - LED blinkt rot;
6. Wärmefunktion
Die Heizung ist standardmäßig aktiviert, wenn das Produkt eingeschaltet wird. Drückluftventilbauweise
Anweisungen zum Aufblasen und Ablassen der Luft
Ablassen der Luft durch Drücken des Luftventils
Bitte überprüfen Sie, ob das Luftventil geöffnet ist, wenn Sie mit dem Aufblasen beginnen.
* Bei Erstbenutzung oder bei Personen mit empfindlicher Haut, beobachten Sie bitte eventuelle Veränderungen an Hals und Haut während der Verwendung.
- Erhebung neben der Einschalttaste.
Sowohl die Einschalttaste als auch die Modusstaste sind versenkt mit einer kleinen Erhebung neben der Einschalttaste.
Sie können die Position und die Art der Tasten durch Erhitzen feststellen.
Das Bedienelement kann links oder rechts sein.
zum Hinterrumpf und tragen Sie das Produkt um den Hals.
2. Halten Sie die Hände an beiden Enden des Trägers, wickeln Sie ihn vorne vom Kopf ab.
Der maximale Halsumfang für dieses Produkt beträgt ca. 40 cm.
1. Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Zugschnalle, um die Zugschnalle zu öffnen.
Hinweise zum Anhängen
1. Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Zugschnalle, um die Zugschnalle zu öffnen.
3. Wenn das rote Licht blinkt, laden Sie das Produkt bitte sofort auf.
2. Verwenden Sie das Produkt nach dem vollständigen Aufladen jeweils 10 Minuten lang (Modus 1 und Modus 2).
1. Es dauert etwa 3,5 Stunden, bis das Produkt vollständig aufgeladen ist.