

Lékařský teploměr Scala SC 53

Obj. č.: 234 52 58



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lékařského teploměru Scala.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti


- ♦ Měření teploty na čele, v uchu a v okolí (např. teploty v místnosti).
- ♦ Vestavěné quartzové hodiny zobrazují čas.
- ♦ Nízká spotřeba energie (cca 2 roky, pokud funguje jako pokojový teploměr a hodiny).
- ♦ Místo v paměti pro 10 naměřených hodnot.

Účel použití

Teploměr SC 53 FH je určený výhradně k měření tělesné teploty lidí na čele a v uchu.



Popis a ovládací prvky

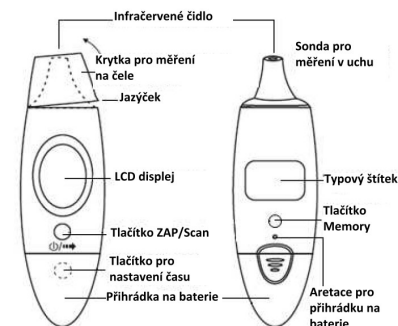

Uvedení do provozu

Z přihrádky na baterie vytáhněte izolační proužek. Na displeji se na okamžik objeví všechny segmenty.

Nastavení času


Teploměr SC 53 FH položte na pevný podklad (stůl) tak, aby ukazoval zadní stranou nahoru.

Zatlačte aretaci pro přihrádku na baterie (nějakým špičatým předmětem) asi 1 mm do pouzdra a současně stáhněte víčko přihrádky na baterie. Na druhé straně teploměru, v přihrádce na baterie, uvidíte tlačítko pro nastavení času.

Toto tlačítko případně opakovaně stiskněte, dokud nezačnou blikat hodiny. Tlačítkem ZAP/Scan můžete nastavit hodiny.

Po dalším stisknutí tlačítka pro nastavení času začnou blikat minuty. Tlačítkem ZAP/Scan můžete nastavit minuty.

Po dalším stisknutí tlačítka pro nastavení času je nastavení dokončené. Přístroj se nyní nachází v klidovém stavu a střídavě zobrazuje čas a teplotu v okolí.

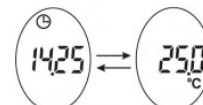


Víčko přihrádky na baterie nasadte zpátky. Musí slyšitelně a citelně zaklapnout.

Poté, co jste nastavili čas, vložte přístroj do přiloženého uchycení. Získáte tak atraktivní hodiny s teploměrem.



LCD displej / vysvětlivky k symbolům

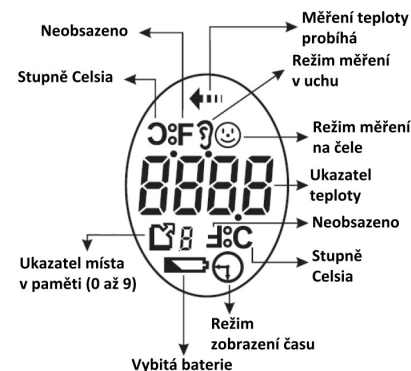

Měření v uchu

Co je třeba dodržovat:

- Někteří lidé mají mírně odlišnou teplotu v levém a v pravém uchu. Proto měřte vždy ve stejném uchu.
- Měření v uchu u dětí by měli provádět pouze dospělí.
- Měření u kojenců je možné až od věku 6 měsíců. U kojenců do 6 měsíců je zvukovod ještě příliš úzký a měření by mohlo být bolestivé.
- Měření se nesmí provádět v případě zánětlivých onemocnění ucha. Stejně tak, pokud je ucho poraněné (např. při poškození ušního bubínku) nebo pokud se ucho nachází ve fázi hojení po operačním zákroku.
- Pokud se teploměr SC 53 FH používá jako teploměr pro měření v uchu, měl by se z hygienických důvodů používat pouze u jedné osoby.
- Pokud jste leželi na uchu, může být teplota mírně zvýšená. Chvilí počkejte, nebo měřte ve druhém uchu.
- Ušní maz ovlivňuje měření. Ucho byste měli před měřením vyčistit.

Měření tělesné teploty v uchu „“:

Krytku pro měření na čele tiskněte na jazyčku směrem nahoru. Počínaje ukazatelem času stiskněte tlačítko ZAP/Scan. Na displeji se objeví všechny segmenty. Pak se zobrazí blikající „“ nebo „“. Dokud symbol bliká, můžete přepínat mezi oběma režimy.



Nastavte blikající ucho. Naposledy naměřená teplota se ještě jednou zobrazí.

Následuje pípnutí a teploměr je připravený k měření jako teploměr pro měření v uchu.

Opatrně zaveďte sondu pro měření v uchu do zvukovodu. Krátce stiskněte tlačítko ZAP/Scan.

Po 2 až 3 sekundách ohlásí pípnutí konec měření. Při zavádění sondy stáhněte ušní boltec šikmo dozadu, abyste trochu vyrovnali zakřivení zvukovodu. Teploměr nesmí být zaveden do ucha příliš daleko, aby nedošlo ke zranění. Zasuňte teploměr do ucha jen tak daleko, jak je vám to příjemné.

Měření teploty na čele

Měření tělesné teploty na čele „“:



Poté, co jste teploměr nastavili pro měření na čele, s nasazenou krytkou pro měření na čele se dotkněte čela a spánku. Infračervené čidlo musí mít kontakt s pokožkou. Pak stiskněte tlačítko ZAP/Scan a podržte je stisknuté. Nyní přejedte infračerveným čidlem (udržujte kontakt s pokožkou) přes čelo ke druhému spánku. Tlačítko ZAP/Scan uvolněte. Konec měření potvrdí pípnutí. Uvědomte si prosím, že teplota na čele může být ovlivněna klimatickými podmínkami. Máte-li pochybnosti o výsledku měření, změřte teplotu v uchu.

Paměti pro naměřené hodnoty

Z paměti si můžete vyvolat až 10 uložených naměřených hodnot.

Stiskněte tlačítko ZAP/Scan a následně tlačítko Memory na zadní straně přístroje.

Zobrazí se naposledy naměřená hodnota (místo v paměti 0). Po dalším stisknutí tlačítka Memory se zobrazí předposlední naměřená hodnota (místo v paměti 1) atd. Na místě v paměti 9 je uložena nejstarší hodnota, která se po dalším měření ztratí, protože se všechny naměřené hodnoty posunou o místo dozadu.

Po odstranění baterie se vymaže paměť.

Mikrobakteriální kontaminace

Pokud se teploměr SC 53 FH používá jako teploměr pro měření v uchu, měl by se z hygienických důvodů používat pouze u jedné osoby. Můžete se tak vyhnout šíření infekčních onemocnění. Navzdory čištění a dezinfekci nelze zcela zamezit šíření choroboplodných zárodků.

Výměna baterie

Jakmile se na displeji zobrazí symbol „“, je nutná výměna baterie. Vyměňte baterii (CR 2032).

Otevřete přihrádku na baterie, jak je popsáno v kapitole „Nastavení času“. Při vložení nové baterie dbejte na její orientaci.

Kalibrace

Kontrola přesnosti měření teploměru SC 53 FH zpravidla není zapotřebí.

Pro přístroje, které se používají ve zdravotnictví, je předepsaná kalibrace vždy po 2 letech.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do lékařského teploměru.

Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.




Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Každá lékárna nabízí tampony s alkoholem (od různých výrobců), kterými lze celý přístroj otřít.

Pro infračervené čidlo použijte vatovou tyčinku namočenou v alkoholu.

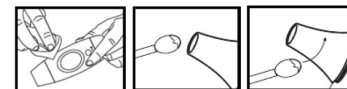

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéká nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozsah měření lékařského teploměru	35 až 42 °C
Zobrazení Lo	teplota naměřená čidlem < 35 °C
Zobrazení Hi	teplota naměřená čidlem > 42 °C
Jako pokojový teploměr	15 až 35 °C
Přesnost měření	±0,2 °C v rozmezí 35 °C až 42 °C
Rozlišení displeje	0,1 °C
Provozní podmínky	15 až 35 °C při rel. vlhkosti vzduchu 95 % (bez kondenzace)
Podmínky skladování	-25 až 55 °C při rel. vlhkosti vzduchu 95 % (bez kondenzace)
Napájení	1× baterie CR2032
Místa v paměti	10
Hmotnost	cca 45 g (vč. baterie)
Rozměry	cca 110,5 × 34 × 23,5 mm (V×Š×H) bez uchycení



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/03/2024