




Panasonic EW-DJ86 Ustni izplakovalec z možnostjo ponovnega polnjenja

Navodila za uporabo

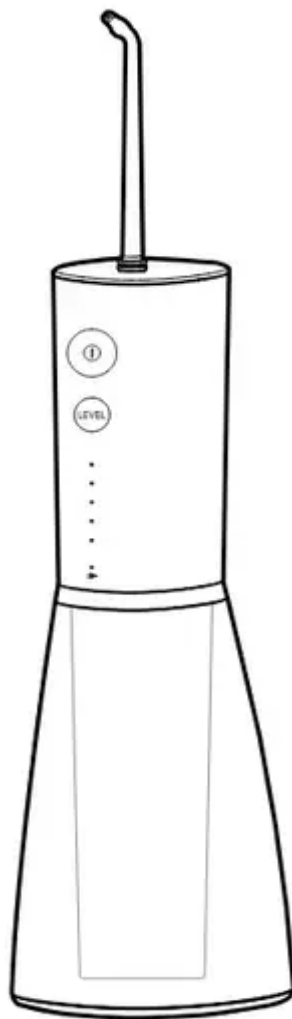

Navodila za uporabo (uporaba v gospodinjstvu)
Navodila za uporabo
Ustni irigator za ponovno polnjenje
Št. modela EW-DJ86

Vsebina [skriti](#)

[1 EW-DJ86 ustni irigator za ponovno polnjenje](#)

[2 Varnostni ukrepi](#)

[3 Pomembne informacije](#)

[4 Kako uporabljati](#)

[5 Življenjska doba baterije](#)

[6 Odstranjevanje vgrajene akumulatorske baterije](#)

[7 Specifikacije](#)

[8 Dokumenti / viri](#)

[8.1 Reference](#)

EW-DJ86 ustni irigator za ponovno polnjenje

OPOZORILO

- Napajalnika USB in kabla USB ne potaplajte v vodo in ju ne čistite z vodo. To lahko povzroči električni udar ali požar zaradi kratkega stika.
- Pri čiščenju napajalnika USB in kabla USB adapter vedno izključite iz gospodinjske vtičnice. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara ali poškodb.
- Ustne irigatorje lahko pod nadzorom uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja.
- Ustni irigatorji se uporabljajo samo s hladno ali toplo vodo ali posebnimi raztopinami, kot je določeno v navodilih proizvajalca.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Za noben namen ne uporabljajte drugega kot priloženi napajalnik USB ali kabel USB. Prav tako z napajalnikom USB ali kablom USB ne uporabljajte nobenega drugega izdelka. To lahko povzroči opekline ali požar zaradi kratkega stika.
- Naslednji simbol označuje, da je za priključitev električnega aparata na električno omrežje potrebna posebna snemljiva napajalna enota. Sklic na tip napajalne enote je označen v bližini simbola.

Varnostni ukrepi

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, smrtnih žrtev, električnega udara, požara in materialne škode, vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.

Razlaga simbolov

Naslednji simboli se uporabljajo za razvrščanje in opisovanje stopnje nevarnosti, poškodb in materialne škode, ki nastanejo ob neupoštevanju oznake in nepravilni uporabi.

 NEVARNOST	Označuje potencialno nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
 OPOZORILO	Označuje potencialno nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
 POZOR	Označuje nevarnost, ki lahko povzroči manjše poškodbe ali materialno škodo.

OPOZORILO

Preprečevanje nesreč

- Ne shranjujte v dosegu otrok ali dojenčkov. Ne dovolite jim, da ga uporabljajo.
 - To lahko povzroči nesrečo ali poškodbe zaradi nenamernega zaužitja odstranljivih delov.

O napajalniku USB in kablu USB

- Napajalnika USB ali kabla USB ne postavljajte nad umivalnik ali kopalno kad ali v njuno bližino.
- Naprave ne uporabljajte, če je napajalnik USB ali kabel USB poškodovan ali če je nastavek v gospodinjski vtičnici zrahljan.
- Ne poškodujte, spreminjajte, na silo upogibajte, vlečite ali zvijate kabla.
Prav tako na kabel ne postavljajte težkih predmetov ali ga stiskajte.
- To lahko povzroči električni udar ali požar zaradi kratkega stika.
- Napajalnika USB ali kabla USB ne priključite ali odklopite iz gospodinjske vtičnice z mokro roko.
- To lahko povzroči električni udar ali poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte tako, da bi presegli zmogljivost gospodinjske vtičnice ali napeljave.
- Prekoračitev nazivne vrednosti s priključitvijo prevelikega števila vtičev na eno gospodinjsko vtičnico lahko povzroči požar zaradi pregrevanja.
- Uporabite določen napajalnik USB in kabel USB.
- V nasprotnem primeru lahko zaradi kratkega stika pride do opeklin ali požara.
- Popolnoma vstavite vtič napajalnika USB.
- Če tega ne storite, lahko pride do požara ali električnega udara.
- Pred polnjenjem z vtičnice obrišite morebitne kapljice vode.
- Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara, poškodb ali požara.

V primeru nepravilnosti ali okvare

- V primeru nepravilnosti ali okvare takoj prenehajte z uporabo.
Med uporabo izključite napajalnik USB iz gospodinjske vtičnice.
- Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali poškodb.
<Primeri nepravilnosti ali okvare>
- Glavna enota, napajalnik USB ali kabel USB je deformiran ali nenormalno vroč.
- Glavna enota, napajalnik USB ali kabel USB smrdijo po gorenju.
- Med uporabo ali polnjenjem glavne enote se sliši neobičajen zvok.
- Takoj zahtevajte pregled ali popravilo pri pooblaščenem servisnem centru.

Ta izdelek

- Ta izdelek ima vgrajeno akumulatorsko baterijo. Ne mečite je v ogenj, ne segrevajte, ne polnite, ne uporabljajte in ne puščajte v okolju z visoko temperaturo.
- To lahko povzroči pregrevanje, vžig ali eksplozijo vgrajene akumulatorske baterije.
- Ne spreminjajte ali popravljajte.
- To lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
→ Za popravilo (zamenjava baterije itd.) se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Izdelka nikoli ne razstavljajte, razen pri odstranjevanju.
- To lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.



OPOZORILO

Čiščenje

- Pri čiščenju naprave z vodo vtič USB vedno odklopite iz glavne enote.
- Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara ali poškodb.
- Redno čistite napajalni vtič in vtiče USB, da preprečite nabiranje prahu.
- Če tega ne storite, lahko pride do požara zaradi okvare izolacije, ki jo povzroči vlaga.
→ Napajalnik USB izključite iz gospodinjske vtičnice in ga obrišite s suho krpo.



POZOR

Preprečevanje poškodb zob in dlesni

- Osebe, ki niso sposobne upravljati naprave, je ne smejo uporabljati.
- Ljudje s šibkimi ustnimi čutili tega aparata ne smejo uporabljati.
- To lahko povzroči poškodbe ali poškodbe zob in dlesni.
- Ljudje, ki imajo morda parodontalno bolezen, zdravijo zobe ali jih skrbijo simptomi v ustih, se morajo pred uporabo posvetovati z zobozdravnikom.
- V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb ali poškodb zob in dlesni.

Ta izdelek

- Nikoli ne uporabljajte za druge namene kot za čiščenje ustne votline.
- To lahko povzroči nesrečo ali poškodbo, če je tok vode usmerjen proti očem, nosu, ušesom, jeziku ali grlu.
- Rezervoarja ne polnite z vodo, toplejšo od 40 °C.
- To lahko povzroči opekline.
- Šobe ne delite z družino ali drugimi ljudmi.
- To lahko povzroči okužbo ali vnetje.

Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe

- Naprave ne spusti in je ne izpostavljajte udarcem.
- To lahko povzroči poškodbe.
- Na vtič napajalnika USB ali vtič USB ne smete prilepiti igel ali drugih tujih predmetov.
- To lahko povzroči električni udar ali požar zaradi kratkega stika.
- Naprave ne polnite, če je vtičnica mokra.
- To lahko povzroči opekline ali požar.
- Pri shranjevanju ne ovijte kabla okoli napajalnika USB.
- To lahko povzroči, da se žica v kablu z bremenom pretrga in lahko zaradi kratkega stika povzroči požar.
- Odklopite napajalnik USB ali vtič USB (Type-C) tako, da ga držite namesto kabla.
- Če tega ne storite, lahko pride do opeklin ali električnega udara zaradi zloma žice kabla USB ali do požara zaradi kratkega stika.
- Kadar adapterja ne polnite, ga izključite iz gospodinjske vtičnice.
- Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara ali požara zaradi uhajanja električne energije, ki je posledica poškodbe izolacije.

- Po uporabi napravo in šobo očistite in posušite.
- Če tega ne storite, lahko zaradi razmnoževanja plesni in bakterij škodujete svojemu zdravju.

Ravnanje z odstranjeno baterijo pri odstranjevanju



NEVARNOST

- Akumulatorska baterija je namenjena izključno za uporabo s to napravo. Baterije ne uporabljajte z drugimi izdelki.
- Ne polnite baterije, ko jo odstranite iz izdelka.
- Ne mečite v ogenj in ne segrevajte.
- Ne udarjajte, ne razstavljajte, ne spreminjajte in ne prebadajte z žebli.
- Pozitivni in negativni priključek baterije ne smeta priti v stik s kovinskimi predmeti.
- Baterije ne prenašajte ali shranjujte skupaj s kovinskim nakitom, kot so ogrlice in sponke za lase.
- Baterije ne uporabljajte in ne puščajte na mestih, kjer bi bila izpostavljena visokim temperaturam, na primer pod neposredno sončno svetlobo ali v bližini drugih virov toplote.
- Nikoli ne odlepите cevke.
- To lahko povzroči pregrevanje, vžig ali eksplozijo.



OPOZORILO

- Ko odstranite akumulatorsko baterijo, je ne hranite v dosegu otrok in dojenčkov.
- Baterija bo ob nenamernem zaužitju škodovala telesu.
Če se to zgodi, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Če tekočina iz baterije izteče in pride v stik z očmi, jih ne drgnite in jih temeljito sperite s čisto vodo, na primer z vodo iz pipe.
- Če tega ne storite, lahko pride do poškodb oči.
Takoj se posvetujte z zdravnikom.



POZOR

- Če tekočina iz baterije izteče in pride v stik s kožo ali oblačili, jo sperite s čisto vodo, na primer z vodo iz pipe.
- Če tega ne storite, lahko pride do vnetja.

Pomembne informacije

- Napravo uporabljajte skupaj z zobno ščetko.
Z vodnim curkom je težko odstraniti zobni kamen ali zobne obloge, ki so pritrjene na površino zoba, zato je za čiščenje zob potrebna zobna ščetka. Priporočamo, da si po umivanju zob z vodnim curkom sperete notranjost ustne votline.
- Ko prvič začnete uporabljati ustni irigator, se lahko pojavi rahla krvavitev dlesni, čeprav so vaše dlesni zdrave.
To je zato, ker so vaše dlesni prvič stimulirane z ustnim irigatorjem. Po enem ali dveh tednih uporabe naj bi se krvavitev ustavila. Krvavitev, ki traja več kot dva tedna, lahko kaže na

nenormalno stanje vaših dlesni, kot je parodontalna bolezen. V tem primeru prenehajte uporabljati ustni irigator in se posvetujte s svojim zobozdravnikom.

- Kabel USB ima funkcijo zaščite pred pregrevanjem. Če je polnjenje nenormalno ali se vtič USB (tip C) segreje, odklopite napajanje, preverite vtičnico in iz nje odstranite morebitno vodo ali tujke.
- V posodo za vodo ne dajte soli, ustne vode ali drugih kemikalij. To lahko povzroči nepravilno delovanje.
- Glavne enote ne sušite s sušilnikom ali grelnikom z ventilatorjem. To lahko povzroči nepravilno delovanje ali deformacijo delov.
- Po uporabi napravo shranite v prostoru z nizko vlažnostjo. Če aparat pustite v kopalnici, lahko pride do okvare.
- Napravo pravilno napolnite v skladu s temi navodili za uporabo.
- Ta naprava vsebuje baterijo, ki jo lahko zamenjajo le usposobljene osebe. Za podrobnosti popravila se obrnite na pooblaščen servisni center.

Kako uporabljati

Za uporabo naprave si oglejte priročnik za hiter začetek uporabe.

Življenjska doba baterije

Približno 3 leta. Baterija je morda dosegla svojo življenjsko dobo, če se pogostost uporabe drastično zmanjša tudi po polnem polnjenju.

(Življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe ali shranjevanja.)

Odstranjevanje vgrajene akumulatorske baterije


Pred odstranitvijo naprave odstranite vgrajeno baterijo za ponovno polnjenje.

Baterijo je treba varno odstraniti.

Poskrbite, da bo baterija odstranjena na uradno določenem mestu, če je na voljo.

Ta številka se sme uporabljati samo pri odstranjevanju aparata in se ne sme uporabljati za njegovo popravilo. Če aparat razstavite sami, ne bo več vodotesen, kar lahko povzroči njegovo nepravilno delovanje.

- Odstranite napravo s kabla USB in napajalnika USB, pritisnite stikalo za vklop, da vklopite napajanje, in ga nato držite vklopljenega, dokler se baterija popolnoma ne izprazni.
- Odstranite spodnji pokrov.
- Izvedite korake od 1 do 6, da razstavite glavno enoto in z izvijačem odstranite baterijo.
- Izolirajte sponki $\oplus$ in $\ominus$ tako, da ju prelepitate s trakom. (Za preprečitev kratkega stika na priključkih).

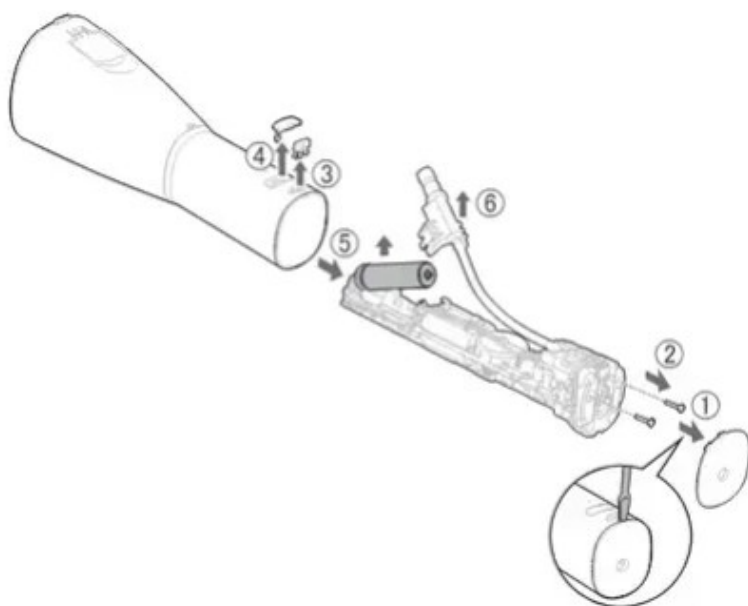

Za varstvo okolja in recikliranje materialov

Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo.

Poskrbite, da bo baterija odstranjena na uradno določenem mestu, če v vaši državi obstaja.

Specifikacije

Vir energije	Oglejte si tablico z imenom na izdelku (Samodejna pretvorba napetosti)
Čas polnjenja	Približno 1 ura
Čas delovanja	RAVEN 5: približno 10 minut* (*pri 20 °C, ko je popolnoma napolnjen)
Prostornina rezervoarja	Približno 200 ml (za približno 60 sekund delovanja, ko je stopnja vodnega tlaka nastavljena na 5)
Dimenzije	Glavna enota: 212 (V) x 68 (Š) x 81 (G) mm (brez šobe)
Masa	Glavna enota: Približno 275 g (vključno s šobo)
Akustični hrup v zraku	71 (dB (A) za 1 pW)

Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Če želite več informacij o energetske učinkovitosti izdelka, obiščite našo spletno stran

www.panasonic.com in v iskalno polje vnesite številko modela.

Pooblaščen zastopnik v EU:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonicov testni center

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemčija

Uvoznik: T. K:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagen Auer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija

Proizvajalec: Panasonic GmbH

Proizvajalec: Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japonska

Odstranjevanje stare opreme in baterij

Samo za Evropsko unijo in države s sistemi recikliranja.

Ti simboli na izdelkih, embalaži in/ali spremljajočih dokumentih pomenijo, da izrabljenih električnih in elektronskih izdelkov ter baterij ne smete mešati s splošnimi gospodinjskimi odpadki. Za ustrezno obdelavo, predelavo in recikliranje starih izdelkov in izrabljenih baterij jih odnesite na ustrezna zbirna mesta v skladu z nacionalno zakonodajo. S pravilnim odlaganjem boste pomagali prihraniti dragocene vire in preprečili morebitne negativne vplive na zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o zbiranju in recikliranju se obrnite na lokalne organe. Za nepravilno odstranjevanje teh odpadkov lahko v skladu z nacionalno zakonodajo veljajo kazni.

Opomba za simbol baterije (spodnji simbol)

Ta simbol se lahko uporablja v kombinaciji s kemičnim simbolom. V tem primeru je skladen z zahtevami, ki jih določa direktiva za zadevno kemikalijo. Navodila in odpravljanje težav najdete tukaj.

<https://instructions.panasonic.com/EW970WDJ861>

Korporacija Panasonic

<https://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2024

Natisnjeno na Kitajskem

EW9700DJ861503 S0224-0

Dokumenti / viri

[Priročniki+, Pravilnik o zasebnosti](#)

To spletno mesto je neodvisna publikacija, ki ni povezana z nobenim od lastnikov blagovnih znamk niti ga ti ne podpirajo. Besedna znamka "Bluetooth®" in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi "Wi-Fi®" so registrirane blagovne znamke v lasti združenja Wi-Fi Alliance. Uporaba teh znamk na tem spletnem mestu ne pomeni, da so z njimi povezane ali jih podpirajo.