



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Nyakmasszírozó készülék

Rend. sz.: 86 00 66

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban és az adattáblán az alábbi szimbólumok szerepelnek:



FIGYELMEZTETÉS Sérülési veszélyre vagy egészségkárosodásra figyelmeztető megjegyzések.



VIGYÁZAT Biztonsági figyelmeztetés a készülék/tartozékai lehetséges károsodására.



Megjegyzés Utalás fontos információkra.



A készülék kettős védőszigeteléssel van ellátva, tehát a II. védelmi osztálynak felel meg.



Csak zárt helyiségben szabad alkalmazni.

1. A megismeréshez

Ezzel az elektromos masszírozó készülékkel hatékonyan és idegen segítség nélkül jótékony masszírozóhatást érhet el. A masszírozás lazító és izgató hatású lehet, és szívesen alkalmazzák izommerevség, fájdalom és fáradtság kezelésére. A készülék erőteljes, intenzív masszírozásban részesíti a nyak és a váll tájékát.

A készülék csak saját célokra szolgál, nem való orvosi vagy iparszerű alkalmazásra.

2. Rendeltetészerű használat

Ez a készülék kizárólag az emberi test nyak- és válltájékának a masszírozására szolgál. Nem helyettesítheti a gyógyászati kezelést. Ne használja a masszírozókészüléket, ha az alábbi figyelmeztetések közül egy vagy több Önre is vonatkozik: Ha kétsége van a felől, hogy Önnek alkalmas-e a masszírozókészülék, konzultáljon orvosával.

Az egészségkárosodás elkerülésére a készülék használata nem ajánlott a következő esetekben:

- Ha beültetett elektromos készüléke van (pl. szívritmus-szabályzó).
- Fém implantátum megléte esetén.
- Ne használja gyerekeken és állatokon,
- a masszírozni kívánt testtájék kóros változása vagy sérülése esetén (pl. porckorongsér, nyílt seb),
- a fejen és kemény testrészekon (pl. csontokon és ízületeken),
- az arcon (szemen), a gégefőn vagy más különösen érzékeny testrészen,
- megdagadt, megégett, gyulladt vagy sérült bőr- és testrészen,
- tépett seb, hajszálér, visszér, szőrtüszőgyulladás, kuperózis, herpesz vagy más bőrbetegség esetén,
- terhesség idején,
- alvás közben,
- gyógyszer beszedése vagy alkohol fogyasztása után (korlátozott érzékelőképesség),
- gépkocsiban.

Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.

Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszernek használják a készüléket.

A masszírozókészülék használata előtt kérdezze meg orvosát, elsősorban

- ha súlyos betegségen szenved, vagy műtété volt a felsőtestén,
- trombózis esetén,
- cukorbetegség esetén,
- ha ismeretlen eredetű fájdalmai vannak.



A készüléket csak a jelen használati útmutatóban ismertetett célra szabad használni. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen vagy a gondatlan kezelésből származó hibáért.

3. Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ha az alábbi előírásokat figyelmen kívül hagyja, személyi sérülések és anyagi károk lehetnek a következményei. Őrizze meg a jelen használati útmutatót, és tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára is. Ha továbbadja ezt a készüléket, adja hozzá ezt a használati útmutatót is.



FIGYELEM!

Tartsa távol a gyerekektől a csomagolóanyagokat. Megfulladás veszélye áll fenn!

Áramütés veszélye!

FIGYELEM!

Mint minden elektromos készüléket, ezt a masszírozókészüléket is óvatosan és körültekintően használja, hogy elkerülje az áramütést.

A készüléket emiatt csak a

- a készüléken feltüntetett hálózati feszültségről használja,
- és akkor soha, ha a készüléknek vagy tartozékának látható hibája van,
- és zivatar közben sem.

Hiba vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a táphálózatról. A készüléket ne a hálózati kábelt vagy a készüléket fogva húzza ki a hálózati dugaszaljából. Ne tartsa vagy hordja a tápegységet a hálózati kábelénél fogva. Tartson kellő távolságot a kábelek és meleg felületek között. A kábeleket ne csípje be, ne törje meg és ne csavarja meg. Ne szúrjon be tűt vagy más hegyes tárgyat a kábelekbe.

Semmi esetre se kerüljön érintkezésbe a masszírozókészülék és a hálózati kábele vízzel, gőzzel vagy más folyadékkal. Ezért a készüléket csak száraz belső helyiségben használja (pl. fürdőkádban, szaunában ne).

Ne nyúljon az esetleg vízbe esett készülék után. Húzza ki azonnal a hálózati dugót.

Ne használja a készüléket, ha látható hibája van. Ne tegye ki a készüléket ütődéseknek, és ne ejtse le.

Javítás



FIGYELEM!

• Az elektromos készülékek javítását csak szakemberre bizza. A szakszerűtlen javításnak a következménye a felhasználó jelentős veszélyeztetése lehet. Forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy erre feljogosított kereskedőhöz, ha javításra van szükség.

- Ne nyissa ki a masszírozó készülék cipzárát. A cipzár csak gyártási okból került alkalmazásra.
- A vezeték sérülése esetén csak megbízott kereskedő segítségével szabad kicseréltetni azt.



Tűzveszély!

FIGYELEM!

A jelen használati útmutató rendeltetésellenes használata vagy figyelmen kívül hagyása esetén adott esetben tűzveszély jön létre.

Ne használja emiatt a nyakmasszírozó készüléket

- letakarva pl. takaróval, párnával stb.,
- benzin vagy más lobbánékony anyag közelében.



Bánásmód

FIGYELEM

Minden egyes használat után vagy tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózatról.

- Ne dugjon be tárgyakat a készülékbe. Vigyázzon arra, hogy a mozgó alkatrészek mindig szabadon mozoghassanak.
- Ne üljön, feküdjön vagy álljon rá teljes súlyával a készülék mozgó alkatrészeire, és ne állítson tárgyakat a készülékre.
- Ővja a készüléket a magas hőmérséklettől.


Eltávolítás

FIGYELEM

Tartsa be a helyi előírásokat a termék eltávolításakor. Az elhasználdott készüléket a 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment = elhasznált elektromos és elektronikus készülékek) EU irányelvnek megfelelően távolítsa el.

További kérdések esetén forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz.

4. Készülék-leírás

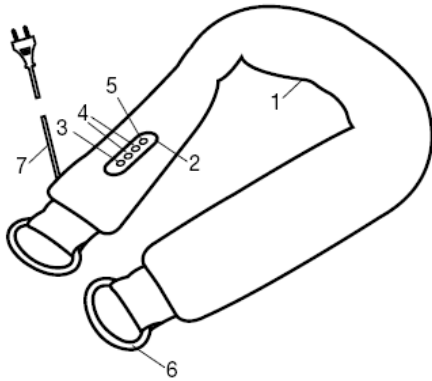

1. masszírozófejek (a készülék alsó része)
2. kezelőelem
- gomb jelző-LED-del3. ⏻
4. +/- gombok
5. üzemmódváltó gomb
6. tartófogantyúk
7. hálózati kábel

5. Használatba vétel

- Vegye le a csomagolást.
- Vizsgálja meg a készüléket és a kábelt, hogy nem sérült-e.
- A kábelt úgy fektesse le, hogy ne jelentsen botlásveszélyt.

6. Kezelés

A masszázst mindenkor kellemesnek és lazító hatásúnak kell éreznie. Kapcsolja be a masszírozó készüléket a gombbal.

⏻ A masszírozás a legalacsonyabb fokozaton kezdődik el. A +/- gombokkal lehet változtatni a masszírozás intenzitását. Szakítsa meg a masszírozást, vagy csökkentse le a – gombbal a masszírozás intenzitását, ha fájdalmasnak vagy kellemetlennek érzi.

A készülék különböző masszírozási programokat kínál, amelyek közül a Mode gombbal lehet választani.

A tartófogantyúk segítségével növelheti vagy csökkentheti a rászorítási nyomást, és igazíthatja a testéhez a készülék helyzetét. Nyomja meg ismét a gombot a készülék kikapcsolása céljából. ⏻

Megjegyzés

- A masszírozó készüléket legfeljebb 15 percig használja. Ennél hosszabb masszírozás esetén az izmok túlzott stimulálása miatt elemyedésük helyett elmerevedésük léphet fel.
- A masszírozó készülék rendelkezik túlmelegedés elleni védelemmel, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha túlmelegedne. Hagyja ebben az esetben 30 percig hűlni a készüléket, mielőtt újra használná.

7. Ápolás és tárolás

Tisztítás

FIGYELEM!

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Csak a megadott módon tisztítsa a készüléket. Semmi esetre se kerülhet folyadék a készülék belsejébe.
- A kisebb foltokat viszont egy nedves ruhával el lehet róla távolítani. Kizárólag csak a készülék felszínét tisztítsa.
- A készüléket csak akkor használja újból, ha teljesen megszáradt.

Tárolás

Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, ajánlatos az eredeti csomagolásában száraz helyiségben, rátett teher nélkül tárolni.