


Készülék-leírás

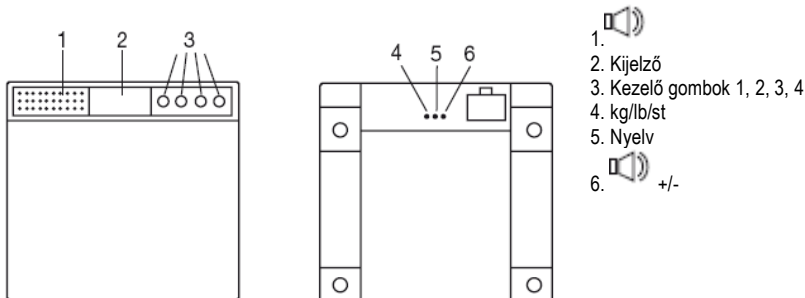

2. Fontos tudnivalók – őrizze meg a későbbiekre is!

Figyelem - az Ön biztonsága érdekében

- Figyelem, soha ne lépjen vizes lábbal a mérlegre, és ne lépjen rá, ha a mérleg nedves - csúszásveszély!
- Óvja a mérleget ütésektől, nedvességtől, portól, vegyszerektől, jelentős hőmérsékletingadozásoktól és hőforrások (fűtőtest, hőszugárzó) közelségétől.
- Javításokat csak a Beuer ügyfélszolgálat, vagy jogosultsággal rendelkező kereskedők végezhetnek. Reklamáció előtt mindig ellenőrizze az elemeket, és adott esetben cserélje ki őket.
- Minden mérleg megfelel az EU 2004/108 irányelveinek és a kiegészítő rendelkezéseinek. Amennyiben további kérdései merülnek fel a készülékeinkkel kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz, vagy az ügyfélszolgálatunkhoz.
- Tisztítás: a mérleg nemesacél felületét egy védőlakk borítja, mely távol tartja a szennyeződések, ujjlenyomatok (anti-finger-print). A mérleget nedves ruhával tisztíthatja, melyre szükség szerint kevés mosogatószer is tehető. A nemesacél felület tisztításához esetleg kevés ecettel benedvesített ruhát is használhat. Soha ne merítse vízbe a mérleget. Folyó víz alatt se tisztítsa.
- Tárolás: ne tegyen tárgyakat a mérlegre, ha nem használja.
- A készülék csak saját célokra szolgál, nem való orvosi, vagy iparszerű alkalmazásra.
- Eredeti állapotában a mérleg „kg”-ra van állítva. A mérleg hátoldalán található kapcsolóval átválthat „Pfund” (1 font = kb. 45 dkg.) és „Stones” (6,35 kg) mértékegységre is.
- Kérjük, hogy a készülék hulladékkezelésénél a következő EU irányelv szerint járjon el: 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). További kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékkezelésért felelős hivatalos szervekhez.

3. Beszéd funkció

A mérleg 5 nyelven beszél:

Német (DE), francia (FR), angol (GB), spanyol (ES), orosz (RUS). A gyári beállítás a német.

A nyelv megváltoztatásához kapcsolja be a mérleget a „Súlymérés” pontban leírtaknak megfelelően és várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a „0.0” felirat. Ekkor nyomja a középső „Language” gombot a mérleg hátoldalán addig, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik a kijelzőn.

Hangerőszabályozás:

A mérleg hátoldalán lévő gomb nyomogatásával állíthatja a hangerőt, vagy akár ki is kapcsolhatja a beszéd funkciót.

Figyelem: a beszéd kikapcsolása (nincs sípoló jelzés) azt jelenti, hogy a készülék nem ad ki beszédet vagy akusztikus jelet.

4. Használat

A mérleg emberek testsúlyának mérésére szolgál. A készülékkel maximum 150 kg-ig mérhet.

4.1 Üzembe helyezés

Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelénél található szigetelő csíkot (ha van ilyen), ill. távolítsa el az elem védőcsomagolását, majd helyezze be az elemeket ügyelve a helyes polarításra (plusz-mínusz). Amennyiben a mérleg nem működik, vegye ki és ismételten helyezze be az elemeket.

A mérleg jelzi, amennyiben az elemek cseréje szükségessé válik. Amennyiben az elemek töltöttségi szintje túl alacsony, a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, majd a mérleg automatikusan kikapcsol.



Kijelző	DE
Lo	Elemkimerülés

Ebben az esetben cserélje ki az elemeket (3 darab 1,5V mikroelem). Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket az erre a célra megjelölt gyűjtőkonténerekbe dobhatja, vagy leadhatja a veszélyes hulladék gyűjtő helyeken, vagy az elektromos szakszervezetekben. A jogszabály kötelezi Önt az elemek megfelelő kiselejtezésére.

Figyelem: A következő jelzések az elemek káros anyagait jelölik: Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.


Helyezze a mérleget egy egyenes szilárd padlóra; a szilárd padlóburkolat a helyes mérés alapfeltétele.

– Eredeti állapotában a mérleg „kg”-ra van állítva. A mérleg hátoldalán található egy gomb, mellyel angol nyelv választása esetén "Pfund" (1 font = kb. 45 dkg és „Stones" (6,35 kg) között válthat.


4.2 Súlymérés

Helyezze a mérleget egy egyenes szilárd (nem szőnyeg) padlóra; a szilárd padlóburkolat a helyes mérés alapfeltétele. Rövid, de határozott, hallható mozdulattal taposson a mérlegre, hogy a rázkódásérzékelő bekapcsoljon.


A mérleg öntesztje során a teljes kijelző megjelenik (1. ábra), végül megjelenik a „0.0” (2. ábra).

	Kijelző	
	8888	Sípolás


A mérleg készen áll a testsúly mérésére.

	Kijelző	
	0.0	A készülék üzembeszék

Most álljon rá a mérlegre. Mindkét lábára egyenlő testsúlyt helyezve álljon nyugodtan a mérlegen. A mérleg azonnal megkezdí a mérést. Röviddel ezután megjelenik a mérési eredmény (3. ábra) Ha lelép, a mérleg kb. 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Addig a mérési eredmény látható. Amennyiben a mérleg hibát észlel, a kijelzőn megjelenik a „----” jel, vagy az „Err” felirat (4+5 ábra).

	Kijelző	
	---- / Err	Hiba


Amennyiben nehezebb, mint 150 kg-os súllyal terheli meg a mérleget, a kijelzőn megjelenik az „OVER” felirat (6. ábra).

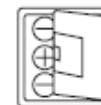

1




2

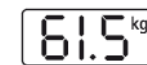

3




4

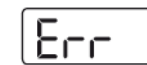

5



6

	Kijelző	
	0VEr	Túlerhelés

Ügyeljen arra, hogy mérés előtt először mindig kapcsolja be a mérleget és várja meg a kijelzőn a „0.0” (2. ábra) feliratot, mielőtt a mérlegre áll.


4.3 Mérés eredmény tárolással

A mérleg rendelkezik négy memória hellyel (1-4 gombok).

Kapcsolja be a mérleget a „4.2. Súlymérés” pontnak megfelelően és várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a „0.0” felirat (2. ábra).

Most nyomja meg a kívánt memória helyet (1, 2, 3, vagy 4).

Pl. ha megnyomja az 1. gombot, a kijelző bal felső sarkában megjelenik a „User 1” felirat.


	Kijelző	
	User 1	Memóriahely 1

Most a mérleg készen áll a súlymérésre, lásd 4.2. pont.


A mérési eredmény automatikusan a mindenkor memóriahelyen tárolódik. A mérleg adott esetben felülírja a korábbi mérési eredményt.

4.4 A tárolt adatok lekérdezése

Kikapcsolt állapotban nyomja meg a kívánt memóriahely gombot. Ekkor a mentett adat megjelenik a kijelzőn.

	Kijelző	
	User 1	Memóriahely 1
	62,4 kg	Memóriahely 62,4 kg

Röviddel ezután öntesztelésként megjelenik a teljes kijelző (1.ábra), majd pedig a „0.0” felirat.

	Kijelző	
	00	A készülék üzemkész

Most a mérleg készen áll a súlymérésre, lásd 4.2. pont.

Az új súlyadat automatikusan tárolódik a kiválasztott memóriahelyen.

Figyelem: egy másik memóriahely csak akkor választható ki, ha a kijelzőn a „0.0” felirat látható.