

MEDISANA®

HU 665 melegítő ágybetét



Cikkszám: 60217



Használati útmutató

Kérjük, gondosan olvassa el!

Az ágybetét és a kezelőelemek
MEDISANA³

melegítő ágybetét

működésjelző lámpa

kezelőegység tolékapcsolóval

csatlakozókábel






FONTOS TUDNIVALÓK FELTÉTLENÜL ŐRIZZE MEG!

Az ágybetét használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat, és őrizze meg a későbbiek számára. Ha az ágybetétet harmadik fél számára továbbadja, feltétlenül adja vele ezt a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

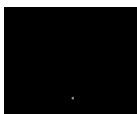

Ez a használati útmutató az ágybetéthez tartozik. Az üzembe helyezéshez és kezeléshez fontos tudnivalókat tartalmaz. Olvassa el végig a használati útmutatót. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vezethet, vagy károkat okozhat az ágybetétben.

FIGYELMEZTETÉS!

Ezeket a figyelmeztetéseket feltétlenül be kell tartani a felhasználó lehetséges sérüléseinek a megelőzése érdekében.



FIGYELEM

Ezeket a figyelmeztetéseket be kell tartani az ágybetét lehetséges sérülésének a megelőzése érdekében.



MEGJEGYZÉS

Ezek a megjegyzések hasznos kiegészítő információkat nyújtanak a használatba vételhez vagy a kezeléshez.



II. érintésvédelmi osztály

LOT

LOT-szám



Gyártó



Ne dugjon tűt a melegítő ágybetétbe!



Ne használja a melegítő ágybetétet összegöngyölítve vagy hajtogatva!



Nem alkalmas kisgyerekek számára (0-3 éves)!



Csak zárt térben használja a melegítő ágybetétet!



30°-os kímélő mosás!



Ne fehéritse!



A melegítő ágybetétet nem szabad szárítógépben szárítani!



A melegítő ágybetétet nem szabad vasalni!



Ne adja vegytisztításba!

- **Minden egyes használat előtt alaposan vizsgálja meg a melegítő ágybetétet, hogy nincsenek-e jelei az elhasználódásnak vagy sérülésnek.**
- Ne vegye használatba az ágybetétet, ha elhasználódás, sérülés vagy szakszerűtlen használat jeleit észleli rajta, a kapcsolóján vagy a hálózati kábelén, vagy nem működik.
- Az ágybetétet csak a hozzátartozó kapcsolóeszközzel (SS01) szabad használni.
- Mielőtt csatlakoztatná az ágybetétet, nézze meg, hogy ki van-e kapcsolva, és hogy a címkéjén feltüntetett feszültséggel megegyezik-e a helyi hálózat feszültsége.
- A melegítő ágybetétet nem szabad összehajtani, megtörni, az ágyba bevetni vagy a matrac köré tekerve használni.
- A melegítő ágybetétre rá van varrva négy gumiszalag. Ezekkel a szalagokkal ráfeszítheti a melegítő ágybetétet a matrac sarkaira. Figyeljen arra, hogy a melegítő ágybetét hosszanti- és keresztirányban is ráncatlanul ráfeszüljön a matracra, és a használat teljes idején ne képződjenek redők rajta. Lefekvéskor mindig ellenőrizze a helyes felfekvését.
- A kapcsoló és a vezetéke ne kerüljön az ágybetét alá, és semmilyen más módon ne legyen letakarva.
- Nyitható ágy esetében figyeljen arra, hogy a hálózati kábel és a melegítő ágybetét maga ne csípődjön be a zsanérokba, illetve az ágy állítása következtében ne tolódjon össze.
- Nem szabad biztosítótűt vagy más hegyes vagy éles tárgyat felrakni vagy beszúrni a melegítő ágybetétbe.
- Ne alkalmazza az ágybetétet gyerekek, fogyatékosok vagy alvó személyek, továbbá olyan hőérzékeny személyek számára, akik nem tudnak a túlmelegedés ellenében cselekedni.

- A 3 évnél fiatalabb gyerekek nem használhatják ezt az ágybetétet, mert nem tudnak a túlmelegedés ellen védekezni.
- Az ágybetétet 3 évesnél idősebb kisgyermek nem használhatja, kivéve, ha a kapcsolóegységet egy szülő vagy egy felügyelő előzetesen beállította, vagy ha a gyermeket kellően megtanították a kapcsolóegység biztonságos kezelésére.
- Ezt az eszközt 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és ismeretek hiányában élő személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy utasítást kaptak az ágybetét biztonságos használatára és megértik az ebből fakadó veszélyeket.
- Gyermekek az ágybetéttel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ne működtesse az ágybetétet felügyelet nélkül!
- Ha az ágybetétet magas hőmérsékletre állítva sokáig használja, égési sérüléseket szenvedhet.
- Ne nyúljon az esetleg vízbe esett ágybetét után. Húzza ki azonnal a hálózati dugót.
- Tartsa távol az ágybetétet forró felületektől.
- Ne vigye, húzza vagy forgassa a melegítő ágybetétet a hálózati kábelénél fogva, és ne szorítsa be a kábelt.
- Ne használja nedvesen a melegítő ágybetétet, és csak száraz környezetben használja (pl. a fürdőszobában ne.)
- Ne tegye ki a kapcsolót és vezetékét semmiféle nedvességnek.
- Hiba esetén ne javítsa saját maga az ágybetétet. Bízza a javítást egy megbízott szakkereskedőre, vagy egy megfelelő szakképzettségű személyre.
- Ha megsérül a hálózati kábel, a veszélyeztetettség elkerülésére kizárólag csak a **MEDISANA** által meghatalmazott szakkereskedő, vagy egy megfelelő szakképzettségű személy cserélheti ki.

- Hagyja előzőleg teljesen lehűlni a melegítő ágybetétet, mielőtt eltenné. Ne hajtogassa szorosan össze.
- Ha hosszabb ideig nem használja az ágybetétet, tárolja az alábbi módon:
 - Rakja el az ágybetétet az eredeti csomagolásában egy biztonságos, tiszta, hűvös és száraz helyre.
 - Gondosan hajtogassa össze a hálózati kábelt úgy, hogy ne törjön meg.
 - Tárolás közben ne rakjon nehéz tárgyakat a tetejére.
- Ha bármilyen egészségügyi problémája van, az ágybetét használata előtt beszéljen kezelőorvosával.
- Ha hosszú ideig fájdalmat érez az izmaiban vagy az ízületeiben, tájékoztassa erről orvosát. A hosszan tartó fájdalom súlyosabb betegség tünete is lehet.
- Ha az ágybetét használatát kellemetlennek vagy fájdalmasnak érzi, azonnal hagyja abba.
- Ez az ágybetét csak házi használatra való, ezért nem szabad orvosi célokra, kórházakban alkalmazni.

Köszönjük bizalmát, és szívből gratulálunk Önnek.

A **HU 665** melegítő ágybetéttel a **MEDISANA** minőségi termékét vásárolta meg.

Ahhoz, hogy a MEDISANA melegítő ágybetéttel a kívánt eredményt érje el, és hosszú ideig elégedett legyen vele, ajánljuk, hogy a használatlaltal és ápolással kapcsolatos tudnivalókat gondosan olvassa el.

2.1 A szállítás tartalma és a csomagolás

Először is ellenőrizze, hogy az ágybetét teljes-e, és nincs-e sérülése. Kétes esetben ne helyezze üzembe az ágybetétet, hanem forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizhez.

A szállítás tartalma:

- 1 db **MEDISANA HU 665** melegítő ágybetét és SS01 kapcsolóegység
- 1 db használati útmutató

A csomagolás újra használható vagy visszavezethető a nyersanyag-körforgásba. A csomagolóanyagot a vonatkozó szabályok szerint távolítsa el. Ha kicsomagoláskor szállítási hibát vesz észre, azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

FIGYELMEZTETÉS!

Vigyázzon arra, hogy a csomagolófóliák ne jussanak a gyerekek kezébe. Fennáll a fulladás veszélye!



2.2 Alkalmazás

A **MEDISANA HU 665** melegítő ágybetéttel szolidan felmelegítheti és fellazíthatja teljes testét. Alkalmazása serkenti a vérkeringést az elmerevedett izomcsoportokban, és ellazít egy megfeszített nap után. A melegítő ágybetét kellemesen átmelegíti az ágyat, úgyhogy Ön fellazulva hamar elalszik.

Terítse ki a melegítő ágybetétet a matracra. A melegítő ágybetéten négy gumiszalag van.

Ezekkel a szalagokkal feszítse rá a melegítő ágybetétet a matrac sarkaira. Figyeljen arra, hogy a melegítő ágybetét hosszanti- és keresztirányban is ráncatlanul ráfeszüljön a matracra, és a használat teljes idején ne képződjenek redők rajta. Terítsen rá egy lepedőt. Így adja le legjobban az ágybetétet a meleg. Lefekvéskor mindig ellenőrizze a helyes felfekvését.

Az ágybetétet csak simán kiterített állapotban szabad használni. A melegítő ágybetét elektromos hőmérséklet-szabályzással van ellátva, amely a kiválasztott kapcsolóállásnak megfelelően szabályozza a beállított hőmérsékletet.

2.3 Használat

Ajánlatos lefekvés előtt 30 perccel bekapcsolni a melegítő ágybetétet.

Dugja be a hálózati dugót egy dugaszaljba, és tolja a tolókapcsolót a **0** állásból az **1** állásba. Kigyullad a működésjelző lámpa. Érezheti az ágybetét fokozatos felmelegedését, amit jobban érez, ha betakarózik. Ha magasabb hőmérsékletet kíván, tolja a kapcsolót tovább a **2** állásba vagy a **3** állásba. Ha a melegítő ágybetétet túl melegnek érzi, tolja vissza a kapcsolót a **2** vagy az **1** állásba.

Az ágybetét úgy van megtervezve, hogy a **2** és a **3** állás felmelegítésre szolgál, és csak az **1** állás való hőmérséklet tartására. Tolja a kapcsolót az **1** állásba elalvás előtt.

Kb. 180 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsolódik az ágybetét.

Az ágybetét kikapcsolásához tolja vissza a kapcsolót a **0** állásba.

A működésjelző lámpa kialvása azt jelzi, hogy az ágybetét ki van kapcsolva.

Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból.

3.1 Tisztítás és ápolás

- Az ágybetét tisztítása előtt húzza ki a hálózati dugót, és hagyja legalább tíz percig hűlni az ágybetétet.
- A melegítő ágybetét levehető kábellel van ellátva. Bontsa meg a csatlakozást, és vegye le a kábelt az ágybetétről.
- A melegítő ágybetétet mosógépben 30°-os kímélő mosás programmal moshatja ki, vagy kézzel langyos vízben. A legjobb módszer az, hogy a melegítő ágybetétet kádba, enyhe mosószeres langyos vízbe áztatja, majd kézzel kinyomkodja.
- Majd többször öblítse ki, hogy a mosószer minden maradékát eltávolítsa belőle.
- Szárításhoz terítse ki a melegítő ágybetétet száraz alátételre.
- Az ágybetétet csak akkor használja újból, ha teljesen száraz.
- Tárolja a melegítő ágybetétet kitérítve egy tiszta, száraz helyen úgy, hogy ne tegyen semmit a tetejére.

3.2 Tudnivalók a hulladékkezelésről



Ezt az ágybetétet nem szabad a háztartási hulladék közé tenni. Minden fogyasztó kötelezett az összes elektromos és elektronikus készüléket attól függetlenül, hogy tartalmazznak-e vagy sem károsanyagokat, a helyi kommunális gyűjtőhelyen vagy a kereskedelemben leadni a környezetkímélő eltávolítás érdekében. Az eltávolítással kapcsolatban forduljon a hulladékkezelési hatósághoz vagy a kereskedőhöz.

3.3 Műszaki adatok

MEDISANA melegítő	
Név	: ágybetét
Típus	: HU 665
Tápáramellátás	: 230 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Fűtőteljesítmény	: kb. 60 W
Kapcsolóállások	: 0-1-2-3
Automatikus kikapcsolás	: kb. 3 óra elteltével
Méretek	: kb. 150 x 80 cm
Súly	: kb. 1300 gramm
A hálózati kábel hossza	: kb. 2,10 m
Üzemi feltételek	: csak szárazon használható
Tárolási feltételek	: tisztán és szárazon
Cikkszám	: 60217
EAN-sz.	: 40 15588 60217 7



A folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk a jogot a műszaki és kiviteli változtatásokra.

A jelen útmutató éppen aktuális kiadását a következő web-oldalon találja meg: www.medisana.com

Garanciális igényével forduljon a szaküzlethez vagy közvetlenül a szervizhez.

**Javító-
körülményeit,**

szervizállomás. Ha az ágybetétet javításra kellene beküldenie, adja meg a hiba és mellékeljen egy számlamásolatot.

A következő garanciális feltételek vannak érvényben:

1. **AMEDISANA** termékekre az eladás dátumától számított három évre vállalunk garanciát. A vásárlás dátumát garanciális problémák esetén a számlával kell igazolni.
2. Az anyag- vagy gyártási hibákból adódó problémákat a garanciális időn belül ingyenesen megoldjuk.
3. A garanciális teljesítés által nem hosszabbodik meg a garanciális idő sem az ágybetétre, sem a kicserélt alkatrészekre vonatkozóan.
4. A garanciából ki van zárva:
 - a. A szakszerűtlen kezelésből, pl. a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő mindennemű kár.
 - b. A vevő vagy illetéktelen harmadik személy beavatkozására visszavezethető károk.
 - c. A gyártótól a fogyasztóig, vagy a vevőszolgálathoz történő küldéskor keletkező szállítási károk.
 - d. A normális kopásnak kitett alkatrészek.
5. A felelősség az eszköz által okozott közvetett vagy közvetlen következményes károkért akkor is kizárható, ha az eszköz kárát garanciális esetként ismerik el.



MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

NÉMETORSZÁG

E-Mail: info@medisana.de

internet: www.medisana.de

A szerviz címét külön lapon találja.