

scala®

Elektromos tetűfésű SC 04



ⓓ Használati útmutató

RENDELTETÉS

- Az elektromos SC 04 tetűfésű nem gyógyászati készülék.
- Az elektromos tetűfésű **csak** a fejen lévő természetes hajban található tetvek ellen alkalmazható. A testszőrzetben vagy nemi szervek területén előforduló tetűk nem érhetők el ezzel a készülékkel.
- A készülék csak a felnőtt tetűket öli meg. A tojások vagy a lárvá stádiumban lévő tetűk nem pusztulnak el.
- Ne használja a készüléket háziállatokon. Ők nem hordoznak olyan fejtetűt, ami az emberekre jellemző.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Olvassa el alaposan a használati útmutatót az első alkalmazás előtt, és őrizze azt meg a későbbi betekintés céljára.
- Ne érintse meg a fém fésűt, ha a készülék működésben van.
- A készüléket csak a fejen lévő, száraz hajon használja.

- Soha ne használja a készüléket szájon, orron, szemöldökön, csupasz bőrön, vagy más érzékeny testrészekben.
- A készülék nem alkalmas olyan személyek számára, akik epilepsiában, szívbajban vagy hajhullásban szenvednek.
- Ha gyereknél fordul elő hajtetű, a megszüntetését célzó tevékenységet csak felnőtt személy végezheti.
- Az elektromos tetűfésű azon elektronikus készülékeket, amelyeket a használó a testén visel, befolyásolhatja.
- Ne használja a készüléket nagyon zsíros hajon.
- Kerülje a készülék leejtését vagy erős lökéseket.
- A készülék ne érintkezzen folyadékokkal. Nem vízálló

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak olyan elemeket használjon, amelyek a jelen használati útmutató "Műszaki adatok" fejezetében szerepelnek.
- Vegye ki az elemet a készülékből, amennyiben azt hosszabb ideig nem használja.

A TETŰFÉSŰ MŰKÖDÉSÉRŐL

A készülék elektronikája olyan feszültséget kelt a fémből készült fésűben, amely az emberek számára nem veszélyes. Ha ezzel a fém fésűvel a fejen lévő száraz haját végig fésűli, és egy felnőtt fejtetűt megérint, akkor a készülékben lévő feszültség elegendő a kártevő kiirtásához.

A jelző LED kijelzi, hogy egy tetűt a készülék felismert és megölt.

. Kapcsolja ekkor ki a készüléket, és távolítsa el


a megölt tetűt a fém fésűből (lásd a 4. oldalt). Azt

javasoljuk, hogy 2 naponként kezelje a haját ezzel a tetűfésűvel. Így biztosra vehető, hogy 3 - 4

hét alatt minden tetű, amely a kezelés elején még

tojás- vagy lárvá állapotban volt, ezzel a módszerrel elpusztul.

A KÉSZÜLÉK

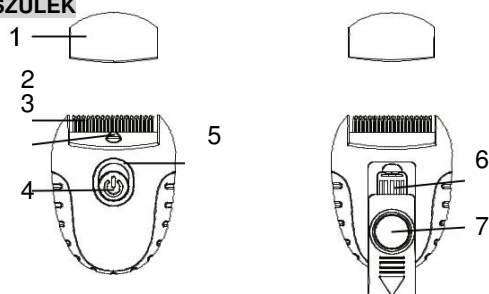

1 Védőkupak, 2 Fém fésű, 3 LED spottlámpa,

4 Funkciógomb, 5 Jelző LED, 6 Kefe, 7 Nagyító

A FUNKCIÓGOMB


A funkciógombbal (4) három helyzetbe lehet kapcsolni:

1. Elemfeszültség ellenőrzés: Tolja a funkciógombot kissé előre (a középső helyzetbe) A jelző LED-nek zölden kell világítani. Ha az elemfeszültség a készülék működéséhez már nem elegendő, a jelző LED pirosan világít.

2. Üzemállapot / LED spottfény Tolja a funkciógombot egészen előre. A készülék most üzemkész, és a fém fésű világítást kap.

3. Kikapcsolt állapot:

A funkciógomb a kiinduló helyzetben van. A jelző LED, mely az üzemkésziséget mutatja, - kialszik.

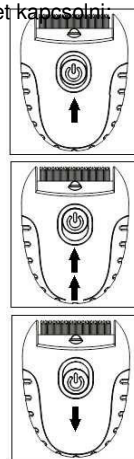

A TETŰFÉSŰ HASZNÁLATA:

Előfeltételek a hatékony alkalmazáshoz:

- A hajnak száraznak kell lennie.
- A hajban ne legyen a hajformázáshoz szükséges anyag és eszköz.
- A fém fésű fogainak nem szabad elgörbülni, és nem érintkezhetnek egymással.


1. Húzza le az átlátszó védőkupakot a készülékről.



2. Tolja a funkciógombot az "Üzemállapot/LED fény" helyzetbe. A zöld LED-nek világítania kell. Egyébként elemcserére (ld. 5. oldal) van szükség.

Tartsa a fém fésűt 45°-os szögben (a funkciógomb a hajtól elforduló oldalon van - lásd a képeket) és kezdje el a fésülést. A fém fésű fogainak hegye a hajszálok gyökerénél legyen. A LED spotfény különösen sötét hajnál segít a tetűk felismerésében.

Amennyiben egy tetű elpusztult, a jelző LED pirosan világít. A készüléket ezek után ki kell kapcsolni, és a tetűt a fém fésűből a kefével el kell távolítani.

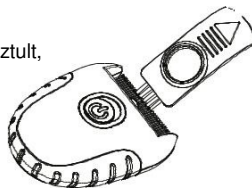

Az alkalmazás ezután tovább folytatható.

Az SC 04 elektromos tetűfésű használatának bemutatását az interneten is megtalálja az alábbi helyen: <https://youtu.be/cYS9FPxhIC8>.

ELEMCSERE

A készülék kifogástalan működéséhez egy a kereskedelemben kapható AAA alkáli mikroelem (LR03) szükséges. Kérjük, ne használjon cink-szén (R03) elemet vagy egy hasonló kivételű akkut. Az elemcserénél vegye figyelembe a helyes polaritást!




Az elemcseréhez távolítsa el a kefét és a nagyítót. Az elemtartó fedeléhez ekkor lehet hozzáférni. Cserélje le az elhasznált elemet.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tisztítás:

- A fém fésűt a kefével lehet tisztítani. A tisztításhoz az SC 04 tetűfésűnek kikapcsolt állapotban kell lennie.

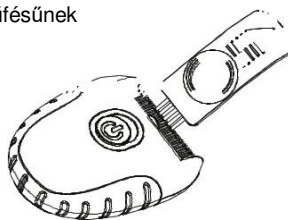

- Ne használjon folyadékokat a készülék tisztításához. Azt ajánljuk, hogy a készüléket egy a gyógyszerárban beszerzett alkoholba mártott vattapálcikával törölje le időnként.

Tárolás:

- A készüléket tárolja alapvetően mindig feltett védőkupakkal.
- Ne tárolja a készüléket szennyes, nedves és magas hőmérsékletű környezetben.

TUDNIVALÓK AZ ELTÁVOLÍTÁSRÓL









Hibás, vagy élettartamuk miatt már nem üzemképes készülékek tartalmazhatnak olyan maradványokat, amelyek a környezet számára

kockázatot jelentenek. Az elhasználdott készüléket távolítsa el az elektromos készülékek számára kialakított közületi gyűjtőhelyre való leadással.

Az elemeket/akkukat szakszerűen kell eltávolítani. Az elemek/akkuk forgalmazásával foglalkozó kereskedésekben, valamint kommunális gyűjtőhelyeken megfelelő tartályok állnak rendelkezésre az elhasznált elemek/akkuk begyűjtéséhez.

JELMAGYARÁZAT

	Gyártó
	EU szabvány konform
	Eltávolítási tudnivalók
	Használati útmutató utalás
	Gyártás (hónap/év)
	Óvja a nedvességtől

GARANCIA

A törvényes előírások érvényesek. Garantáljuk a készülék kifogástalan állapotát. A garancia idején belül ingyenesen kijavítjuk és megszüntetjük az összes anyag- vagy gyártási hibát. Ha a garantált minőség ellenére hiányosságok mutatkoznak, kérjük küldje el a terméket vevőszolgálatunkhoz. Kérjük, mellékelje a vételt igazoló nyugtát és a hiba rövid leírását.

A garancia nem vonatkozik olyan károkra, amelyek szakszerűtlen kezelésre és szennyeződésre vezethetők vissza.

Műszaki adatok:

Üzemi feltételek:	10°C - 40°C
	25%-80% rel. légnedvesség
Méret:	90 x 60 x 27 mm
Súly:	42 g (elem nélkül)
Tápellátás	1 db alkáli mikroelem (LR03)

K-jump Health Co. Ltd.
Szám 56, Wu Kung 5th
Rd.
New Taipei City 24890
Tajvan

Forgalmazás / Vevőszolgálat

SCALA Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95
14532 Stahnsdorf
Németország.

Rev. 10/05/2016/D