

TERMOMETR MEDISANA FTC PL


Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi!

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i gratulujemy zakupu!

Nabyliście Państwo produkt wysokiej jakości firmy MEDISANA.

Aby osiągać żądane efekty i długo cieszyć się termometrem FTC MEDISANA, zalecamy dokładne przeczytanie znajdujących się w instrukcji wskazówek, dotyczących użytkowania i pielęgnacji.

Firma MEDISANAAG

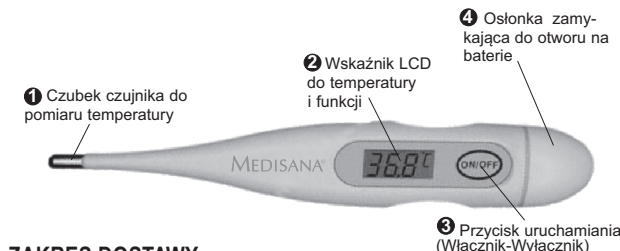

ZAKRES DOSTAWY

Proszę najpierw sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne.

W zakres dostawy wchodzi:

- Termometr MEDISANA FTC
- Bateria typu AG3 lub LR41 (wbudowana)
- Etui do przechowywania
- Instrukcja obsługi

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Termometr posiada małe części, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Proszę nie zostawiać dzieci z termometrem bez opieki.
2. Proszę stosować termometr wyłącznie do pomiaru temperatury ciała.
3. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
4. W przypadku wystąpienia usterek, proszę nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Proszę dalej nie używać urządzenia, lecz skontaktować się ze sprzedawcą. Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez serwis firmy MEDISANA.
5. Zwracać uwagę na opisane warunki pracy i przechowywania, aby termometr MEDISANA FTC jak najdłużej funkcjonował bez zarzutu.

CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM MEDISANA FTC

Co to jest gorączka?

Normalna temperatura ludzkiego ciała wynosi od 36 °C do 37,5 °C. Wahania są jednak zupełnie normalne – w zależności od pory dnia, stanu zdrowia, np. podczas miesiączek u kobiet. Gdy jednak temperatura ciała podnosi się do ponad 38 °C, mówimy o gorączce. Gdy temperatura wzrośnie powyżej 39 °C i utrzymuje się przez 1-2 dni, konieczne skontaktować się z lekarzem.

Pomiar temperatury - szybko i bezbłędnie!

Choroba, przy której występuje gorączka, często związana jest ze zmęczeniem, łamaniem w kościach, dreszczami i marznąciem. Przebieg choroby daje się najlepiej kontrolować poprzez mierzenie temperatury 2-3 razy dziennie w odstępach od 4 do 6 godzin. Pomiar powinno się przeprowadzać zawsze w tym samym miejscu ciała i mniej więcej o tej samej porze, aby wyniki były porównywalne.

Za pomocą termometru MEDISANA FTC można mierzyć aktualną temperaturę szczególnie łatwo i szybko. Częste błędy, takie jak np. zbyt krótki czas pomiaru, można prawie całkowicie wykluczyć.

Pomiaru temperatury można dokonywać w następujących miejscach:

- a) pod językiem (oralnie)
- b) pod pachą (pachowo)
- c) w odbytnicy (odbytniczo)

URUCHAMIANIE

Wymowianie / wkładanie baterii

Termometr MEDISANA FTC gotowy jest bezpośrednio do pracy, ponieważ jedna bateria jest w nim zamontowana fabrycznie. Gdyby jednak po pewnym okresie użytkowania z prawej strony na display pojawił się symbol "bateria" oznacza to konieczność wymiany baterii. W tym celu zdjęć osłonkę zamykającą otwór na baterie 4 i szufladkę na baterie wysunąć na ok. 18 mm z termometru. Wyjąć baterię na pomoc małego wkrętaka i zastąpić ją nową baterią tego samego typu. Proszę zwrócić uwagę na właściwą biegunowość baterii (oznaczenie bieguna "+" jest widoczne). Starannie zamknąć wnękę baterii za pomocą zaślepek.

ZASTOSOWANIE

Pomiar

Włączyć urządzenie naciskając na przycisk uruchamiania 3. Wszystkie symbole pojawiają się na ok. 2 sek. na display i rozlega się krótki sygnał dźwiękowy. Ostatnia zmierzona wartość zostanie wyświetlona przez chwilę (w prawym rogu wyświetlacza pojawi się dodatkowo małe "M").

Gdy temperatura wynosi mniej niż 32 °C, na wskaźniku LCD 2 zobaczą Państwo "Lo" i świecący pulsująco symbol "°C". Oznacza to, że termometr MEDISANA FTC gotowy jest do pomiaru.

Proszę wprowadzić czubek czujnika 1 doustnie, pachowo lub odbytniczo. Termometr rozpoczyna automatyczny pomiar. Podczas pomiaru pokazywana jest na bieżąco aktualna temperatura. Gdy pomiar zostanie zakończony, rozlegnie się 10 sygnałów dźwiękowych, a zmierzona temperatura zostanie wyświetlona na wyświetlaczu. Gdy termometr wykryje temperaturę > 37,7 °C, rozlega się alarm temperatury w postaci 10 potrójnych sygnałów dźwiękowych.

8 minut po pomiarze termometr wyłącza się automatycznie. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy po pomiarze dezaktywować termometr naciskając przycisk uruchamiania 3.

Pomiary w różnych częściach ciała

Termometr MEDISANA FTC nadaje się do doustnego (w ustach), pachowego (pod pachą) lub odbytniczego (w odbytnicy) pomiaru temperatury. Termometr jest całkowicie wodoodporny. Po upływie ok. 1 minuty rozlegnie się 10 krótkich sygnałów dźwiękowych i wynik pomiaru zostanie wyświetlony na wyświetlaczu. Można wówczas wyjąć termometr. Aby wykonać dokładny i bezpieczny pomiar, podczas pozycjonowania termometru przestrzegać następujących zasad:

POMIAR DOUSTNY:

Włożyć termometr czubkiem czujnika 1 pod język i zamknąć usta. Podczas pomiaru oddychać przez nos, aby zapobiec sfałszowaniu wartości pomiaru.

POMIAR ODBYTNICZY:

Pomiar rektalny jest dla wielu pacjentów nieprzyjemny, dostarcza jednak dokładnych wyników. Wprowadzić czubek czujnika 1 ostrożnie na ok. 3,5 cm do odbytu.

POMIAR PACHOWY:

Przed pomiarem umyć pachę. Włożyć termometr czubkiem czujnika 1 we wgłębienie pod pachą. Opuścić ramię i podczas pomiaru lekko przycisnąć do ciała.

FUNKCJA PAMIĘCI

Termometr MEDISANA FTC posiada funkcję pamięci, za pomocą której można odczytać ostatnio mierzoną temperaturę. Włączyć urządzenie naciskając na przycisk uruchamiania 3. Wszystkie symbole pojawiają się na ok. 2 sek. na display i rozlega się krótki sygnał dźwiękowy. Ostatnia zmierzona wartość zostanie wyświetlona przez chwilę (w prawym rogu wyświetlacza pojawi się dodatkowo małe "M").

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Termometr MEDISANA FTC jest wodoodporny i można go dzięki temu łatwo czyścić i dezynfekować. Przed i po każdym pomiarze oczyścić termometr ściereczką umoczoną w łagodnym roztworze alkoholowym. Włożenie termometru do odpowiedniego roztworu dezynfekującego jest również możliwe. Autoryzowany sprzedawca doradzi Państwu, jakie produkty czyszczące najlepiej się do tego nadają, oraz w jaki sposób je stosować.

DANE TECHNICZNE

Nazwa i model:	Termometr FTC
Zakres pomiaru:	32,0 °C do 42,0 °C
Skalowanie:	0,1 °C
Dokładność pomiaru:	±0,1 °C (odchylenie od faktycznej temperatury ciała w zakresie pomiarowym od 35,5 °C do 42 °C) bez ekstrapolacji
Żywotność:	ok. 2500 pomiarów
Warunki pracy:	10 °C do 40 °C
Warunki przechowywania:	-10 °C do +60 °C
Wymiary:	10 mm (wysokość), 128 mm (długość), 19 mm (szerokość)
Ciężar:	9,8 g
Baterie:	1 mikrobateryja 1,5 V (typ AG3 lub LR41)
Nr artykułu:	77030
Kod EAN:	40 15588 77030 2

CE 0297

Urządzenie odpowiada klasie ochronnej B

Przeczytaj instrukcję obsługi

LOT Numer LOT

Wytwórca

Data produkcji

Oznaczenie CE odnosi się do dyrektywy 93/42/EWG. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi normami europejskimi: EN 12470-3 (Termometry medyczne), EN 980 (Symbole), EN 60601-1 (bezpieczeństwo elektryczne urządzeń medycznych).

Kompatybilność elektromagnetyczna:

Urządzenie spełnia wymogi normy EN 60601-1-2 dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Szczegółowe informacje dotyczące tych danych pomiarowych można uzyskać w firmie MEDISANA.

W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wyglądu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Urządzenie to nie może być utylizowane razem z odpadami gospodarczymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, obojętnie, czy zawierają one substancje szkodliwe, czy też nie, do odpowiedniego punktu zbiorczego w swoim mieście lub w placówkach handlowych, aby mogły one być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia wyjmij baterie. Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadów gospodarczych, lecz do odpadów specjalnych, lub oddaj do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placówce handlowej. W razie zapytań w sprawie utylizacji należy zwrócić się do władz komunalnych lub do sprzedawcy.

GWARANCJA

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy zwrócić się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane, trzeba podać rodzaj usterki i dołączyć kopię dowodu kupna. Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:

1. Na produkty firmy MEDISANA udzielana jest trzyletnia gwarancja licząc od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być udokumentowana paragonem lub rachunkiem.
2. Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane są bezpłatnie w ramach gwarancji.
3. Poprzez wykonanie usługi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydłuża się ani dla urządzenia, ani dla wymienionych podzespołów.
4. Gwarancji nie podlegają:
 - a. wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
 - b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie.
 - c. Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
 - d. Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu (bateria itd.).
5. Odpowiedzialność za poś rednie i bezpoś rednie uszkodzenia, spowodowane przez urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.

MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, NIEMCY
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

W sprawach serwisowych oraz w przypadku zamawiania osprzętu i części zamiennych prosimy zwrócić się do:

Medisana Medical sp. z o.o.

Lipowa 35
05520 Konstancin - Jeziorna (PL)

Tel. +48 22 717 53 73

Fax: +48 22 757 69 91

eMail: medisana@medisana-medical.pl

Internet: www.hornmedical.com.pl