



Dávkovač liekov – Pillbox Weinberger Objednávacie číslo: 860049

Dávkovač liekov „Nikdy nezabúda“ s nastavením piatich alarmov

Gratulujeme Vám, že ste si kúpili tento kvalitný výrobok. Aby ste čo najlepšie využili všetky jeho funkcie, pozorne si pred jeho použitím prečítajte tento návod na použitie. Prospekt si odložte na bezpečné miesto, aby ste v prípade potreby mohli do neho nahliadnuť.

Funkcie:

Dávkovač na lieky vám pomôže organizovať svoj denný režim užívania liekov a pripomenie vám čas, kedy máte zobrať ďalšiu tabletku.

Ďalšie funkcie dávkovača na lieky:

- Integrovaný časovač Quartz s veľkým displejom (výška znaku 13 mm)
- Nastavenie až 5 alarmov denne. Po naprogramovaní sa výstražné znamenie zopakuje každý deň.
- Alarm môže byť zvukový, vibračný a zvukový alebo iba vibračný.
- Vďaka modrému osvetleniu sa s dávkovačom dá manipulovať aj potme.
- Dávkovač liekov má monitor srdcového tepu.

Upozornenia /Účel použitia

- Dávkovač na lieky obsahuje súčiastky (batérie a pod.), ktoré by mohli malé deti prehltnúť. Odložte ho preto mimo ich dosahu. V prípade, že dieťa predsa len nejakú súčiastku prehltnie, okamžite zavolajte lekára.
- Nevystavujte dávkovač na priame slnečné svetlo, nenechávajte ho v priestoroch, kde je vyššia teplota ako 50 °V a chráňte ho pred vodou.
- Dbajte na to, aby dávkovač na lieky nepadol na zem a otvorte ho iba pri výmene batérií alebo pri resetovaní.
- Používajte prístroj iba na dávkovanie liekov. Používanie na iné účely výrobca zakazuje.



Likvidácia

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Likvidujte ich v zmysle platných predpisov. Vybité batérie bezplatne odoberajú všetci predajcovia batérií a miestne zberné strediská.
- Ak sa dávkovač na lieky nedá viac používať, nelikvidujte ho v domácom odpade. Odneste ho do zberného strediska, kde ho náležite zlikvidujú.

Dávkovač na lieky

Text pri obrázku:

Time setting ring – Kotúč na nastavenie času

Alarm settings – Nastavenie alarmu

Alarm type selector – Volič typu alarmu

Light button – Tlačidlo pre osvetlenie


Time button – Časové tlačidlo

Heart rate monitor button – Tlačidlo pre monitor srdcového tepu

Alarm type display – Zobrazenie typu alarmu

Heart rate monitor sensor – Senzor monitoru srdcového tepu

Button for alarm settings – Tlačidlo pre nastavenie alarmu

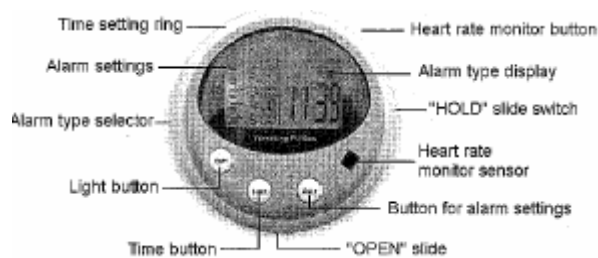

Vloženie a výmena batérií

Dávkovač na lieky zásobujú energiou dve batérie.


Lítiová batéria CR 2025 zásobuje energiou časovač a monitor srdcového tepu, batéria veľkosti AAA (LR03, R03) je potrebná na funkcie alarmu (zvukový, vibračný alebo zvukový a vibračný) a na osvetlenie displeja.

Batéria CR 2025 je vložená v prístroji. Pred použitím dávkovača na lieky musíte do neho vložiť len batériu AAA (dbajte na správnu polaritu).




Pri výmene batérie alebo vkladaní batérie AAA otvorte dávkovač potlačením posuvného spínača „OPEN ►“ na bočnej strane dávkovača v smere šípky. Posunutím sa uvoľní uzáver medzi vrchnou a spodnou časťou dávkovača a môžete ich od seba oddeliť. Vo vrchnej polovici dávkovača nájdete priehradku na batérie. Pri jej vkladaní dodržte správnu polaritu. Ak displej stmavne, vymeňte batériu (CR 2025), ak osvetlenie stráca jas, prípadne alarm nie je dosť hlasný, vymeňte batériu (LR03, R03).


Text pri obrázku:

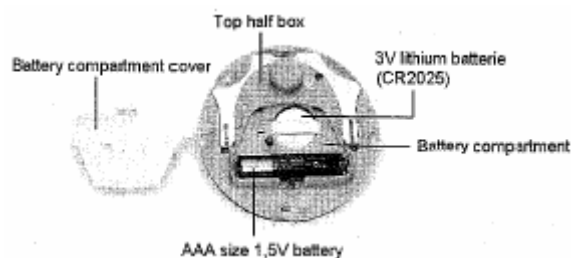Battery compartment cover – uzáver na priehradke na batérie
AAA size 1,5V batéria – batéria AAA 1,5V
3V lithium batterie (CR2025) – lítiová batéria (CR2025) 3V
Battery compartment – priehradka na batérie








Nastavenie času


1. Posuňte posuvný spínač „HOLD“ na bočnej strane dávkovača do polohy. 
2. Tlačte asi 3 sekundy tlačidlo „T-SET“ pod displejom LC. Na displeji sa objaví znak  a zablikajú hodiny.
3. Otáčaním kotúča (prstenca) pre nastavenie času nastavte hodiny.
4. Opäť stlačte tlačidlo „T-SET“, zablikajú minúty. Kotúčom (prstencom) na nastavovanie času nastavte minúty.
5. Ďalším stlačením tlačidla „T-SET“ ukončíte nastavovanie času. Znak  zmizne.

Ak posuniete spínač „HOLD“ na bočnej strane dávkovača do polohy. , budú všetky tlačidlá nefunkčné, t.j. spínač HOLD tlačidlá zamyká a zabraňuje náhodnému nastavovaniu prístroja.

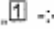Nastavenie 5 časov alarmu (výstražného signálu)

1. Spínač „HOLD“ na bočnej strane dávkovača liekov posuňte do polohy. 
2. Tlačte „T-SET“ dolu na displeji asi 3 sekundy. Zobrazí sa symbol  a zabliká čas prvého alarmu .
3. Otáčaním kotúča (prstenca) na nastavovanie času nastavíte prvý čas alarmu (výstražného signálu) v 30 minútovej postupnosti.
4. Nastavenie prvého času pre alarm ukončíte opätovným stlačením „T-SET“. Zabliká čas nasledujúceho alarmu (výstražného signálu) .

Kotúčom (prstencom) na nastavovanie času môžete podobným spôsobom ako prvý čas alarmu nastaviť druhý (tretí, štvrtý a piaty) čas alarmu (výstražného signálu). Ak chcete nastaviť iba jeden čas alarmu, stlačte „T-SET“. Tým sa presuniete k piatemu času alarmu a opakovaným stlačením „T-SET“ nastavovanie času ukončíte. Symbol  zmizne.


Po ukončení nastavovania času alarmu (výstražného signálu) vráťte spínač „HOLD“ do polohy. 

Resetovanie všetkých časov




Posunutím spínača „OPEN ►“ na bočnej stene dávkovača liekov v smere šípky sa dávkovač otvorí. Potlačte špáradlom alebo podobným špicatým nástrojom na „RESET“ a vyresetujete všetky časy. Časovač ukáže 12:00 AM a čas alarmu: „:- -“,

Vkladanie liekov do dávkovača

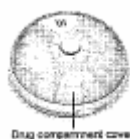

Dávkovač na lieky má na opačnej strane päť oddelených priehradiek na lieky. Pri vkladaní alebo vyberaní liekov musíte otočiť priehľadný uzáver priehradiek.

Osvetlenie displeja

Ak chcete na displej zapnúť asi na 10 sekúnd svetlo, najprv zatlačte posuvné tlačidlo „HOLD“ do polohy.  a stlačte tlačidlo „LIGHT“.

Nastavenie typu alarmu (výstražného signálu)



Na posuvnom spínači „BEEP VIB BEEP + VIB“ si môžete vybrať medzi zvukovým alarmom, vibračným alarmom alebo kombináciou oboidvoch. Toto nastavenie môžete urobiť bez posuvného spínača „HOLD“.

Alarm / Vyberanie liekov

Ak zaregistrujete alarm (výstražný signál), je čas zobrať lieky z priehradky, pre ktorú bol alarm naprogramovaný a to tak, že otočíte priehľadný uzáver. Otočenie uzáveru stíši zvuk alarmu a čas alarmu z displeja zmizne. Na displeji sa opäť zobrazí: „:- -“, Alarm znie alebo vibruje asi 30 sekúnd.

Ak zabudnete zobrať lieky z priehradky, alarm sa v päť minútových intervaloch dvakrát zopakuje.

Ak si z priehradky vyberiete tabletky do 15 minút pred nastavením času alarmu alebo otočíte priehľadný uzáver, alarm nezaznie.

V prípade, že zabudnete na čas alarmu (výstražného signálu) a tabletky je stále v priehradke, čas alarmu zostane na displeji nastavený ako pripomienka.


Za normálnych okolností, keď si vyberiete z dávkovača všetky tabletky, všetky časy alarmu z displeja sa menia na „:- -“, Každý deň v časovom rozpätí 12:13 je možné alarm


opäť nastaviť, čím sa zabezpečí, že dávkovač liekov bude nasledujúci deň používať opäť rovnaké časy nastavenia.

Monitor srdcového tepu

Dávkovač liekov má zabudovaný aj monitor srdcového tepu. Meraním srdcového tepu (počet tepov za minútu) môžete zistiť neznášanlivosť liekov a konzultovať problém s lekárom. *Bez konzultácie so svojim lekárom nemeňte predpísanú liečbu.*

Používanie monitora srdcového tepu

1. Nastavte posuvný spínač „HOLD“ na bočnej strane dávkovača liekov na .
2. Krátko stlačte tlačidlo srdcového tepu „PULSE START“ na bočnej strane dávkovača liekov. Na displeji zabliká srdce a zobrazí sa „- - -“.
3. Keď položíte koniec prsta na senzor srdcového tepu, začne na displeji blikať srdce. Blikajúce srdce naznačuje, že prístroj zaregistroval tep srdca.
4. Tep vášho srdca (počet úderov srdca za minútu) sa zobrazí približne po 15 až maximálne 60 sekundách.

Keď ukončíte meranie tepu srdca, vráťte posuvný spínač „HOLD“ do polohy: .

Záruka

Dávkovač liekov „Nikdy nezabúda“ má záruku dva roky. Počas platnosti záruky vám zadarmo odstránime všetky závady. Opravy prístroja po uplynutí záručnej doby si platí zákazník sám.

Záruka neplatí na škody zapríčinené nesprávnym zaobchádzaním s prístrojom, nehodami, alebo zmenami, ktoré na prístroji urobili neoprávnené osoby. Balenie, batérie a návod na použitie nie sú predmetom záruky.

Technické údaje:

Prevádzkové napätie:	<u>Čas, monitor srdcového tepu</u> 3V (1 x CR 2025)
	<u>Funkcia osvetlenia a alarmu (výstražného signálu)</u> 1,5V AAA batéria (LR03 alebo R03)
Časovač	časovač Quartz (presnosť +/- 20 sek./mesiac)
Alarm	voliteľný: zvukový, vibračný alebo zvukový a vibračný
Počet alarmov za deň	5
Počet priehradiek na lieky	5
Displej	LC displej s 13 mm znakmi (čas)
Rozmery	∅ 80 mm, výška 31 mm
Hmotnosť	96g (vrátane batérií, bez liekov)
Monitor srdcového tepu	Počet úderov srdca za minútu
Osvetlenie LCD	modré

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 11/07