




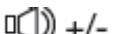
GOVOREČA STEKLENA TEHTNICA GS 39



Št. izdelka: 860453

KAZALO

1	OPIS NAPRAVE.....	3
2	KAR JE VREDNO VEDETI.....	3
3	POMEMBNI NAPOTKI	4
4	FUNKCIJA GOVORA.....	4
5	UPORABA.....	5
5.1	Začetek obratovanja	5
5.2	Tehtanje	6
5.3	Tehtanje z funkcijo pomnilnika.....	7
5.4	Priklic shranjenih vrednosti.....	7

1 OPIS NAPRAVE

- 1 
- 2 Zaslón
- 3 Uporabniška tipka 1, 2, 3, 4
- 4 Kg / lb / st
- 5 Jezik
- 6  +/-

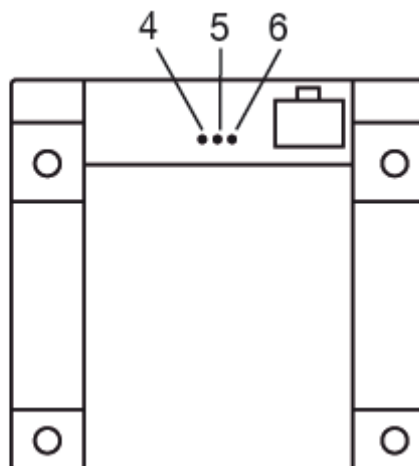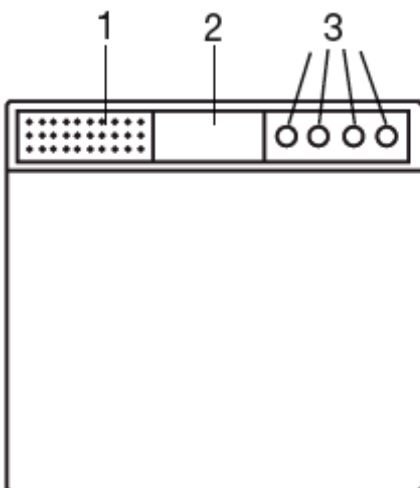

2 KAR JE VREDNO VEDETI

Pravilno tehtanje

Po možnosti se tehtajte ob istem času (najbolje zjutraj), zbudjeni in brez obleke, da dosežete primerljive rezultate.

3 POMEMBNI NAPOTKI

Previdno – za vašo varnost

- Pozor, na tehtnico ne stopite z mokrimi nogami in ne stopite na tehtnico, če je površina vlažna – spolzkost!
- Tehtnico zaščitite pred udarci, vlago, prahom, kemikalijami, močnimi temperaturnimi nihanji in pred bližino virov toplote (peči, radiatorji).
- Ne stopite samo na en rob tehtnice: nevarnost prevrnitve!
- Popravila lahko izvede samo servisna služba ali pooblaščen prodajalec. Pred vsako reklamacijo preverite baterije in le-te eventualno zamenjajte.
- Vse tehtnice ustrezajo EG smernici 2004 / 108 + dopolnila. V primeru vprašanj o uporabi naprave se obrnite na našo tehnično pomoč.
- Občasno obrišite napravo z vlažno krpo. Ne uporabite jedkih čistil in naprave nikoli ne držite pod vodo.
- Naprava je namenjena za zasebno uporabo in ne za medicinsko ali komercialno uporabo.
- Napravo odstranite ustrezno s smernico EG o starih električnih in elektronskih napravah 2002 / 96 / EC – WEEE («Waste Electrical and Electronic Equipment»). Pri vprašanjih se obrnite na pristojno komunalno službo.



4 FUNKCIJA GOVORA


Naprava razpolaga z 5 jeziki:

Nemški (DE), francoski (FR), angleški (GB), španski (ES), ruski (RU).

Pri dobavi je naprava nastavljena na nemški jezik.

Za spremembo jezika vklopite tehtnico tako, kot je opisano v poglavju »tehtanje« in počakajte, da bo na zaslonu prikazano »0.0«. Sedaj pritisnite na srednji gumb »Language« na zadnji strani naprave tolikokrat, dokler ne bo izrečen zelen jezik.

Uravnavanje glasnosti:

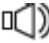Glasnost funkcije govora lahko po želji nastavite ali pa jo izklopite tako, da večkrat pritisnete na gumb » +/-« na zadnji strani tehtnice.

Napotek; izklop jezika (ni piska) pomeni, da ne sledi govor ter akustično predvajanje.

5 UPORABA

Tehtnica služi za ugotavljanje teže oseb. Tehtnice za to razpolaga z območjem tehtanja do 150 kg.

5.1 Začetek obratovanja

Če je prisotno, potegnite izolirni trak baterij na pokrovu predala za baterije oziroma odstranite zaščitno folijo baterij in vstavite baterije glede na pravilno polarnost. Če tehtnica ne prikazuje funkcije, potem popolnoma odstranite baterije in jih ponovno vstavite.


Vaša tehtnica razpolaga z »prikazom menjave baterij«. Pri obratovanju tehtnice s prešibkimi baterijami se na zaslonu pojavi »Lo« in tehtnica se samodejno izklopi.




Display	DE	FR	GB	ES	RUS
Lo	Batterie schwach	Batterie faible	Battery weak	Pila débil	Слабый заряд батареек

Lo = šibka baterija

Baterije morate v tem primeru zamenjati (3x 1,5V baterija tipa AAA). Izrabljene, popolnoma izpraznjene baterije morate odstraniti v posebno označene zbiralnike, na zbiralnem mestu za posebne odpadke ali pri prodajalcu električnih naprav. Vi ste zakonsko obvezani za odstranitev baterij.

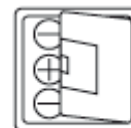

Napotek: te znake najdete na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi: Pb = baterija vsebuje svinec, Cd = baterija vsebuje kadmij, Hg = baterija vsebuje živo srebro.

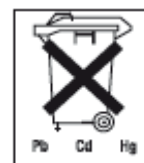

Tehtnico postavite na ravna trdna tla; trdna talna obloga je predpostavka za pravilno merjenje.

Pri dobavi je tehtnica nastavljena na enoto »kg«. Na zadnji strani tehtnice se nahaja gumb »kg / lb / st« z katerim lahko pri angleški izbiri jezika preklopite na »funt« in »Stones«.

5.2 Tehtanje

Tehtnico postavite na ravna trdna tla (ne na preprogo); trdna podlaga je predpostavka za pravilno merjenje.

S stopalom na kratko, močno in dobro slišno udarite na tehtnico, da aktivirate senzor tresljajev!



Slika 1

Kot samodejni test se pojavi celoten prikaz zaslona (slika 1), dokler ne bo prikazano »0.0« (slika 2).



Slika 2



Display	DE	FR	GB	ES	RUS
8888	Beep	Beep	Beep	Beep	Звуковой сигнал

Sedaj je tehtnica pripravljena za tehtanje.



Display	DE	FR	GB	ES	RUS
0.0	Das Gerät ist betriebsbereit	L'appareil est prêt à fonctionner	The device is ready for use	El aparato está preparado para el servicio.	Прибор готов к работе

Sedaj stopite na tehtnico. Stojte mirno na tehtnici z enakomerno porazdelitvijo teže na obeh nogah. Tehtnica takoj prične z merjenjem. Kmalu po tem bo prikazan izmerjen rezultat (slika 3). Ko boste stopili dol z tehtnice se bo le-ta po 10 sekundah samodejno izklopila. Tako dolgo ostane rezultat meritve viden.



Slika 3


Če napaka pri merjenju ugotovi napako, bo na zaslonu prikazano »----« ali »Err« (slika 4+5).



Slika 4



Display	DE	FR	GB	ES	RUS
---- / Err	Fehler	Erreur	Error	Error	Неисправность

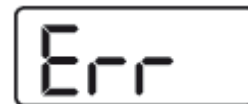

Slika 5

Če bo tehtnica obremenjena z več kot 150 kg bo prikazano »OVER« (slika 6).



Slika 6



Display	DE	FR	GB	ES	RUS
OVER	Überlastung	Surcharge	Overload	Sobrecarga	Перегрузка

Pazite na to, da boste preden boste stopili na tehtnico le-to najprej vklopili in počakali prikaz »0.0« (slika 2).


5.3 Tehtanje z funkcijo pomnilnika

Tehtnica razpolaga s 4 pomnilnimi mesti (1-4).

Tehtnico vklopite tako, kot je opisano v »5.2 tehtanje« in počakajte, da bo prikazano »0.0« (slika 2).

Sedaj pritisnite tipko za zeleno pomnilno mesto (1, 2, 3 ali 4).

Če boste npr. pritisnili na tipko »1«, se bo v zgornjem levem robu zaslona pojavilo »User 1«.


 Display	DE	FR	GB	ES	RUS
User 1	Speicherplatz 1	Emplacement de mémoire 1	Memory space 1	Espacio de memoria 1	Пользовательски элемент позиция 1

Sedaj je tehtnica pripravljena za merjenje vaše teže tako, kot je opisano v poglavju 5.2.


Izmerjen rezultat bo samodejno shranjen na konkretno pomnilno mesto. Eventualno bo prejšnji rezultat meritve prepisan.

5.4 Priklic shranjenih vrednosti

Pritisnite na zeleno tipko pomnilniškega mesta v izklopljenem stanju. Shranjen rezultat bo prikazan.

 Display	DE	FR	GB	ES	RUS
User 1 62,4 kg	Speicherplatz 1 Benutzerspeicher 62,4 kg	Emplacement de mémoire 1 Mémoire 62,4 kg	Memory space 1 user memory 62,4 kg	Espacio de memoria 1 Memoria el usuario 62,4 kg	Пользовательски элемент позиция 1 позиция 62,4 kg

Kmalu za tem se pojavi kot samodejni test celoten prikaz zaslona (slika 1), dokler ne bo prikazano »0.0«.

 Display	DE	FR	GB	ES	RUS
0.0	Das Gerät ist betriebsbereit	L'appareil est prêt à fonctionner	The device is ready for use	El aparato está preparado para el servicio.	Прибор готов к работе

Sedaj je tehtnica pripravljena za merjenje vaše teže tako, kot je opisano v poglavju 5.2.

Novi rezultat meritve bo samodejno shranjen na izbrano pomnilno mesto.

Napotek: izbira drugega pomnilnega mesta lahko sledi šele takrat, ko bo na zaslonu prikazano »0.0«.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.