



NAVODILA ZA UPORABO


**Osebna digitalna tehtnica  
Medisana Ecomed PS-72E**

Kataloška št.: 136 76 91

## KAZALO

SESTAVNI DELI NAPRAVE .....	3
1. VARNOSTNI NAPOTKI .....	3
2. VSEBINA PAKETA .....	4
3. VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJ .....	4
4. ZAMENJAVA MERSKE ENOTE TEHTANJA .....	4
5. TEHTANJE S FUNKCIJO "STEP-ON" .....	4
6. SPOROČILA O NAPAKAH .....	5
7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	5
8. TEHNIČNI PODATKI .....	5
GARANCIJSKI LIST .....	6

## SESTAVNI DELI NAPRAVE

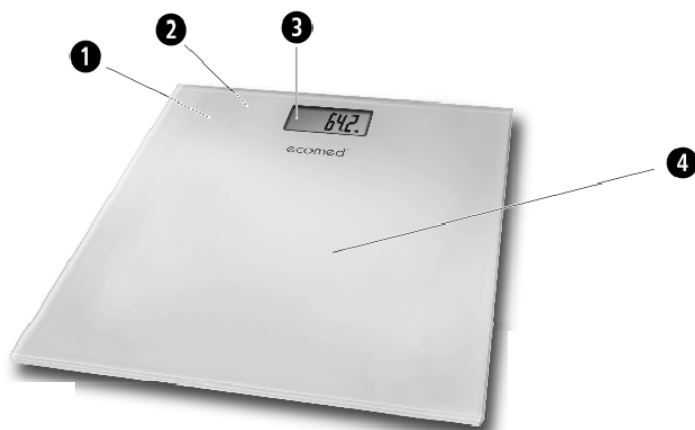

1. Prostor za baterije (na spodnji strani)
2. Gumb za mersko enoto (na spodnji strani) za kilograme (kg) ali funte (lb)
3. Zaslón
4. Površina za stanje



### **POMEMBNA INFORMACIJA! SHRANITE ZA PRIHODNJE PRILOŽNOSTI!**

**Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke in navodila shranite za prihodnje priložnosti.**

**Če naprave predate naslednjemu uporabniku, je zelo pomembno da zraven priložite tudi ta navodila za uporabo.**

## 1. VARNOSTNI NAPOTKI

- Tehtnice ne postavljajte na neravno površino. Nikoli ne stopite na rob tehtnice, Pri tehtanju ne stojite na eni strani tehtnice ali na njenem robu.
- Na tehtnico ne stopite z mokrimi nogami. Na tehtnico ne stopite v nogavicah.
- Tehtnica je izdelana za zasebno uporabo. Ni primerna v komercialne namene v bolnišnicah ali drugih zdravstvenih ustanovah.
- Merilno območje tehtanja je do največ 150 kg, 330 lb. tehtnice ni dovoljeno preobremeniti.
- S tehtnico ravnajte previdno. Tehtnice ni dovoljeno izpostavljati močnim udarcem ali vibracijam. Tehtnica ne sme pasti na tla. Tehtnice ne izpostavljajte vodi.
- V primeru okvare naprave ne poskušajte popravljati sami, ker s tem izničite garancijo. Popravila lahko opravlja samo pooblaščen servis.
- **OPOZORILO!** Zagotovite, da je embalaža iz stiroporja izven dosega otrok! Nevarnost zadušitve! Otroci se z napravo ne smejo igrati.

- Baterije hranite izven dosega otrok! Baterij ne razstavljajte! Teh baterij ne poskušajte polniti! Z baterijami ne povzročajte kratkega stika in jih ne mečite v ogenj!

## 2. VSEBINA PAKETA

- 1 x steklena osebna tehtnica
- 1 x litijeva CR2032 3V gumbna baterija
- 1 x navodila za uporabo

## 3. VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJ

Iz prostora za baterije (1) na spodnji strani naprave je še pred uporabo potrebno izvelči izolacijski trak. Ko se na zaslonu (3) pokaže simbol **“LO”** ali če se po tem, ko stopite na tehtnico na zaslonu nič ne pokaže, zamenjajte baterije. Pri tem pazite na pravilno polarnost (pozitivni pol je obrnjen navzgor, proti pokrovu).

### OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Te naprave ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Vsi uporabniki morajo odslužene električne in elektronske naprave ne glede na to, ali vsebujejo strupene snovi, odlagati na javnih zbirnih mestih, zato da so lahko odstranjene na okolju prijazen način. Pred odstranjevanjem naprave iz nje odstranite baterije. Praznih baterij ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke, ampak jih odnesite na ustrezna zbirna mesta za baterije na kraju za recikliranje ali v trgovino nakupa.



**Cd Hg Pb**

Baterije, ki vsebujejo strupene snovi, so označene z naslednjimi simboli:

Cd = vsebuje kadmij, Hg = vsebuje živo srebro, Pb = vsebuje svinec

## 4. ZAMENJAVA MERSKE ENOTE TEHTANJA

Teža je na zaslonu lahko prikazana v kilogramih (kg) ali funtih (lb). Pritisnite gumb (2), da se na zaslonu izpiše zelena merska enota.

## 5. TEHTANJE S FUNKCIJO “STEP-ON”

1. Prepričajte se, da je tehtnica postavljena na trdno, ravno površino. Če želite stehatati le sebe, vendar ste tik pred tem premaknili tehtnico, jo morate najprej zagnati. To storite tako, da z nogo pritisnete na sredino površine za tehtanje. Na

- zaslonu se izpiše **“0.0 kg“**. **Ko se tehtnica izklopi, je pripravljena za funkcijo “step-on“**. Če tehtnice pred tehtanjem niste premaknili, ta postopek ni potreben.
2. Stopite na tehtnico in stojite pri miru. Naprava se samodejno vklopi in na zaslonu se za kratek čas izpiše **“0.0 kg“**.
  3. Ko je vaša teža je izmerjena najprej dvakrat utripne in se po tem končno izpiše na zaslonu.
  4. Stopite s tehtnice. Prikaz na zaslonu se spremeni v **“0.0 kg“**. PO 10 sekundah se tehtnica samodejno izklopi.

## 6. SPOROČILA O NAPAKAH

**“ERR“** – tehtnica je preobremenjena.

**“LO“** – baterija je prazna in jo je potrebno zamenjati.

Če vaša osebna tehtnica ne deluje skladno z vašimi pričakovanji, pred servisiranjem preverite naslednje:

- Preverite ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite ali ste izbrali pravo mersko enoto tehtanja.
- Preverite ali je tehtnica prosto postavljena na trdno in enakomerno površino. Ne sme se dotikati zidu ali drugih predmetov.
- Ponovno se stehtajte.

## 7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali trdih krtač. Tehtnico očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali alkohola. Ne dopustite, da v napravo zaide voda. Naprave ne uporabljajte dokler ni popolnoma suha.

## 8. TEHNIČNI PODATKI

Ime in model naprave:	Osebna tehtnica <b>Ecomed PS-72E</b>
Napajalna napetost:	3V, 1 x 3V litijeva gumbna baterija CR2032
Merilno območje:	do največ 150 kg, 330 lb
Stopnjevanje:	100 g ali 0.2 lb
Samodejni izklop:	po približno 10 sekundah
Dimenzije (D x Š x V):	približno 30 x 30 x 2 cm
Teža:	približno 1.5 kg
Številka izdelka:	23510 EAN koda: 40 15588 23510 8

V skladu z našo politiko nenehnih izboljšav izdelkov, si pridržujemo pravico do tehničnih in vidnih sprememb brez predhodnega opozorila.

**Ecomed** je blagovna znamka podjetja **MEDISANA AG**

Jagenbergstrasse 19, 41468 NEUSS, Nemčija

eMail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)

Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Osebna digitalna tehtnica Medisana Ecomed PS-72E**  
Kat. št.: **136 76 91**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**