



NAVODILA ZA UPORABO

## Osebna tehtnica Ecomed PS-72E

Kataloška št.: 16 12 025

CE

ecomед




## **POMEMBNI NAPOTKI! OBVEZNO SHRANITE!**

**Pred začetkom uporabe naprave natančno preberite navodila za uporabo, predvsem varnostne napotke. Navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.**

### **Kazalo**

Naprava in upravljalni elementi .....	2
1 Varnostni napotki .....	2
2 Vsebina paketa .....	3
3 Vstavljanje/menjava baterije .....	3
Odstranjevanje .....	3
4 Spreminjanje enote teže .....	4
5 Tehtanje s funkcijo "step-on" .....	4
6 Sporočila o napaki .....	4
7 Čiščenje in vzdrževanje .....	4
8 Tehnični podatki .....	4
Garancijski list .....	6

### **Naprava in upravljalni elementi**

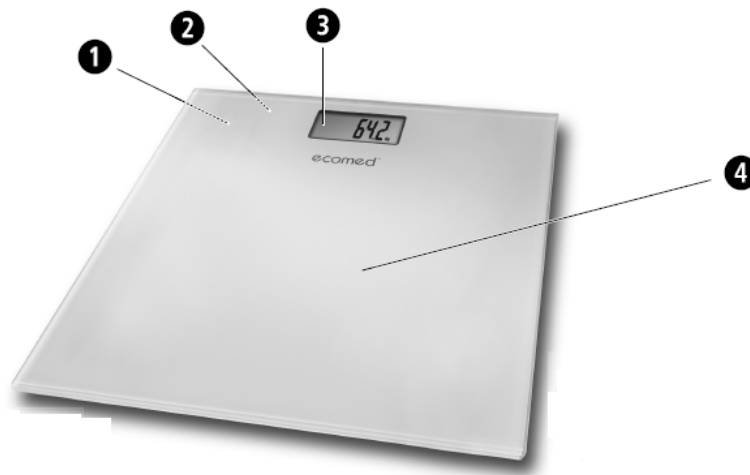

- 1 Baterijski predal (na spodnji strani)
- 2 Preklopnik (na spodnji strani) za kilograme (kg) in funte (lb)
- 3 Prikazovalnik
- 4 Stojna ploskev

### **1 Varnostni napotki**

- Tehtnice nikoli ne postavljate na neravno podlago. Vogal ne stopajte samo na en rob tehtnice. Pri tehtanju se ne postavljajte na eno stran in ne na rob tehtnice.
- Na tehtnico nikoli ne stopajte z mokrimi nogami. Na tehtnico nikoli ne stopajte z nogavicami.

- Tehnica je bila izdelana za zasebno rabo. Ni namenjena komercialni rabi v bolnišnicah ali drugih zdravstvenih ustanovah.
- Tehnica ima merilno območje do 150 kg, 330 lb. Tehnice ne preobremenite.
- S tehtnic ravnajte previdno. Preprečite udarce in tresljaje tehtnice. Pazite, da vam ne pade na tla. Tehnica se ne sme nahajati v bližini vode.
- V primeru motenj naprave ne popravljate sami, sicer izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije. Popravila naj izvaja samo pooblaščen servisna služba.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.
- **OPOZORILO!** Pazite na to, da pakirne folije ne pridejo v otroške roke! Obstaja nevarnost zadušitve. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Baterije se naj nahajajo izven dosega otrok! Baterij ne razstavljajte! Baterij ne smete ponovno polniti! Ne povzročajte kratkega stika! Ne mečite v ogenj!
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## 2 Vsebina paketa

- 1 x steklena osebna tehtnica
- 1 x 3 V litijeva gumbna baterija tipa CR2032
- 1 x navodila za uporabo

## 3 Vstavljanje/menjava baterije

Preden lahko začnete uporabljati tehtnico, morajo iz baterijskega predala ❶ na spodnji strani naprave izvleči izolacijski trak. Ko se na prikazovalniku pojavi simbol za menjavo baterije "LO" ❸ ali ko prikazovalnik ničesar ne prikazuje, potem ko stopite na napravo, je treba zamenjati baterijo. Pri tem pazite na polarnost (plus pol kaže navzgor proti pokrovu).

### Odstranjevanje



Te naprave ne smete metati med gospodinjske odpadke. Vsak potrošnik je zakonsko zadolžen vse električne ali elektronske naprave, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, oddati na zbirališču svoje občine ali v trgovini in s tem zagotoviti okolju prijazno odstranjevanje. Pred odstranjevanjem naprave iz nje vzemite baterijo. Odsluženih baterij ne mečite med gospodinjske odpadke, temveč med posebne odpadke ali pa jih oddajte na zbirnem mestu za baterije v specializirani trgovini.



Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, najdete naslednje znake:

Cd = vsebuje kadmij  
 Hg = vsebuje živo srebro  
 Pb = vsebuje svinec

## 4 Spreminjanje enote teže

Izbirate lahko med prikazom teže v kilogramih (kg) ali funtih (lb). Pritiskajte tipko **2**, dokler ni prikazana zelena enota.

## 5 Tehtanje s funkcijo "step-on"

1. Poskrbite za to, da tehtnica stoji na trdih in ravnih tleh. Ko se želite stehtati, vendar ste tehtnico tik pred tem premikali, potem morate tehtnico najprej inicializirati. Pri tem s stopalom kratko pritisnite na sredino površine tehtnice. Na prikazovalniku se pojavi napis "**0.0 kg**". **Ko se tehtnica izključi, je pripravljena na funkcijo "step-on"**. Če tehtnice pred tem niste premikali, ta postopek odpade.
2. Stopite na tehtnico in stojite pri miru. Naprava se samodejno vključi in na prikazovalniku **3** se za kratek čas pojavi napis "**0.0 kg**".
3. Naprava izmeri vašo težo, prikaz dvakrat utripne, nato pa je vrednost neprekinjeno prikazana.
4. Stopite s tehtnice. Prikaz preklopi nazaj na "**0.0 kg**". Tehtnica se po pribl. 10 sekundah samodejno izključi.

## 6 Sporočila o napaki

**ERR** = Tehtnica je preobremenjena.

**LO** = Baterija je šibka in jo je treba zamenjati.

Če vaša osebna tehtnica ne deluje v skladu z vašimi željami in želite kontaktirati našo servisno službo, najprej preverite naslednje:

- Preverite, če je baterija pravilno vstavljena.
- Preverite, če ste izbrali pravilno enoto teže.
- Preverite, če tehtnica stoji na trdi in ravni podlagi. Pri tem se ne sme dotikati stene ali kakšnega drugega predmeta.
- Ponovite tehtanje.

## 7 Čiščenje in vzdrževanje

Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali grobih krtač. Osebno tehtnico čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali alkohola. V napravo ne sme vdreti voda. Napravo lahko začnete uporabljati šele takrat, ko se popolnoma posuši.

## 8 Tehnični podatki

Ime in model: ..... steklena osebna tehtnica **ecomed PS-72E**  
Napajanje: ..... 3 V =, 1 x 3 V litijeva gumbna baterija tipa CR2032  
Merilno območje: ..... do 150 kg ali 330 lb  
Ločljivost: ..... 100 g ali 0,2 lb

Samodejni izklop: ..... čez pribl. 10 s  
Mere (D x Š x V): ..... pribl. 30 x 30 x 2 cm  
Teža: ..... pribl. 1,5 kg  
Št. izdelka: ..... 23510  
EAN-številka: ..... 40 15588 23510 8

**V namen nenehnih izboljšav izdelka si pridržujemo pravico do tehničnih in optičnih sprememb.**

Aktualno različico teh navodil za uporabo najdete na spletni strani [www.medisana.com](http://www.medisana.com).

**ecomед®**  
je blagovna znamka podjetja MEDISANA AG  
Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
NEMČIJA

E-pošta: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Spletna stran: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

07/2014



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Osebna tehničnica Ecomed PS-72E**  
Kat. št.: **16 12 025**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**