



NAVODILA ZA UPORABO


Masažna naprava Medisana AC 850

Kataloška št.: 17 07 163

KAZALO VSEBINE

1 SESTAVNI DELI IN KONTROLNE ENOTE.....	3
2 VARNOSTNE INFORMACIJE	3
2 VSEBINA PAKIRANJA	5
3 MASAŽNA NAPRAVA MEDISANA AC 850	5
4 UPRAVLJANJE NAPRAVE	6
5 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	6
6 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	6
7 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA	6
GARANCIJSKI LIST.....	7
PREVOD IZVIRNJE IZJAVE EU O SKLADNOSTI	8
IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI	9

1 SESTAVNI DELI IN KONTROLNE ENOTE

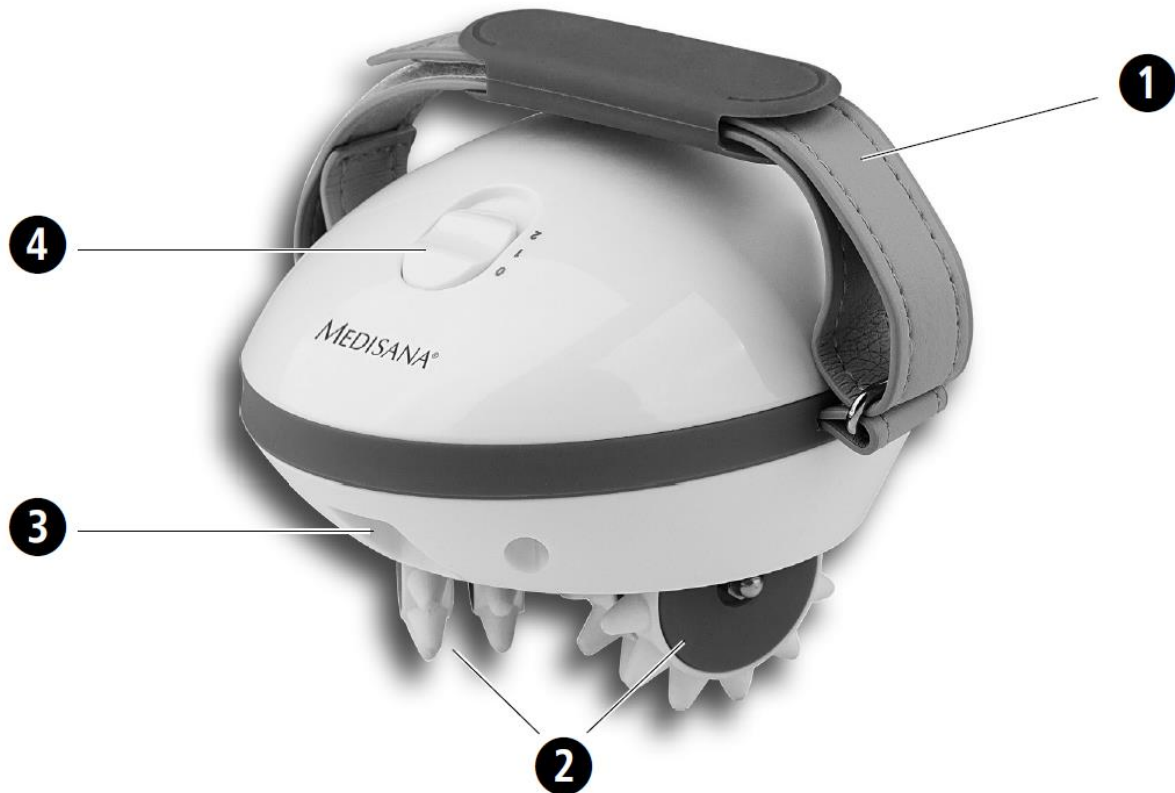

1. Individualno nastavljiv nederseč pas za roko
2. 3 × 2 vrtljivi masažni valji
3. Vtičnica napajalnika
4. Drsno stikalo:
0 = naprava izklopljena
1 = nizka hitrost
2 = visoka hitrost

Pred uporabo te naprave natančno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostna navodila, in jih hranite za nadaljnjo uporabo. Če napravo predate drugi osebi, je nujno, da zraven predate tudi ta navodila za uporabo.

2 VARNOSTNE INFORMACIJE

- Napravo uporabljajte samo za predviden namen in v skladu z navodili za uporabo. Naprava ni namenjena komercialni uporabi.
- Preden napravo priključite na napajanje, preverite, ali je napajalna napetost, navedena na tipski plošči, združljiva z omrežjem.
- Če naprave ne uporabljate za predvideni namen, je garancija nična.
- Ta naprava ni zasnovana tako, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe z

nezadostnimi izkušnjami in/ali znanjem, razen če jih opazuje in nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če je bila poučena o uporabi naprave.

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- V primeru okvar ne poskušajte sami popraviti naprave. Ne le da bo garancija nična, ampak lahko tudi tvegate resne nevarnosti (požar, električni udar, poškodbe). Popravila naj se izvajajo samo na pooblaščenih servisnih mestih.

OPOZORILO!

Uporaba masažne naprave je **prepovedana** v naslednjih primerih:

- na otrocih,
- na živalih,
- če ste noseči,
- na glavi in grlu,
- ne uporabljajte naprave na delih telesa, ki imajo otekline, opekline, vnetja, oluščeno kožo, rane ali druge občutljive točke,
- na ljudeh, opremljenih s srčnim spodbujevalnikom, umetnimi sklepi ali elektronskimi vsadki – ti se morajo pred uporabo naprave v vsakem primeru posvetovati z zdravnikom,
- ob zaužitju snovi, ki zmanjšajo reakcijski čas (npr. zdravila proti bolečinam, alkohol),
- te naprave ne smete uporabljati, če vas je prizadela ena ali več naslednjih bolezni ali stanj: motnje cirkulacije, krčne žile, odprte rane, modrice, ranjena koža, vnetje žil ali tromboza.

Upoštevajte naslednje, zlasti glede električne opreme:

- Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih!
- V kopeli ali pod prho ne uporabljajte električne opreme. Električne opreme ne hranite na mestih, kjer bi lahko padla v kad ali umivalnik.
- Ne posegajte po enoti, če je padla v vodo. Takoj izklopite napajalnik iz napajalne vtičnice.
- Naprave ne uporabljajte v bližini aerosolnih hlapov ali hkrati s kisikovo napravo.
- Naprave ne uporabljajte pod posteljnino ali blazinami.
- Omrežni kabel hranite ločeno od vročih površin in odprtega ognja.
- Nikoli ne uporabljajte naprave, če je napajalni kabel poškodovan, če naprava ne deluje brezhibno, če je naprava padla v vodo ali je bila poškodovana.
- Če je napajalni kabel oziroma adapter poškodovan, ga sme zamenjati samo pooblaščen prodajalec Medisana ali za to usposobljeno osebo.
- Nikoli ne nosite, vlecite ali zavrtite naprave na napajalnem kablu in nikoli ne dopustite, da je kabel stisnjen med druge predmete.
- Napajalni kabel držite stran od vrtljivih masažnih valjev.
- Neprekinjeno zdravljenje ne sme trajati dlje kot 15 minut. Nato izklopite enoto vsaj za pol ure in pustite, da se ohladi.
- Če napravo preveč obremenite, jo izklopi toplotna varovalka. Nato pustite, da se naprava vsaj 30 minut hladi, preden jo ponovno uporabite.

- Vtič iz vtičnice izvlecite samo, ko imate suhe roke, ko je enota izklopljena in je ne uporabljate več, prav tako to storite, ko morate zamenjati ali očistiti masažne valje.

Pomembna priporočila v zvezi z vašim zdravjem:

- Če imate sladkorno bolezen ali druge z njo povezane bolezni, se pred uporabo te naprave posvetujte s svojim zdravnikom.
- Tretma mora biti prijeten. Takoj se ustavite in se posvetujte s svojim zdravnikom, če čutite bolečino ali se vam zdi zdravljenje neprijetno.
- Masaže z uporabo masažne naprave niso nadomestilo za zdravljenje, ki ga izvajajo zdravniki ali fizioterapevti.

Hvala za zaupanje in čestitke!

Z nakupom masažne naprave ste kupili kakovosten izdelek za odpravljanje celulita proizvajalca Medisana. Da bi zagotovili, da vaša naprava Medisana AC 850 čim dlje zagotavlja uspešne rezultate, priporočamo, da natančno preberete spodnja navodila o njeni uporabi in negi.

2 VSEBINA PAKIRANJA

Najprej preverite, ali je naprava popolna in na noben način poškodovana. V primeru dvoma je ne uporabljajte in se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center.

V pakiranju je naslednje:

- Masažna naprava Medisana AC 850
- Napajalnik
- Navodila

Embalažo je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Prosimo, da embalažo pravilno zavržete v za to namenjene zabojnike. Če na transportni embalaži opazite kakršno koli transportno škodo, se takoj obrnite na prodajalca.

3 MASAŽNA NAPRAVA MEDISANA AC 850

- Celulit, nepravilnost v teksturi kože, je posledica neenakomerne porazdelitve podkožne maščobe, stiskanja vezivnega tkiva in slabe prekrvavitve.
- Čarobnega zdravila za celulit ni. Gimnastika, šport, uravnotežena prehrana in masaže za spodbujanje boljše prekrvavitve vseeno naredijo svoje in zmanjšajo pojavnost celulita. Spodbujajo namreč presnovo, krepijo limfni obtok in pozitivno vplivajo na vezivno tkivo.
- Masažna naprava omogoča masažo zadnjice, stegen, nadlahti in bokov, in spodbuja prekrvavitev. Masaže imajo dobrodošel učinek aktiviranja in spodbujanja cirkulacije - tako pomagajo ustrezno aktivirati metabolizem. Masaža lahko, ko jo izvajamo vsakodnevno in daljše časovno obdobje, pripomore k občutno bolj napeti koži.

4 UPRAVLJANJE NAPRAVE

- Priključite napajalni kabel v vtičnico naprave in nato napajalnik vključite v električno vtičnico.
- Masažno napravo držite na delu telesa, ki ga želite masirati. Prepričajte se, da noben del telesa (npr. prsti) ali napajalni kabel ne zaideta med vrteče se masažne valje.
- Če začutite bolečino ali uporaba naprave sproži neprijetne občutke, spremenite kontaktni tlak, poskusite na drugem delu telesa ali prekinite masažo.
- S pomočjo drsnega stikala (4) aktivirate aparat. Takoj, ko stikalo potisnete v položaj 1, se masažni valji (2) začnejo vrteti z manjšo hitrostjo. Izberite položaj stikala 2, če želite, da se valji vrtijo hitreje. Če želite aparat izklopiti, potisnite drsno stikalo (4) v položaj 0.

5 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pri električnih napravah vedno izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
- Nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev ali trdih ščetk.
- Masažne valje lahko odstranite s čvrstim potegom in jih očistite pod tekočo vodo s tekočino za pranje. Posušite masažne valje in jih namestite nazaj na osnovno enoto.
- Napravo očistite z mehko krpo, ki je bila rahlo navlažena z blagim milom. Ko želite napravo očistiti, je nikoli ne potopite v vodo in se prepričajte, da voda ne more priti v napravo. Napravo ponovno uporabite le, ko je popolnoma suha.
- Napravo hranite na suhem in hladnem mestu.

6 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Tega izdelka ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsi uporabniki morajo vse električne ali elektronske naprave, ne glede na to, ali vsebujejo strupene snovi, predati na občinskem ali komercialnem zbirnem mestu, tako da jih je mogoče odstraniti na okolju sprejemljiv način. Za informacije o odstranjevanju se posvetujte s svojim občinskim organom ali prodajalcem.

7 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ime in model: Masažna naprava Medisana AC 850

Napajanje:

- Omrežni adapter: YJS 020D -1201200G
- Vhodna napetost: 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 500 mA
- Izhodna napetost: 12,0 V =; 1200 mA

Dimenzije: cca. 130 x 110 x 85 mm (D x Š x V)

Teža: cca. 220 g (brez napajalnika)

Št. artikla : 88540

EAN-številka: 40 15588 88540



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Masažna naprava Medisana AC 850**
Kat. št.: **17 07 163**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

PREVOD IZVIRNJE IZJAVE EU O SKLADNOSTI

Mi, Medisana AG,
 Jagenbergstrasse 19,
 41468 NEUSS, NEMČIJA
 Tel. +49 (0) 2131 3668-0

Na lastno odgovornost izjavljamo, da sledeči izdelek:

Masažna naprava Medisana AC 850

izpolnjuje zahteve naslednjih direktiv EU:

- 1. Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti, vključno s spremembami**
- 2. Direktiva EMC 2004/108/ES, vključno s spremembami**
- 3. Direktiva EuP 2009/125/ES, vključno s spremembami**

Standardi:

Adapter:

EN 50563: 2011

EN 50564: 2011

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61558-1: 1997 + A1 + A11

EN 61558-2-6: 1997

EN 61558-2-17: 1997

Naprava:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

Ta izjava temelji na:

EMTEK Poročilo: E0904086E-1

Poročilo TUV Rheinland: 170162301 001

Poročilo ITL 12113168

TOV Sud Poročilo: 64.710.13.00712.01- (E)

predstavnik oddelka za kakovost

Neuss, 21.5.2013

IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

MEDISANA®

EC-Declaration of Conformity / EG-Konformitätserklärung

We,
Wir,

Medisana AG,
Jagenbergstrasse 19,
41468 NEUSS, GERMANY
Tel. +49 (0) 2131 3668-0

hereby state with sole responsibility that the product specified hereafter,
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das im folgenden aufgeführte Produkt,

Medisana **AC 850** Cellulite Massager
Model : E-0500MDN
Article-No.: 88540

meets the requirements of the following EC-Directive(s):
die Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinie(n) erfüllt:

1. **Low Voltage Directive 2006/95/EC including amendments /**
Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG mit Änderungen
2. **EMC Directive 2004/108/EC including amendments /**
EMV Richtlinie 2004/108/EG mit Änderungen
3. **EuP Directive 2009/125/EC including amendments /**
EuP Richtlinie 2009/125/EG mit Änderungen

Standards:

Adapter :	EN 50563	: 2011
	EN 50564	: 2011
	EN 55014-1	: 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011
	EN 55014-2	: 1997 + A1 : 2001 + A2 : 2008
	EN 61000-3-2	: 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
	EN 61000-3-3	: 2008
	EN 61558-1	: 1997 + A1 + A11
	EN 61558-2-6	: 1997
	EN 61558-2-17	: 1997
	Device :	EN 55014-1
EN 55014-2		: 1997 + A1 : 2001 + A2 : 2008
EN 61000-3-2		: 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
EN 61000-3-3		: 2008

This declaration is based on: / Dieser Erklärung liegt zugrunde:

EMTEK Report : E0904086E-1
TÜV Rheinland Report : 170162301 001
ITL Report : 12113168
TÜV Süd Report : 64.710.13.00712.01-(E)

Quality Management Representative/ Qualitätsmanagement-Beauftragter

Neuss, **date/ Datum** 2013-05-21

