

Betriebsanleitung Analoges Refraktometer

KERN ORA 80 BE Analog Expert
2.fach Skala Brix

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com



Version 1.2 04/2019


INHALTSVERZEICHNIS

1	Technische Daten	1
2	Gerätebeschreibung	2
3	Grundlegende Hinweise	3
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
3.2	Gewährleistung	3
4	Grundlegende Sicherheitshinweise	4
4.1	Hinweise in der Betriebsanleitung beachten	4
4.2	Warnung	4-5
5	Lieferumfang	5
6	Vor der ersten Benutzung	6
7	Handhabung / Messung	6
7.1	Nullpunktjustierung	7-8
7.2	Ergänzender Hinweis	9
7.3	Messvorgang	9-10
8	Reinigung und Wartung	11
9	Aufbewahrung	11
10	Service	11
11	Entsorgung	12
12	Weitere Informationen	12
13	Umrechnungstabelle	13
14	Anhang	14


1. Technische Daten

Modell KERN	Messbereich und Skalen	Skalenteilung Genauigkeit	Abmessungen Produkt	Nettogewicht
ORA 80BE	Brix: 0-50% Brix: 50-80%	0,5 % Brix 0,5 % Brix	180x40x40mm	0,400kg

Beispiel der Skala für
ORA 80 BE

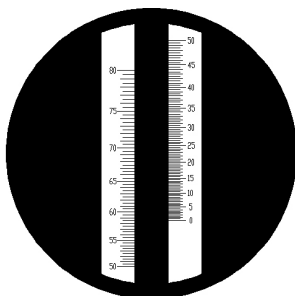

2. Gerätebeschreibung

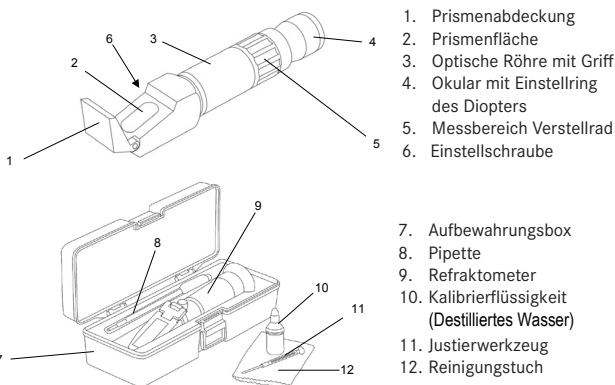

1. Prismenabdeckung
2. Prismenfläche
3. Optische Röhre mit Griff
4. Okular mit Einstellung des Diopters
5. Messbereich Verstellrad
6. Einstellschraube
7. Aufbewahrungsbox
8. Pipette
9. Refraktometer
10. Kalibrierflüssigkeit (Destilliertes Wasser)
11. Justierwerkzeug
12. Reinigungstuch

3. Grundlegende Hinweise

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Refraktometer ist ein Messinstrument zur Bestimmung des Brechungsindex von transparenten Stoffen in flüssigem oder teilweise auch festem Zustand. Es nutzt dafür das Verhalten von Licht am Übergang zwischen einem Prisma mit bekannten Eigenschaften und dem zu prüfenden Stoff. Wird das Refraktometer zu anderen Zwecken eingesetzt, ist dies bestimmungswidrig und birgt Gefahren. Für mögliche Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

3.2 Gewährleistung

- Die Gewährleistung erlischt bei
- Nichtbeachten der Vorgaben aus der Betriebsanleitung
 - Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
 - Veränderung oder Öffnen des Gerätes
 - Mechanische Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten natürlichem Verschleiß und Abnutzung

4. Grundlegende Sicherheitshinweise

4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten



- Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit KERN-Refraktometern verfügen.
- Alle Sprachversionen beinhalten eine unverbindliche Übersetzung. Verbindlich ist das deutsche Originaldokument.

4.2 Warnung

- Vermeiden Sie den Kontakt von Säure mit Haut oder Augen. Spülen Sie verätzte Haut mit viel Wasser. Duschen Sie, wenn größere Bereiche betroffen sind.
- Wenn die Augen verätzt wurden, spülen Sie die Augen bei geöffneten Lidern mit lauwarmem, fließendem Wasser von außen nach innen. Spülen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang. Anschließend suchen Sie bitte sofort einen Arzt / Augenarzt auf.
- Reinigen Sie das Refraktometer nach jedem Gebrauch gründlich.
- Das Refraktometer darf keinen extremen Temperaturen, starken mechanischen Beanspruchungen, keiner direkten, intensiven Sonneneinstrahlung oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Dieses Refraktometer ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände
- Stellen Sie sicher, dass Sie während der Benutzung des Refraktometers keine Stöße oder ähnliches erhalten, da dies zu gefährlichen Augenverletzungen führen kann.
- Die Gummi-Augenmuschel kann bei länger anhaltendem Kontakt mit der Haut Irritationen hervorrufen. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung.
- Berühren Sie die Linsen nicht mit den Fingern.

5. Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken und vor der ersten Inbetriebnahme, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind. Tauschen Sie beschädigte oder defekte Teile sofort um und nehmen Sie sie nicht in Betrieb.

- Refraktometer
- Aufbewahrungsbox
- Pipette
- Justierwerkzeug
- Reinigungstuch
- Kalibrierflüssigkeit (Destilliertes Wasser)

6. Vor der ersten Benutzung

Entfernen Sie die Schutzfolie (falls vorhanden) von der Prismenfläche [2] und überprüfen Sie den korrekten Sitz der Gummi-Augenmuschel [4].

7. Handhabung / Messung

Mit dem Refraktometer kann schnell und präzise der Brechungsindex von transparenten Stoffen in flüssigem oder festem Zustand bestimmt werden. Für eine korrekte Messung muss das Messgerät vor der Messung justiert werden. Bitte fassen Sie das Messgerät nur mit trockenen Händen an.

Das Messgerät hat zwei Messbereiche. Zum Umschalten von einem auf den anderen Messbereich den Gehäusering [5] zwischen dem Okular [4] und der Optischen Röhre [3] drehen.



Das Refraktometer kann nicht für die Messung von Flüssigkeiten auf Öl-Basis verwendet werden.

7.1 Nullpunktjustierung

- ▶ Halten Sie das Refraktometer gegen eine ausreichend helle Lichtquelle und schauen Sie durch das Okular [4] indem Sie das Okular dicht an Ihr Auge/Brille halten.
 - ▶ Das Okular [4] durch Drehen auf das Auge einstellen bis die Skala scharf erscheint.
 - ▶ Klappen Sie die Prismenabdeckung [1] nach oben.
 - ▶ Reinigen Sie das Prisma [2] und die Unterseite der Prismenabdeckung [1] mit einem weichen Tuch oder weichen Papier gründlich (nötigenfalls mit Alkohol) und reiben Sie es trocken. Wasser darf grundsätzlich nur auf das Messprisma gegeben werden.
 - ▶ Bringen Sie nun einige Tropfen der Kalibrierflüssigkeit [10] auf die Prismenfläche [2] auf.
 - ▶ Drücken Sie die Prismenabdeckung [1] wieder an. Die Flüssigkeitsmenge sollte so bemessen sein, dass der wesentliche Teil der Prismenfläche benetzt ist. Es dürfen keine Luftblasen zwischen Messprisma [2] und Prismenabdeckung [1] sein.
 - ▶ Warten Sie ca. 30 Sekunden damit sich die Temperatur der zu prüfenden Flüssigkeit und des Prismas an sich angepasst haben.
 - ▶ Sehen Sie durch das Okular [4] und richten Sie das Refraktometer dabei mit seiner Prismenfläche [2] gegen eine möglichst helle Lichtquelle.
 - ▶ Im Okular [4] sehen Sie ein Hell- und ein Dunkelfeld, deren Grenzlinie den Brechungsindex auf der ebenfalls im Okular [4] sichtbaren Skala anzeigt.
- 7
- ▶ Mit Hilfe des mitgelieferten Justierwerkzeugs [11], kann durch Drehen der Justierschraube [3] seitlich am Gehäuse der Prismenfläche [2], die Skala justiert und das Messgerät optimal eingestellt werden, indem sich die Grenzlinie nach oben oder unten verschieben lässt.
Justierwert: 0 % (Brix)
- ▶ Bei Refraktometern ohne ATC: Gegebenenfalls die von +20 °C abweichende Raum- und Proben temperatur mit dem Messwert verrechnen (Siehe Tabelle am Ende der Anleitung, Punkt 14).
- ▶ Wiederholen Sie Schritt 4 (Reinigen)

Achtung!

Die Umgebungs- / Raumtemperatur und die Proben temperatur beeinflussen das Messergebnis des Refraktometers. Die Skalen sind auf eine Umgebungstemperatur von +20 °C ausgelegt! Sollen die Messungen bei einer anderen Temperatur als +20 °C durchgeführt werden, so müssen die Messergebnisse entsprechend korrigiert werden. Eine Korrektur-Tabelle finden Sie unter Punkt 14 Anhang.



8

7.2 Ergänzender Hinweis

Es ist wichtig, dass die Proben, welche gemessen werden, Durchschnittsproben darstellen. Bei Proben, die leicht verdampfen, soll der Messvorgang besonders schnell durchgeführt werden. Um ein genaues Messergebnis zu erzielen sollten die Proben, wenn möglich, dieselbe Temperatur wie das Messgerät haben.

7.3 Messvorgang

- ▶ Refraktometer mit trockenen Händen anfassen.
- ▶ Heben Sie die Prismenabdeckung [1] an und bringen Sie einige Tropfen der zu messenden Flüssigkeit mit Hilfe der mitgelieferten Pipette [8] auf die Prismenfläche [2] auf und schließen Sie die Prismenabdeckung [1] Verteilen Sie durch Andrücken der Prismenabdeckung [1] die Flüssigkeit gleichmäßig und eliminieren Sie eventuell vorhandene Luftblasen.
- ▶ Das Gerät waagrecht halten und ca. 30 Sekunden warten (zwecks optimaler Temperaturanpassung zwischen Probe und Gerät).
- ▶ Sehen Sie durch das Okular [4] auf die Messskala. Richten Sie das Refraktometer dabei mit seiner Prismenfläche [2] gegen eine möglichst helle Lichtquelle.
- ▶ Drehen Sie den Einstellring [5] am Okular [4] zum Scharfstellen der Optik.
- ▶ Je nach Konzentration verschiebt sich auf der Messskala die Grenzlinie. Diese Hell-Dunkel-Grenze zeigt auf der Skala direkt das Resultat an.
- ▶ Bei abweichender Temperatur von 20°C korrigieren Sie das gemessene Resultat mit dem entsprechenden Wert aus der Temperatur-Korrektur-Tabelle [13]
- ▶ Reinigen Sie die mitgelieferte Pipette [8] und das Refraktometer nach erfolgter Messung sorgfältig.

Achtung!

Entfernen Sie nach allen Messungen die Flüssigkeiten mit einem fusselfreien, saugfähigen Tuch von der Prismenfläche [2] und der Prismenabdeckung [1]. Reinigen Sie das Prisma und die Prismenabdeckung danach mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch sorgfältig und trocknen Sie beide Teile mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch ab. Vermeiden Sie hierbei das Reiben auf dem Prisma [2]



10

8. Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Refraktometer mit einem weichen, fusselfreien, mit Wasser oder nötigenfalls mit Alkohol angefeuchteten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven und scheuernden Reinigungsmittel. Niemals das Gerät in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten. Fassen Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen an. Das Messprisma [2] niemals mit hartem Werkzeug aus Kunststoff, Holz, Gummi, Metall, Glas o.ä. berühren. Harte Gegenstände können das relativ weiche Prismenglas schnell beschädigen, was zu Messfehlern führt. Das Refraktometer ist wartungsfrei. Die Reinigung ist jeweils direkt vor und nach jedem Gebrauch des Refraktometers durchzuführen um die Lebensdauer des Refraktometers zu maximieren und die Messergebnisse zu optimieren.

9. Aufbewahrung

Lagern Sie das Refraktometer in einer trockenen, nicht korrosionsgefährdeten Umgebung, möglichst zwischen 10 °C und 30 °C.

10. Service

Sollten Sie trotz Studiums dieser Bedienungsanleitung noch Fragen zur Inbetriebnahme oder Bedienung haben, oder sollte wider Erwarten ein Problem auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.

11. Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Die Entsorgung von Aufbewahrungsbox und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuführen.

12. Weitere Informationen

Die Abbildungen können geringfügig vom Produkt abweichen. Das Refraktometer möglichst nicht direktem Sonnenschein aussetzen! Das Refraktometer niemals mit Lösungsmitteln in Kontakt bringen.

13. Umrechnungstabelle Brix in Brechungsindex (nD)

Werte nach „ICUMSA“ International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, bei 20 °C und 589 nm Wellenlänge.

Brix %	Brechzahl nD		Brix %	Brechzahl nD		Brix %	Brechzahl nD		Brix %	Brechzahl nD	
	0	1		0	1		0	1		0	1
0	1,33299	1,33442	1	1,33299	1,33442	2	1,33299	1,33442	3	1,33299	1,33442
1	1,33299	1,33442	2	1,33299	1,33442	3	1,33299	1,33442	4	1,33299	1,33442
2	1,33299	1,33442	3	1,33299	1,33442	4	1,33299	1,33442	5	1,33299	1,33442
3	1,33299	1,33442	4	1,33299	1,33442	5	1,33299	1,33442	6	1,33299	1,33442
4	1,33299	1,33442	5	1,33299	1,33442	6	1,33299	1,33442	7	1,33299	1,33442
5	1,33299	1,33442	6	1,33299	1,33442	7	1,33299	1,33442	8	1,33299	1,33442
6	1,33299	1,33442	7	1,33299	1,33442	8	1,33299	1,33442	9	1,33299	1,33442
7	1,33299	1,33442	8	1,33299	1,33442	9	1,33299	1,33442	10	1,33299	1,33442
8	1,33299	1,33442	9	1,33299	1,33442	10	1,33299	1,33442	11	1,33299	1,33442
9	1,33299	1,33442	10	1,33299	1,33442	11	1,33299	1,33442	12	1,33299	1,33442
10	1,33299	1,33442	11	1,33299	1,33442	12	1,33299	1,33442	13	1,33299	1,33442
11	1,33299	1,33442	12	1,33299	1,33442	13	1,33299	1,33442	14	1,33299	1,33442
12	1,33299	1,33442	13	1,33299	1,33442	14	1,33299	1,33442	15	1,33299	1,33442
13	1,33299	1,33442	14	1,33299	1,33442	15	1,33299	1,33442	16	1,33299	1,33442
14	1,33299	1,33442	15	1,33299	1,33442	16	1,33299	1,33442	17	1,33299	1,33442
15	1,33299	1,33442	16	1,33299	1,33442	17	1,33299	1,33442	18	1,33299	1,33442
16	1,33299	1,33442	17	1,33299	1,33442	18	1,33299	1,33442	19	1,33299	1,33442
17	1,33299	1,33442	18	1,33299	1,33442	19	1,33299	1,33442	20	1,33299	1,33442
18	1,33299	1,33442	19	1,33299	1,33442	20	1,33299	1,33442	21	1,33299	1,33442
19	1,33299	1,33442	20	1,33299	1,33442	21	1,33299	1,33442	22	1,33299	1,33442
20	1,33299	1,33442	21	1,33299	1,33442	22	1,33299	1,33442	23	1,33299	1,33442
21	1,33299	1,33442	22	1,33299	1,33442	23	1,33299	1,33442	24	1,33299	1,33442
22	1,33299	1,33442	23	1,33299	1,33442	24	1,33299	1,33442	25	1,33299	1,33442
23	1,33299	1,33442	24	1,33299	1,33442	25	1,33299	1,33442	26	1,33299	1,33442
24	1,33299	1,33442	25	1,33299	1,33442	26	1,33299	1,33442	27	1,33299	1,33442
25	1,33299	1,33442	26	1,33299	1,33442	27	1,33299	1,33442	28	1,33299	1,33442
26	1,33299	1,33442	27	1,33299	1,33442	28	1,33299	1,33442	29	1,33299	1,33442
27	1,33299	1,33442	28	1,33299	1,33442	29	1,33299	1,33442	30	1,33299	1,33442
28	1,33299	1,33442	29	1,33299	1,33442	30	1,33299	1,33442			
29	1,33299	1,33442	30	1,33299	1,33442						
30	1,33299	1,33442									

14. Anhang

Tabelle 1: Internationale Temperatur Korrigier Tabelle für °Brix (‰ Zuckergradient) Das Ergebnis um die folgenden Werte korrigieren (Refraktometer muss korrekt kalibriert sein bei 20°C).

Temperatur °C	Ablesen % Brix		10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0
	0.0	5.0																
10.0	-0.53	-0.56	-0.59	-0.62	-0.65	-0.67	-0.69	-0.71	-0.72	-0.73	-0.74	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.74	-0.73
11.0	-0.49	-0.52	-0.54	-0.57	-0.59	-0.61	-0.63	-0.64	-0.65	-0.66	-0.67	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.67	-0.67	-0.66
12.0	-0.44	-0.47	-0.49	-0.51	-0.53	-0.55	-0.56	-0.57	-0.58	-0.59	-0.60	-0.61	-0.61	-0.61	-0.60	-0.60	-0.60	-0.59
13.0	-0.40	-0.41	-0.43	-0.45	-0.47	-0.48	-0.50	-0.51	-0.52	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.52	-0.52	-0.52	-0.51
14.0	-0.34	-0.36	-0.38	-0.39	-0.40	-0.42	-0.43	-0.44	-0.45	-0.45	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.45	-0.45	-0.44	-0.44
15.0	-0.29	-0.31	-0.32	-0.33	-0.34	-0.35	-0.36	-0.37	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
16.0	-0.24	-0.25	-0.26	-0.27	-0.28	-0.28	-0.29	-0.30	-0.30	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
17.0	-0.18	-0.19	-0.20	-0.20	-0.21	-0.22	-0.22	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
18.0	-0.12	-0.13	-0.14	-0.14	-0.14	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
19.0	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07
20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
22.0	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15
23.0	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22
24.0	0.27	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30
25.0	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.37
26.0	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46
27.0	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52
28.0	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60
29.0	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68
30.0	0.74	0.75	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75

10

11

12

13

14