

Manual de instrucciones para la instalación del soporte

KERN PCD-A03

Versión 1.0

08/2011

E



PCD-A03-IA-s-1110



KERN PCD-A03

Versión 1.0 08/2011

Manual de instrucciones para la instalación del soporte

Contenido de la entrega:



Nº de piezas	Componentes
1	Soporte
4	Tornillos
1	Guía del cable

Datos técnicos:

Altura del soporte	25 cm
Dimensiones	195 x 195 x 250 mm

Montaje:

Existen varias posibilidades de uso del soporte PCD-A03:


Posibilidad 1:

El soporte se coloca sobre una base junto a la balanza.

Posibilidad 2:


El soporte se instala junto a la plataforma de la balanza.

- ⇒ Quitar los 4 tornillos de la parte inferior del display y sacar la protección de plástico [1].

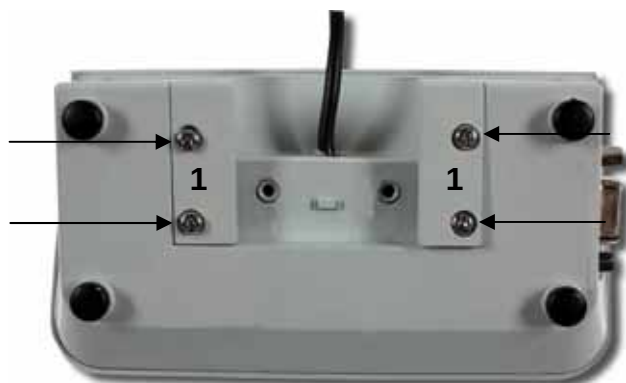


- ⇒ Conectar el display con el soporte uniendo ambos, como se indica en el dibujo.

Asegurarse que el cable pase por la apertura prevista a tal efecto [2].

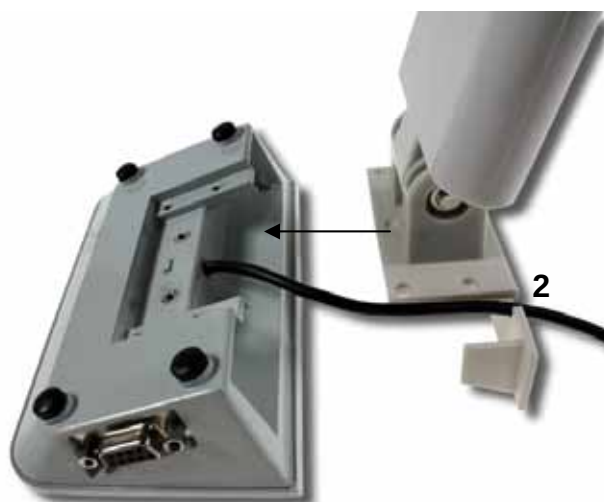


- ⇒ Apretar los 4 tornillos.

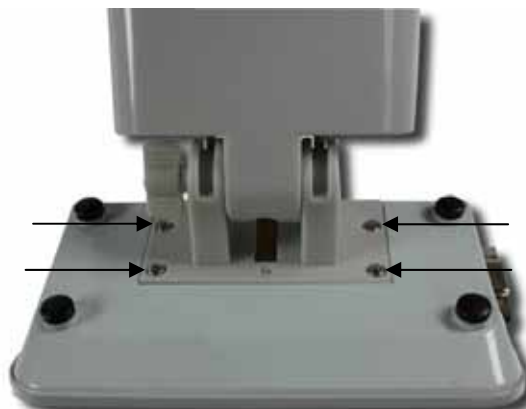

Posibilidad 1:

- ⇒ Colocar el cable detrás del soporte en las ranuras previstas y atornillar la guía del cable con 4 tornillos.

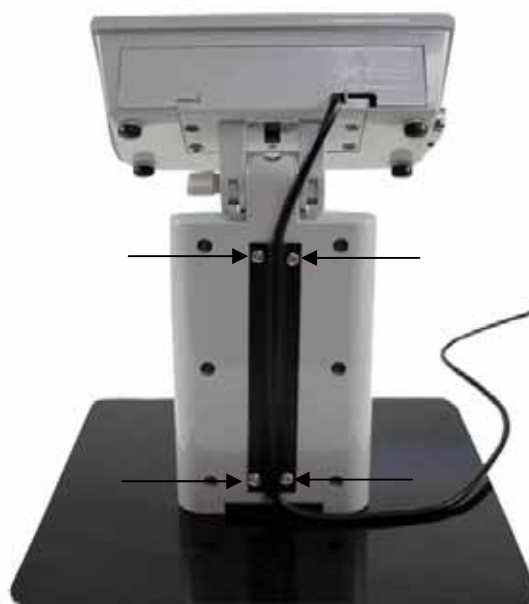

Posibilidad 2:

- ⇒ Ajustar 2 tornillos en la parte inferior de la base



- ⇒ Unir el soporte a la pletina situada en la plataforma introduciéndolo en ella.



⇒ Apretar los tornillos.



⇒ Colocar el cable detrás del soporte en las ranuras previstas y atornillar la guía del cable con 4 tornillos.



