

Produkt-Information „DISPOSABLE MEDICAL MASK“

Best.-Nr. 2251877

Best.-Nr. 2268666

Funktionsbeschreibung


Das Produkt besteht aus einer 3-Lagen-Konstruktion, um die Filterung von $\geq 95\%$ der Bakterien zu unterstützen und gleichzeitig leicht und komfortabel zu bleiben. Das Produkt ist ein Einwegartikel und nicht steril.

Warnhinweise

1. Vermeiden Sie es, die Innenseite der Maske zu berühren.
2. Prüfen Sie den Zustand der Maske, bei sichtbarer Beschädigung ist die Maske zu entsorgen.
3. Die Maske ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt, lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung.
4. Die Maske ist nicht zur Verwendung in einer sterilen chirurgischen Operationsumgebung bestimmt.



Gebrauchsanweisung

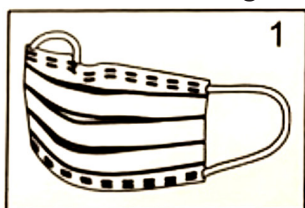

1. Halten Sie Ihre Hände trocken und falten Sie die Maske auf, halten Sie sie fest und halten Sie den Nasenclip nach oben. Legen Sie die Schlaufen um die Ohren.
2. Passen Sie die Gesichtsmaske über der Nase und unter dem Kinn an, drücken Sie auf den Nasenclip, damit die Maske gut an der Nase befestigt ist.
3. Achten Sie auf festen Sitz und Komfort.

Modell	A002
Produkt	DISPOSABLE MEDICAL MASK
Bauart	3-Lagen-Konstruktion mit Ohrschlaufen
Größe	175 mm x 95 mm
Farbe	Blau
Steril	Nein
Material	51% PP-Vliesstoff + 25% schmelzgeblasener Vliesstoff + 9% Nasenclip + 15% Ohrschlaufe
Latexfrei	Ja
Standard	YY/T0969-2013, EN14683:2019 Type I
Aufbewahrung	Trockene Umgebung (<80% Luftfeuchte), gute Belüftungsbedingungen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt
Herstellungsdatum (PRD DATE)	Siehe Markierung auf dem Karton
Verfallsdatum (EXP DATE)	Siehe Markierung auf dem Karton
LOT-Nummer (LOT NO)	Siehe Markierung auf dem Karton



Hersteller: AAB(CHINA)CO.,LTD.

Adresse: AAB Industrial Park, Honglai Town, Nan'an City, 362000, Fujian Province, China

Tel.: +86-595-22980980

Email: sales@aab.com

http: www.aab.com



Name: Conrad Electronic SE

Adresse: Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Germany

Tel.: +49(0)9622/30-0

Email: tkb@conrad.de

Product information „DISPOSABLE MEDICAL MASK“

Item No. 2251877

Item No. 2268666

How it works


The product is made of 3-ply construction to help filtering $\geq 95\%$ of bacteria while remaining light and comfortable. The product is disposable and non-sterile.

Warnings

1. Avoid any touching the the inner side of the mask.
2. Check condition of mask, if visibly damaged, discard mask.
3. Mask is for single use only, read instruction before use.
4. Mask should not be used in a sterile surgical operation environment.



Method of use

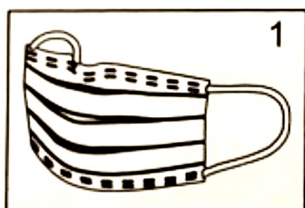

1. Keep your hand dry and unfold the mask, hold it and keep the nose clip to the upside. Put loops around ears.
2. Adjust the face mask over nose and under chin, press the nose clip to make it well fixed to your nose.
3. Check for snug fit and comfort.

Model	A002
Product	DISPOSABLE MEDICAL MASK
Style	3 ply with ear loops
Size	175 mm x 95 mm
Color	Blue
Sterile	No
Materials	51% PP non woven + 25% melt blown non woven + 9% nose clip +15% ear loop
Latex free	Yes
Standard	YY/T0969-2013, EN14683:2019 Type I
Storage	Dry environment (<80% humidity), good ventilation conditions, away from direct sunlight
Manufacturing date (PRD DATE)	See marking on box
Expiration date (EXP DATE)	See marking on box
LOT number (LOT NO)	See marking on box



Manufacturer: AAB(CHINA)CO.,LTD.

Address: AAB Industrial Park, Honglai Town, Nan'an City, 362000, Fujian Province, China

Tel.: +86-595-22980980

Email: sales@aab.com

http: www.aab.com



Name: Conrad Electronic SE

Address: Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Germany

Tel.: +49(0)9622/30-0

Email: tkb@conrad.de

Informazioni sul prodotto „DISPOSABLE MEDICAL MASK“

Numero d'ordine 2251877

Numero d'ordine 2268666

Descrizione funzionale


Il prodotto consiste in una costruzione a 3 strati per aiutare a filtrare $\geq 95\%$ dei batteri pur rimanendo leggero e confortevole. Il prodotto è monouso e non sterile.

Avvertenze

1. Evitare di toccare l'interno della maschera.
2. Controllare lo stato della maschera; in caso di danni visibili, smaltire la maschera.
3. La maschera è destinata al solo uso singolo, leggere il manuale d'uso prima dell'uso.
4. La maschera non è destinata all'uso in un ambiente chirurgico sterile.



Istruzioni per l'uso

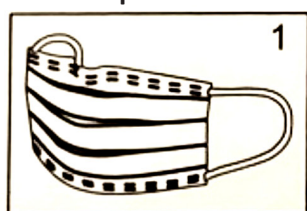

1. Tenere le mani asciutte e dispiegare la maschera, tenerla saldamente in posizione e stringere il fermaglio per il naso. Mettetevi gli anelli intorno alle orecchie.
2. Inserire la maschera facciale sopra il naso e sotto il mento, premere il ferma nasale per fissare la maschera al naso
3. Assicurarsi che sia ben aderente e confortevole.

Modello	A002
Prodotto	DISPOSABLE MEDICAL MASK
Costruzione	3 strati con occhielli per le orecchie
Dimensioni	175 mm x 95 mm
Colore	blu
Sterile	No
Materiale	51% PP non-tessuto + 25% non-tessuto fuso soffiato + 9% nasello a clip + 15% di orecchie ad anello
Norma	YY/T0969-2013, EN14683:2019 Tipo I
Conservazione	Ambiente asciutto (<80% di umidità), buone condizioni di ventilazione, protetto dalla luce diretta del sole
Data di fabbricazione (PRD DATE)	Vedere il marchio sulla scatola
Data di scadenza (EXP DATE)	Vedere il marchio sulla scatola
Numero di lotto (LOT NO)	Vedere il marchio sulla scatola



Produttore: AAB(CHINA)CO.,LTD.

Indirizzo: AAB Industrial Park, Honglai Town, Nan'an City, 362000, Fujian Province, China

Tel.: +86-595-22980980

Email: sales@aab.com

http: www.aab.com



Nome: Conrad Electronic SE

Indirizzo: Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Germany

Tel.: +49(0)9622/30-0

Email: tkb@conrad.de

Información del producto „DISPOSABLE MEDICAL MASK“

Número de pedido 2251877

Número de pedido 2268666

Descripción funcional


El producto consiste en una construcción de 3 capas para ayudar a filtrar $\geq 95\%$ de las bacterias mientras se mantiene ligero y cómodo. El producto es desechable y no estéril.

Advertencias

1. Evitar tocar el interior de la máscara.
2. Compruebe el estado de la máscara; si hay daños visibles, deshágase de la máscara.
3. La máscara está destinada a un solo uso, lea la guía del usuario antes de usarla.
4. La máscara no está destinada a ser utilizada en un entorno quirúrgico estéril.



Instrucciones de uso

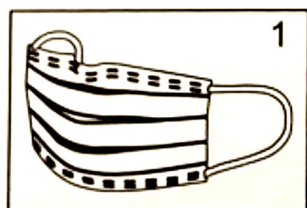

1. Mantén las manos secas y despliega la máscara, sujétala firmemente y sujeta el clip de la nariz. Ponga los lazos alrededor de sus orejas.
2. Colocar la máscara facial sobre la nariz y debajo del mentón, presionar el clip de la nariz para fijar la máscara a la nariz.
3. Asegúrate de que se ajuste bien y sea cómodo.

Modelo	A002
Producto	DISPOSABLE MEDICAL MASK
Construcción	Construcción de 3 capas con bucles de oreja
Tamaño	175 mm x 95 mm
Color	Azul
Estéril	No
Material	51% PP no tejido + 25% no tejido fundido + 9% clip de nariz
Sin látex	Sí
Norma	YY/T0969-2013, EN14683:2019 Type I
Almacenamiento	Ambiente seco (<80% de humedad), buenas condiciones de ventilación, protegido de la luz solar directa
Fecha de fabricación (PRD DATE)	Ver marca en el recuadro
Fecha de caducidad (EXP DATE)	Ver marca en el recuadro
LOT número (LOT NO)	Ver marca en el recuadro



Fabricante: AAB(CHINA)CO.,LTD.

Dirección: AAB Industrial Park, Honglai Town, Nan'an City, 362000, Fujian Province, China

Tel.: +86-595-22980980

Email: sales@aab.com

http: www.aab.com



Nombre: Conrad Electronic SE

Dirección: Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Germany

Tel.: +49(0)9622/30-0

Email: tkb@conrad.de