

INNOMARK alpha

DE

ATEMALKOHOLTESTER

Bedienungsanleitung

EN

BREATHALYZER

Operating Manual

FR

ALCOTEST

Notice d'utilisation

NL

ALKOHOL TESTER

Gebruiksaanwijzing

IT

TEST ALCOLICO

Istruzioni d'uso

ES

ALCOHOLÍMETRO

Manual de instrucciones

ZUR KALIBRIERUNG

Jeder Alkoholtester, der bei ACE Instruments gekauft wurde, kann auch von ACE Instruments kalibriert werden. Selbstverständlich kalibrieren wir auch Geräte, die woanders gekauft wurden, sofern diese Geräte baugleich zu den von ACE Instruments vertriebenen Geräten sind.

Sie sehen das Fälligkeitsdatum der nächsten Kalibrierung am Kalibrier-Aufkleber auf Ihrem Alkoholtester. Wenn der Aufkleber fehlt, dann sollte die Kalibrierung 6 Monate nach dem Kauf-datum erfolgen:
z.B. Kaufdatum: 13.05. = nächste Kalibrierung am 13.11. und danach am 13.05. des folgenden Jahres.

Sie können das Gerät zum Kalibrieren an die unter www.alkomat.net angegebene Service-Adresse senden.

WARUM IST EINE KALIBRIERUNG NOTWENDIG?

Die Kalibrierung muss nicht zwingend vorgenommen werden, die Genauigkeit des integrierten Sensors nimmt jedoch ohne Kalibrierung stetig ab und zusätzlich erlischt die Garantie, wenn die Kalibrier-Intervalle nicht eingehalten werden.

WELCHE FAKTOREN DIE MESSGENAUIGKEIT BEEINFLUSSEN

- Je öfter das Alkoholtestgerät verwendet wird, desto stärker verschiebt sich der Nullpunkt.
- Bei hohen Alkoholkonzentrationen verschiebt sich der Nullpunkt verstärkt.
- Bei wenig bis gar nicht genutzten Geräten nimmt die Empfindlichkeit des Sensors ebenso ab.

ACE Instruments empfiehlt, mindestens ein Mal (1x) pro Woche einen Test mit dem Alkoholtester durchzuführen, unabhängig davon, ob man Alkohol getrunken hat. Zum Erhalt der Messgenauigkeit sollte das Gerät außerdem regelmäßig kalibriert werden.

BITTE BEACHTEN SIE AUCH DIE VERSCHIEDENEN EINFLUSSFAKTOREN AUF DAS MESSERGEBNIS

- Alkoholmenge
- Zeitraum des Alkoholkonsums
- Geschlecht
- Alter
- Gewicht
- Körpergröße
- Trinkgewohnheit
- Gesundheitlicher Zustand
- Vitalität der Leber
- Größe der Lunge
- Aufnahme von Nahrung während des Alkoholkonsums
- Einfluss von Medikamenten

**WICHTIGE HINWEISE ZUR TESTDURCHFÜHRUNG
UND ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG**

Nach dem letzten Schluck Alkohol sollte man mindestens 15 Minuten warten, da sich noch Restalkohol in der Mundhöhle befinden kann, der das Messergebnis beeinflusst. Rauchen sollte vor einem Test ebenso vermieden werden, da Zigarettenrauch dem Sensor schadet.

Für jeden Test sollte man ein neues Mundstück verwenden – nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern auch, weil ein bereits benutztes Mundstück das nächste Messergebnis beeinflussen kann. Im Mundstück könnte sich Restalkohol befinden, der bei einem erneuten Gebrauch desselben Mundstücks das neue Testergebnis beeinflusst (damit würde z.B. bei einer nüchternen Person eventuell eine Alkoholisierung angezeigt werden).

Wenn am Display „Flo“ angezeigt wird, dann war die abgegebene Atemprobe nicht ausreichend oder sie wurde zu früh beendet. Pusten Sie bei Ihrer Atemprobe zirka 4 Sekunden konstant und am besten so, als ob Sie ohne Ton pfeifen würden. Die Atemprobe ist beendet, sobald ein zweifacher Piepton zu hören ist.

Wenn dieselbe Person 2 Tests hintereinander ausführt, dann sollte sie zwischen den beiden Tests mindestens 3 Minuten warten, da bei zu kurzer Wartezeit zu unterschiedliche Messwerte angezeigt werden können. Die aus der Lunge ausgeatmete Luft ist nach einem Test nicht mehr mit dem gleichen Alkoholgehalt angereichert wie beim kurz davor durchgeführten Test. Darum wird ein sofortiger zweiter Test einen geringeren Messwert anzeigen.

Alle mit diesem Alkoholtester ermittelten Messwerte sind stets nur ein Richtwert und nicht rechtsverbindlich.

**WARUM DIE GEFÜHLTE ALKOHOLISIERUNG
UND DAS MESSERGEBNIS OFT NICHT
ÜBEREINSTIMMEN (KÖNNEN)**

Bei einem Alkoholtest gibt es sehr viele verschiedene Faktoren, die die Höhe des Messwertes beeinflussen. Dazu zählen neben dem Geschlecht, Alter, der Körpergröße und dem Körpergewicht auch der Körperfettanteil sowie die Höhe des Anteils an Körperflüssigkeit.

Darüber hinaus sind auch der allgemeine physische und psychische Zustand bzw. die jeweilige Tagesverfassung zu berücksichtigen. Außerdem können die Art der Mahlzeiten vor dem Test (Art des Inhalts und Füllstand des Magens) und die Einnahme von Medikamenten den Messwert beeinflussen.

Zu den weiteren Einfluss-Faktoren gehören natürlich die Getränkeart (Prozentanteil des Alkoholgehaltes im Getränk sowie dessen Kohlensäure- und Zuckergehalt), die Trinkgeschwindigkeit und die von der Testperson abhängige, individuelle Dauer in Bezug auf den Alkohol-Aufbau bzw. den Alkohol-Abbau im Körper.

Manche Menschen haben schnell einen erhöhten Alkoholgehalt im Blut, bei anderen dauert es länger bis eine Alkoholisierung feststellbar ist. Etwa 40-50% des konsumierten Alkohols befinden sich innerhalb von 15 Minuten im Körper, nach 30 Minuten sind es 65% und nach spätestens 70 Minuten ist der zuvor konsumierte Alkohol zu 100% im Körper aufgenommen. Zu beachten ist dabei aber auch, dass manche Menschen – teils genetisch bedingt – den Alkoholgehalt im Blut schnell wieder abbauen, wogegen andere auch nach einem längeren Zeitraum noch einen erhöhten Alkoholgehalt im Blut aufweisen.

BREATHALYZER

EN – Important Notes

IMPORTANT NOTES ON THE CALIBRATION

Each breathalyzer which you buy from ACE Instruments can also be calibrated by ACE Instruments. Of course, we also calibrate devices which were bought from other contractors, as long as these devices are identical in construction to the devices sold by ACE Instruments.

You can see the due date of the next calibration on the calibration sticker placed on your breathalyzer. If the sticker is missing, the calibration is to be done 6 months after the purchase date: e.g. purchase date: 13.05. = next calibration on the 13th. and the next on the 13.05. of the following year.

For a calibration service you can send the device to the service address specified at www.alkomat.net.

WHY IS A CALIBRATION NECESSARY?

The calibration is not mandatory, but the accuracy of the sensor installed in the breathalyzer will decrease steadily without a calibration and additionally guarantee expires, if you don't pay attention to the calibration ranges.

WHICH FACTORS INFLUENCE THE MEASUREMENT ACCURACY

- The more often the device is used the more the zero point is influenced.
- The higher the alcohol concentration is, the more the zero point is relocated.
- Devices which are used rarely have a decreased sensibility, too.

ACE Instruments recommends using the breathalyzer at least once (1x) a week independently of having drunken alcohol or not. To maintain the measurement accuracy, the breathalyzer should also be calibrated periodically.

PLEASE ALSO BE AWARE OF THE SEVERAL FACTORS OF INFLUENCE ON THE MEASURING RESULT

- Alcohol amount
- Period of the consumption of alcohol
- Gender
- Age
- Weight
- Height
- Drinking habits
- Health state
- Vitality of the liver
- Size of the lung
- Admission of food during the consumption of alcohol
- Influence of medicine

INNOMARK alpha

BREATHALYZER

EN – Important Notes

IMPORTANT NOTES ON TEST EXECUTION AND SELF-ASSESSMENT

After the last sip of alcohol you should wait at least 15 minutes, as there may still be residual alcohol in the oral cavity, which influences the measurement result. Also smoking should be avoided before a test, as cigarette smoke harms the sensor.

For each test you should use a new mouthpiece – not only for hygienic reasons, but also because an already used mouthpiece can influence the next measurement result. The mouthpiece could contain residual alcohol, which would affect the new test result when the same mouthpiece is used again (this for example could show an alcoholization of a person who hasn't drunken any alcohol).

If „Flo“ appears on the display, the given breath sample was insufficient or ended too soon. Blow into the mouthpiece for about 4 seconds constantly (without a break) – preferably as if you were whistling without a sound.

If the same person performs 2 tests consecutively, then wait at least 3 minutes between the two tests, as a too short waiting time may cause different measurement results. The air exhaled from the lungs is, after a test, no longer enriched with the same alcohol content as in the previous test. Therefore, an immediate second test will indicate a lower test result.

All measured values determined with this breathalyzer are always indicative and not legally binding.

WHY THE ESTIMATED ALCOHOLIZATION AND THE MEASUREMENT RESULT IN MOST CASES CANNOT MATCH

An alcohol test is affected by a lot of different factors which also affect the test result. Beside the gender, age, body size and body weight, also the body fat percentage and the amount of body fluid have a big influence.

In addition, the general physical and mental state or the current daily constitution have to be taken into consideration. Furthermore, the meals eaten before a breath test (type of content and level of the stomach) and the intake of medication may influence the measurement.

Other influencing factors are, of course, the type of drink (percentage of alcohol content in the beverage and its carbon dioxide and sugar content), the drinking rate and the individual subject's duration of alcohol build-up or degradation in the body.

Some people quickly have a high alcohol content in the blood, with other people it takes longer until an alcoholization is detected. About 40-50% of the consumed alcohol is in the body within 15 minutes, after 30 minutes it is 65% and after 70 minutes the previously consumed alcohol is 100% absorbed in the body. However, it should also be noted that some people – partly due to genetic factors – quickly reduce the alcohol content in the blood, whereas others still have an increased alcohol content in the blood after a longer period of time.

AUTORENHAFTUNG

Die hier enthaltenen Informationen wurden von der Handels- und Entwicklungs GmbH (ACE Instruments) gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt. Der Ersteller kann jedoch keine Haftung für die wie auch immer geartete Nutzung und daraus erwachsenden Konsequenzen übernehmen. Der Ersteller ist nicht für Kosten oder Ausgaben für Schäden haftbar, die aus der Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen. Änderungen an diesen Informationen sind ohne Ankündigung vorbehalten.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf unseres Alkoholtesters INNO-MARK alpha! Er ist ein leicht bedienbares Alkoholmessgerät mit elektrochemischem Sensor. Das Gerät misst die Alkoholkonzentration in der Atemluft und berechnet daraus die Blutalkoholkonzentration. Dieses Gerät liefert Testergebnisse mit einer Messtoleranz von +/- 0,05‰ (Promille) beim Referenzwert von 1,00 Promille und 25°C Umgebungstemperatur. Die Messeinheit ‰ (Promille bzw. g/L) ist die Grundeinstellung in der EU.

Die in Promille ermittelten Messergebnisse werden als 3-stelliger Zahlenwert mit 2 Dezimalstellen angezeigt und sind 1:1 interpretierbar (z.B. das Display zeigt den Wert 0,36 = 0,36 Promille).

Der im Gerät integrierte Sensor kann kalibriert werden. Zur Erhaltung der Messgenauigkeit dieses Gerätes und der Sensor-Garantie empfehlen wir eine regelmäßige Kalibrierung. Sie können das Gerät zum Kalibrieren an die unter www.alkomat.net angegebene Service-Adresse senden.

Das Gerät darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet werden. Alle durch dieses Alkoholtestgerät ermittelten Messwerte dienen stets nur als Anhaltspunkt und sind nicht rechtsverbindlich. Atemtests sollten unter Verwendung von aufsteckbaren Mundstücken durchgeführt werden (pro Test sollte aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von verfälschten Messwerten ein neues Mundstück verwendet werden).

HINWEIS ZU LÄNDERSPEZIFISCHEN MESSEINHEITEN

Kunden in UK erhalten den Alkoholtester mit der Grundeinstellung mg/L, Kunden in den USA mit der Grundeinstellung % BAC. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf über die aktuellen länderspezifischen Alkoholgrenzen, welche zum Beispiel auf der Website des Verkehrsministeriums oder von Automobilclubs erhältlich sind.

LIEFERUMFANG

- 1 Atemalkoholtester INNOMARK alpha mit elektrochemischem Sensor
- 5 Mundstücke
- 1 Kurzanleitung
- 1 Bedienungsanleitung

Hinweis: Zur Benutzung des Gerätes sind zwei (2) AA Alkaline Batterien nötig, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

BEZEICHNUNG DER EINZELNEN BESTANDTEILE



1. Öffnung zum Anbringen der Mundstücke
2. Luftauslass (immer freihalten)
3. Digitales LC Display
4. Linker Bedientaster (zum Starten eines manuellen Tests, zum Navigieren in den Testergebnissen)
5. Start-Knopf (Einschalten/Ausschalten, Abruf der gesamten Testanzahl, Anzeige des letzten Testergebnisses)
6. Rechter Bedientaster (zum Navigieren in den Testergebnissen)
7. Batterieabdeckung (an der Geräte-Rückseite)

SO ERHALTEN SIE EIN MÖGLICHTST GENAUES ERGEBNIS

- A) Warten Sie nach dem letzten Schluck Alkohol mindestens 15 Minuten bis zum Alkoholtest. Essen, trinken und rauchen Sie während dieser Zeit nicht.
- B) Öffnen Sie das Gehäuse nicht.

- C) Bewahren Sie den Alkoholtester nicht an einem kalten oder heißen oder feuchten oder schlecht belüfteten Platz auf.
- D) Bewahren Sie den Alkoholtester außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- E) Führen Sie nach längerer Aufbewahrungszeit drei „Einlauftests“ durch, bevor Sie den eigentlichen Alkoholtest durchführen.
- F) Lassen Sie den Alkoholtester nicht fallen.
- G) Ersetzen Sie die Batterie, wenn ihre Leistung schwach ist. Verringerte Batteriekapazität führt zu falschen Testergebnissen.
- H) Führen Sie keinen Test in lauten (Schallwellen stören den Sensor), zugigen oder schlecht belüfteten Plätzen durch.
- I) Nach einem Testergebnis von 1,00 Promille oder höher benötigt der Sensor eine längere Erholungszeit. Warten Sie in diesem Fall mindestens drei Minuten bis zum nächsten Test.
- J) Führen Sie keinen Test durch in sehr kalter, sehr heißer oder unbelüfteter, rauchiger Umgebung.
- K) Bewahren Sie den Alkoholtester so auf, dass das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten verhindert wird.
- L) Pusten Sie nicht zu stark in das Gerät, dies schadet dem Sensor (vor allem, wenn durch das Pusten viel Speichel in das Gerät gelangt).

VORBEREITUNG FÜR DEN TEST

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel (an der Rückseite des Gerätes) nach unten und legen Sie 2 AA-Batterien (Alkaline, 1,5 V) in das Batteriefach ein. Beachten Sie beim Einlegen und beim späteren Austausch von alten gegen neue Batterien die Polarität (+/-) der Batterien.
2. Stecken Sie ein Mundstück auf die seitliche Öffnung zum Anbringen der Mundstücke (= die Öffnung an der linken Seite der Gerätefront). Vergewissern Sie sich, dass das Mundstück fest sitzt. Verwenden Sie für jede Testperson ein neues Mundstück (aus hygienischen Gründen und zum Erhalt der Messgenauigkeit, da ein benutztes Mundstück im Inneren Restalkohol enthalten könnte).

TESTDURCHFÜHRUNG

Mit dem Alkoholtester INNOMARK alpha können Sie automatische und manuelle Tests durchführen.

Automatischer Test: Der einfachste Weg, eine tiefe Lungenprobe zu entnehmen. Das Strömungssystem des INNOMARK alpha überwacht den Atem einer Person und entnimmt automatisch eine Probe am Ende des Atemflusses.

Manueller Test: Wird normalerweise nur verwendet, wenn die Testperson nicht in der Lage ist, einen automatischen Test durchzuführen.

1. Für einen **automatischen Test** drücken Sie den Start-Knopf auf der Vorderseite des Gerätes für 2 Sekunden, dann hören Sie einen Signalton, zusätzlich startet ein Countdown und „WAIT“ blinkt in der linken unteren Ecke.
2. Warten Sie, bis Sie am Ende des Countdowns einen Piepton hören und dann „rdY“ auf dem Display sehen.
3. Sobald Sie „rdY“ auf dem Display sehen, beginnen Sie, 4 Sekunden lang gleichmäßig in das Mundstück zu pusten, das Gerät piept durchgehend während des Tests. Tipp: Pusten Sie so, als würden Sie ohne einen Ton pfeifen (aber ohne Pause).
4. Wenn der Piepton aufhört und Sie einen doppelten „Klack“-Ton hören, dann ist der Test erfolgreich beendet. Wenn die Atemprobe nicht ausreichend war, hören Sie in Kürze 2 Pieptöne und sehen „C---“ und dann „FL0“ auf dem Display. Das bedeutet, dass die Atemprobe nicht ausreichend war, also drücken Sie die Starttaste und starten Sie bitte einen neuen Test.
5. Nach einem erfolgreichen Test analysiert das Gerät die Atemprobe, Sie sehen „C---“. (= „Berechnen“) auf der Anzeige. Nach einigen Sekunden hören Sie 2 Pieptöne und das Testergebnis wird (mit 3 Ziffern und 2 Dezimalstellen) in ‰ (g/L) angezeigt. Um es in ‰ BAC oder in mg/L anzuzeigen, drücken Sie die linke Taste – beim dritten Drücken sehen Sie das Ergebnis wieder in der Einheit ‰ (Promille = g/L).

1. Für einen **manuellen Test** starten Sie das Gerät wie oben beschrieben.
2. Sobald Sie „rdY“ auf dem Display sehen, drücken Sie die linke Taste.
3. Der manuelle Testmodus startet und zeigt „C---“ an, zusätzlich hören Sie einen kontinuierlichen Piepton.
4. Atme tief durch und blas mäßig, mit konstanter Geschwindigkeit und Druck in Richtung Mundstück. Blasen Sie, bis Sie einen doppelten „Klack“-Ton hören, dann ist der Test erfolgreich beendet.
5. Das Gerät analysiert die Atemprobe, Sie sehen „C---“. (= „Berechnen“) auf der Anzeige. Nach einigen Sekunden hören Sie 2 Pieptöne und das Testergebnis wird (mit 3 Ziffern und 2 Dezimalstellen) in ‰ (g/L) angezeigt. Um es in ‰ BAC oder in mg/L anzuzeigen, drücken Sie die linke Taste – beim dritten Drücken sehen Sie das Ergebnis wieder in der Einheit ‰ (Promille = g/L).

Hinweis: Es wird empfohlen, zwischen zwei Tests mindestens 5 Minuten zu warten, um eine Überlastung des Sensors zu vermeiden und die Qualität des Sensors so lange wie möglich zu erhalten. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät nach 30 Sekunden automatisch aus, zusätzlich hören Sie einen Piepton. Wenn Sie einen neuen Test durchführen möchten, so drücken Sie bitte den Start-Knopf. Sie können das Gerät manuell ausschalten, wenn Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten.

TESTAUFZEICHNUNGSSPEICHERMODUS**Abruf der kumulierten Prüfwahl**

Drücken Sie während des Countdowns kurz den Start-Knopf (1x), um den kumulierten Testzähler anzuzeigen = die Anzahl aller bisher durchgeführten Tests. Diese Anzahl hilft Ihnen bei der Überprüfung, ob ein Kalibrier-Service nötig ist (siehe Kapitel „Kalibrierung“ für weitere Details). Sie können diesen Zähler zurücksetzen (was nicht empfohlen wird), indem Sie die linke Taste drücken, bis der Zähler auf Null zurückgesetzt wird.

Abruf früherer Testergebnisse (bis zu 50 Datensätze)

Drücken Sie während des Countdowns kurz den Start-Knopf (2x), um die neuesten Testergebnisse (beginnend mit dem letzten Test) anzuzeigen. Zuerst sehen Sie die Testnummer und dann das mit dieser Nummer gespeicherte Testergebnis. Wenn Sie den linken Knopf drücken, sehen Sie die nächste gespeicherte Testnummer und anschließend das Testergebnis. Wenn Sie die gespeicherten Ergebnisse in umgekehrter Reihenfolge sehen möchten, drücken Sie die rechte Taste. Wenn Sie den Testaufnahmehodus verlassen und zum Countdown zurückkehren möchten, drücken Sie kurz (1x) den Start-Knopf.

ACE INSTRUMENTS EMPFIEHLT

- Benutzen Sie für jede testende Person immer ein neues Mundstück! ACE Instruments übernimmt keine Verantwortung für jegliche Schäden, die durch den Gebrauch eines Mundstückes durch mehrere Personen und für mehrere Tests entstehen können.
- Benützen Sie stets die hygienisch und einzeln verpackten ACE Instruments Mundstücke. Das Testgerät kommt bei jedem Test innen und außen mit menschlichen Ausscheidungen in Kontakt (Schweiß, Speichel, Blut etc.).
- Benützen Sie Handschuhe, wenn Sie die für einen Test verwendeten Mundstücke vom Gerät abnehmen, vor allem dann, wenn fremde Personen den Test durchgeführt haben. ACE Technik (www.ace-technik.de) führt in seinem Sortiment dafür geeignete Handschuhe.

WICHTIGE HINWEISE

- Wenn Sie etwas gegessen, Alkohol getrunken oder eine Zigarette geraucht haben, so warten Sie mindestens 15 Minuten bevor Sie mit der Messung beginnen.
- Dieser Alkoholtester ist ein hochwertiges und empfindliches Messgerät. Um die Messgenauigkeit des Sensors aufrechtzuerhalten, sollte das Gerät regelmäßig benutzt werden. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so kann der Sensor austrocknen. Wir empfehlen, den Alkoholtester mindestens 2x pro Monat für Alkoholtests zu verwenden (auch wenn Sie keinen Alkohol getrunken haben).
- Bei Messwerten unter 0,10‰ (ODER 0,01% BAC ODER 0,05mg/L – je nach Einstellung) wird das Testergebnis als 0,00 (‰ ODER mg/L ODER % BAC – je nach Einstellung) angezeigt. Dies geschieht deshalb, weil bei einem geringen Alkohollevel andere Substanzen in der Atemluft enthalten sein können, welche das Ergebnis der Atemprobe beeinflussen.
- Durch Änderungen am Produkt können sich die beschriebenen Abläufe ändern. Dies kann ohne Vorankündigung und Anpassung der Bedienungsanleitung geschehen und ist kein Grund zur Reklamation, Retoure oder Preisminderung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, Abweichungen zwischen der Bedienungsanleitung und der tatsächlichen Bedienung dieses Atemalkoholtesters zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

NUR DIE VERWENDUNG VON ORIGINAL ACE INSTRUMENTS MUNDSTÜCKEN

- stellt die Genauigkeit der Messergebnisse sicher
- gewährleistet 100% Hygienesicherheit
- sichert Ihnen die volle Gerätegarantie

ACE INSTRUMENTS WARNT

Selbst wenn das Gerät Alkoholisierung im „sicheren“ Bereich anzeigt, ist dies nach dem Genuss von Alkohol kein Freibrief für das Lenken eines Fahrzeuges oder eine andere Tätigkeit, die unter Alkoholeinfluss nicht ausgeführt werden sollte.

WARNMELDUNGEN

ANZEIGE	BEDEUTUNG	AKTION
H	Dieser Buchstabe bedeutet, dass das Gerät eine hohe Alkoholkonzentration außerhalb des Bereichs (= über 4,00‰ (g/L) / 0,400% BAC / 2,0mg/L) erkannt hat.	Es sind keine Maßnahmen erforderlich.
FLo	Die eingepustete Atemluft war nicht ausreichend oder zu ungleichmäßig, um die Atemprobe zu analysieren.	Bitte führen Sie einen neuen Test durch. Drücken Sie die Starttaste, der Countdown beginnt erneut. Beginnen Sie zu atmen, sobald "rdY" auf dem Display erscheint.
Snr	Das bedeutet, dass der Sensor nicht bereit für eine Atemprobe ist. Dies geschieht, wenn nach dem letzten Test eine hohe Konzentration an Alkoholresten oder Schadstoffen am Sensor festgestellt wird.	Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie es erneut starten.
rPt	Das Gerät konnte den Test nicht erfolgreich beenden.	Bitte drücken Sie den Start-Knopf und führen Sie einen neuen Test durch.

Out	Die Prüfung kann nicht durchgeführt werden, da das Gerät außerhalb der Betriebstemperatur eingeschaltet ist.	Wiederholen Sie den Test, nachdem das Gerät eine Temperatur innerhalb des Betriebsbereichs erreicht hat (10°C bis 40°C).
Lo	Der Test kann nicht durchgeführt werden, da die Batterie schwach ist.	Ersetzen Sie die Batterien durch 2 neue AA-Alkalibatterien.

KALIBRIERUNG

ACE Instruments empfiehlt die Kalibrierung des im Gerät integrierten Sensors zirka alle 12 Monate oder nach 300 Tests (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt). Die Kalibrierung muss nicht zwingend vorgenommen werden, die Genauigkeit des integrierten Sensors nimmt jedoch ohne Kalibrierung stetig ab und zusätzlich erlischt die Garantie für den Sensor. Sie können das Gerät zum Kalibrieren an die unter www.alkomat.net angegebene Service-Adresse senden.

Wir empfehlen die Einsendung als Paket, damit im Fall der Unauffindbarkeit der Abliefernachweis bzw. Nachforschungsauftrag möglich ist.

HINWEISE ZU DEN BATTERIEN

Das Gerät, auf das sich diese Bedienungsanleitung bezieht, enthält im Auslieferungszustand 2 AA Alkaline-Batterien. Diese Batterien sind nicht dazu bestimmt, wieder aufgeladen zu werden. Ebenso ist die Verwendung einer wiederaufladbaren Batterie im Gerät zu unterlassen, da sonst Schaden am Gerät entsteht.

Ist eine Batterie leer, so darf sie nicht in den Hausmüll geworfen werden. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterien/Akkus im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter und kleben Sie bei Lithium-Batterien die Pole ab.


BATTERIETAUSCH

Zum Batterietausch schieben Sie die Batteriefach-Abdeckung an der Rückseite des Gerätes nach unten und ersetzen Sie die entladenen Batterien gegen neue Batterien.

Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf deren Polarität: Der Minuspol der Batterie muss mit den Federn in der Batteriemulde Kontakt haben. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung anschließend wieder vorsichtig.

Batteri recycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Die unten angezeigten Mülltonnen bedeuten, dass alte Batterien sowie Akkus nicht in den Hausmüll geworfen werden dürfen. Sie können wiederverwertet werden und dabei lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink und Nickel wiedergewinnen.

Die Abkürzungen unter den Mülltonnen stehen für:

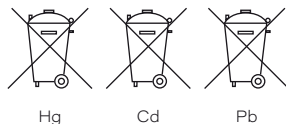

Hg: Batterie enthält Quecksilber
 Cd: Batterie enthält Cadmium
 Pb: Batterie enthält Blei

TECHNISCHE DATEN*

Sensor	Elektrochemischer Sensor
Genauigkeit	+/- 0,05‰ bei 1,00‰ und 25°C (Promille = Grundeinstellung) ODER +/- 0,005%BAC bei 0,100% BAC und 25°C (% BAC = Messwert in den USA) ODER +/- 0,025mg/L bei 0,50mg/L und 25°C (mg/L = Messwert in UK)
Angabe des BAK (Blutalkoholkonzentration)	0,00 bis 4,00‰ (Promille = Grundeinstellung) ODER 0,000 bis 0,400% BAC (Messeinheit für die USA) ODER 0,00 bis 2,00mg/L (Messeinheit für UK)
Aufwärmzeit	10 - 15 Sekunden (bei 0,5 Promille, je höher der ermittelte Promillewert, desto länger benötigt der Sensor zum Verdampfen des in der Atemluft gemessenen Alkoholgehaltes)
Geräte-dimensionen	114 x 49 x 18mm (H x B x T)
Gewicht	116g (inklusive der Batterien)
Energie-versorgung	2 Stück 1,5V AA Alkaline Batterien (= Energie für bis zu maximal 1.000 Tests)

Betriebs-temperatur	10°C bis 40°C
Lager-temperatur	10°C bis 40°C
Kalibrierung	Empfehlung: Alle 12 Monate oder nach 300 Tests (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt). Sie können das Gerät zum Kalibrieren an die unter www.alkomat.net angegebene Service-Adresse senden.

*Die technischen Daten können bei funktionalen Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GARANTIE UND HAFTUNG

Die ACE Handels- und Entwicklungs GmbH (ACE Instruments) übernimmt für das Produkt, dem diese Garantie- und Haftungserklärung beiliegt - in allen Versionen und Benennungen - eine Garantie von zwei (2) Jahren nach dem Kauf auf Material- und Verarbeitungsfehler; eine Garantie von einem (1) Jahr auf den Sensor. Diese Garantie schließt die Elektronik sowie das Gehäuse ein bzw. bezieht sich auf den Sensor ohne Probenahmekomponenten. Nicht unter die Garantie fallen Komponenten, die bei Wirksamkeit zwangsläufig zerstört werden (z. B. Sicherungen). Die Garantie gilt ab Datum der Auslieferung oder ab Datum der ersten Inbetriebnahme (der jeweils kürzere Zeitraum gilt), wenn dies in der Begleitliteratur des Produkts von ACE Instruments nicht anders angegeben ist.

GARANTIE- UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

1. PRODUKT BESCHRÄNKUNG

Die ACE Instruments lehnt jegliche weitere ausdrückliche oder stillschweigend angenommene Garantie ab, einschließlich der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Garantie gilt insbesondere nicht für Kalibrierung. Nach dem Austausch des Sensors ist die Kalibrierung zwingend erforderlich.

Sind bei einem Produkt ein Sensortausch und / oder eine Kalibrierung notwendig, so erhält der Anwender ggfs. einen Kostenvorschlag. Lehnt der Anwender den Kostenvorschlag ab, sendet die ACE Instruments das Produkt unrepariert / unkalibriert zurück und das Produkt wird entsprechend gekennzeichnet.

Sollte das Produkt diese Gewährleistung nicht erfüllen, beschränkt sich der Anspruch des Käufers und die Pflichten der ACE Instruments ausschließlich und nach freiem Ermessen der ACE Instruments auf den Austausch oder die Reparatur der betroffenen Waren oder auf eine Erstattung des Kaufpreises für die beanstandeten Waren.

2. ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

Die ACE Instruments haftet in keinem Fall für zusätzliche Schäden, Nebenschäden oder Folgeschäden wie unter anderem entgangene Gewinne und Nutzungsausfall, die aus Verkauf, Herstellung oder Nutzung der unter diesem Haftungsausschluss verkauften Produkte entstehen, unabhängig davon, ob diese Ansprüche aus Verträgen, Fahrlässigkeit oder anderen schuldhaften Handlungen hergeleitet werden.

Das Produkt, dem diese Garantie- und Haftungserklärung beiliegt, ganz gleich, in welcher Version und Benennung, kann insbesondere nicht rechtsverbindlich dafür herangezogen werden, um die Tauglichkeit einer Person zum Lenken eines Fahrzeugs oder zur Ausführung einer Handlung, die unter Alkoholeinfluss zu Eigen- und Fremdgefährdung führt, festzustellen.

Die sorgfältige Prüfung aller Produkte bei Erhalt auf Beschädigungen, eine für die gegebene Anwendung des Käufers geeignete Kalibrierung und die bestimmungsgemäße Nutzung, Instandsetzung und Wartung gemäß den Anweisungen in der von der ACE Instruments gelieferten Produktliteratur sind zwingende Voraussetzungen für diese Garantie. Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten durch nicht qualifiziertes Personal führen ebenso zum Erlöschen der Garantie wie die Verwendung nicht freigegebener Verbrauchsmaterialien oder Ersatzteile. Wie bei allen technisch anspruchsvollen Produkten ist es eine grundlegende und für die Garantie der ACE Instruments zwingende Voraussetzung, dass alle Benutzer dieser Produkte mit der Verwendung, den Fähigkeiten und Beschränkungen des Produkts, wie in der betreffenden Produktliteratur beschrieben, vertraut sind.

3. BERATUNGSBESCHRÄNKUNG

Der Käufer bestätigt, dass er die beabsichtigte Verwendung und Eignung der gekauften Waren für jeglichen Verwendungszweck in alleiniger Verantwortung geprüft hat. Zwischen den Parteien wird ausdrücklich vereinbart, dass jegliche technische oder andere Beratung durch die ACE Instruments hinsichtlich der Nutzung der Waren oder Dienstleistungen kostenlos und auf ausschließliches Risiko des Käufers geleistet wurde. Daher erwächst der ACE Instruments keinerlei Verpflichtung oder Haftung aus den Empfehlungen oder deren Ergebnissen.

AUTHOR'S LIABILITY

All information herein was created conscientiously and under the assumption of correctness. Hence, the author cannot be held liable for the use of any kind whatsoever and/or any ensuing consequences. Furthermore, the author is not liable for any costs or expenses for damage that result from any information in this document. Any information is subject to change without prior notice.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our INNOMARK alpha Breathalyzer! It measures the alcohol concentration in human breath using an electrochemical sensor and calculates the blood alcohol level. The test results are very reliable and have a tolerance of $\pm 0.05\%$ (per mill = g/L) with reference to 1.00‰ at 25°C ambient temperature. The measurement results are displayed as a 3-digit number with 2 decimals and are interpretable 1:1 (for example the display shows the value 0.36 = 0.36 per mill).

The sensor inside the device can be calibrated. To maintain the measurement accuracy of this device and the sensor warranty, it should be calibrated regularly. For a calibration service you can send the device to the service address specified at www.walkomat.net.

The device must only be used pursuant to the instructions mentioned in this manual. All measured values determined by this breathalyzer are always a guide only and are not legally binding. Breath tests should be carried out using clip-on mouthpieces (one new mouthpiece should be used per test for reasons of hygiene and to avoid falsified readings).

NOTE TO COUNTRY-SPECIFIC MEASUREMENT UNITS

Customers in the EU receive the breathalyzer with ‰ (per mill) as default setting, in the UK the default setting is mg/L, and in the USA, it is % BAC. In the chapter „Technical data,“ you will find information about the accuracy concerning the different measurement units. Please check the website of the Department of Transportation, the website of the Ministry of Transport, or automotive clubs to become informed about the current alcohol limits in your country.

SCOPE OF DELIVERY

- 1 Digital INNOMARK alpha Breathalyzer with fuel cell sensor
- 5 Mouthpieces
- 1 Quick Start Guide
- 1 Manual

Note: Two (2) AA alkaline batteries are required to use the instrument and are not included.

LABEL OF INDIVIDUAL COMPONENTS



1. Mouthpiece Slot
2. Air Outlet (always keep this part unblocked)
3. Digital LC Display
4. Left Operating Button (to start a manual test, to navigate through test results)
5. Power Button (ON/OFF, recall cumulative test count, show last test result)
6. Right Operating Button (navigate through test results)
7. Battery Compartment Cover (on the back of the device)

TIPS TO RECEIVE THE MOST ACCURACTE RESULTS

- A) Wait at least 15 minutes after your last sip of alcohol. Do not eat, drink, or smoke during that time.
- B) Do not open the casing.
- C) Do not keep the breathalyzer in cold, hot, moist, or badly ventilated places.
- D) Keep the breathalyzer out of the reach of children.
- E) Conduct three inlet tests after long storage before conducting the actual alcohol test.
- F) Do not drop the breathalyzer.
- G) Change the battery if it is depleted. Diminished battery capacity leads to incorrect test results.
- H) Do not conduct tests in loud (sound waves disrupt the sensor), drafty, or poorly ventilated places.
- I) After a test result of 1.00 per mill (per mill = EU setting) / 0.10% BAC (% BAC = US setting) / 0.50mg/L (mg/L = UK setting) or higher the sensor needs rest time. In this case wait at least three minutes before starting the next test.
- J) Do not conduct tests in very cold, very hot, or an unventilated, smoky ambience.
- K) Store the breathalyzer in a way to avoid penetration by dust or liquids.
- L) Blowing too hard may cause damage to the sensor as saliva flows into it.

PREPARATION FOR THE TEST

1. Slide down the battery compartment cover on the back of the device and insert two (2) AA batteries (the batteries are not included in the scope of delivery). Pay attention to the poles (+/-) of the batteries. Close the battery compartment cover.
2. Insert a mouthpiece into the mouthpiece slot (= the opening on the left side of the front panel). Ensure whether it securely fits or not. It is highly recommended to use an extra mouthpiece for every test for sanitary reasons.

CONDUCTING THE MEASUREMENT

With the INNOMARK alpha breathalyzer you can conduct **automatic** and **manual tests**.

Automatic test: The easiest way to collect a deep lung sample. The flow system of the INNOMARK alpha monitors a person's breath and automatically takes a sample near the end of the breathy flow.

Manual test: Normally used only if the test person is unable to conduct an automatic test.

1. For an **automatic test** push the power button on the front of the device for 2 seconds, then you hear one beep tone, additionally a countdown starts and "WAIT" is blinking in the left bottom corner.
2. Wait until the end of the countdown you hear 1 beep tone and then you see "rdY" on the display.
3. As soon as you see "rdY" on the display start blowing steadily into the mouthpiece for 4 seconds, the device will beep constantly during the test. Tip: Blow like you would whistle without a tone (but without a break).
4. When the beeping stops and you hear a double "clack" tone, then the test is successfully finished. If the breath sample was not sufficient you shortly will hear 2 beep tones and you will see "C.--" and then "FL0" on the display. This means the breath sample was not sufficient, so push the start button and start a new test.
5. After a successful test the device is analyzing the breath sample, you see "C.--" (= "Calculating") on the display. After a few seconds you hear 2 beep tones and the test result is displayed (with 3 digits and 2 decimals) in ‰ (g/L). To display it in % BAC or in mg/L, press the left button – with the 3rd press you will see the unit ‰ (per mil = g/L) again.

1. For a **manual test** you start the device like described above.
2. As soon as you see "rdY" on the display, push the left button.
3. The manual test mode starts and it displays "C.---", additionally you hear a continuous beep tone.
4. Take a deep breath and blow moderately, with a constant speed and pressure into the direction of the mouthpiece. Blow until you hear a double "clack" tone, then the test is successfully finished.
5. The device is analyzing the breath sample, you see "C.---" (= "Calculating") on the display. After a few seconds you hear 2 beep tones and the test result is displayed. To display it in % BAC or in mg/L, press the left button – with the 3rd press you will see the unit ‰ (per mil = g/L) again.

Note: It is recommended to wait at least 5 minutes between two tests to avoid overloading the sensor and to maintain the quality of the sensor for as long as possible. If it is not in use the device will turn off automatically after 30 seconds, additionally you hear 1 beep tone. If you want to conduct a new test, please press the power button. You can turn off the device manually if you constantly press the power button for 3 seconds.

TEST RECORD MEMORY MODE

Recall cumulative test count

Shortly press the "Power" button (1x) during the countdown, so you can display the cumulative test count – the number of all tests which were done so far. This number also helps you to check if a calibration service is needed (see chapter "Calibration" for more details). You can reset this counter (which is not recommended) if you press the left button until the counter is reset to zero.

Recall previous test results (up to 50 records)

Shortly press the "Power" button (2x) during the countdown, so you can display the latest test results (beginning with the last test). First you see the test number and then the test result saved with this number. If you press the left button you can see the next saved test number followed by the test result. If you want to see the saved results ion backward

order, press he right button. If you want to leave the test record memory mode and go back to the countdown, then shortly (1x) press the "Power" button.

ACE INSTRUMENTS RECOMMENDS

- Always use a new mouthpiece for each person and test that is conducted. ACE Instruments assumes no liability for any damages that may arise when several people use the same mouthpiece for multiple tests.
- Only use the provided individually packaged and hygienic mouthpieces. During each test the breathalyzer's internal and external parts come into contact with human secretion (saliva, blood, sweat, etc.)
- Use safety gloves when pulling out a mouthpiece used by another person! You can buy appropriate gloves at ACE Technik (www.ace-technik.de).

IMPORTANT NOTICE

- WHEN YOU HAVE EATEN, DRUNKEN ALCOHOL OR SMOKED A CIGARETTE, WAIT AT LEAST 15 MINUTES BEFORE STARTING THE MEASUREMENT. ANY TEST CONDUCTED PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE RECOMMENDED WAITING PERIOD WILL RESULT IN INACCURATE RESULTS.
- IF THE TEST RESULT IS BELOW 0.10‰ (PER MILL = g/L) OR 0.01% BAC (US setting) OR 0.05mg/L (UK setting) THEN THE DEVICE SHOWS 0.00 (‰ OR % BAC OR mg/L – depending on the setting) ON THE DISPLAY. THIS HAPPENS BECAUSE AT A LOW RANGE OF ALCOHOL CONCENTRATION IT IS POSSIBLE TO MEASURE OTHER MATERIALS IN YOUR MOUTH.
- This breathalyzer is a high quality and sensitive measurement device. To maintain the accuracy of the sensor, it should regularly be used. If the device is not used for an extended period of time, the sensor can dry out. ACE Instruments recommends using the breathalyzer at least 2 times per month (even if you have not been drinking alcohol).

- Due to changes in the product, the procedures stated can change. This can take place without prior notice or adaptation of the operating manual and is no cause for complaint, return or price reduction. The user is responsible for recognizing discrepancies between the operating manual and the actual handling of the breathalyzer and must react accordingly.

ONLY USE ORIGINAL ACE INSTRUMENTS MOUTHPIECES

- Guarantees test result accuracy
- Guarantees hygiene of you and the device
- Guarantees full warranty of this device

ACE INSTRUMENTS ADVISES

even if you get a result meaning „safe range“, you should never drive after consuming alcohol or do any other activities that are severely impaired by alcohol consumption and might endanger your health and safety or the health and safety of others.

DISPLAY INDICATIONS

DISPLAY	MEANING	ACTION
H	This letter means that the device detected an out of range high alcohol concentration (= above 4.00‰ (g/L) / 0.40% BAC / 2.00mg/L).	No action required.
FLo	The sampling volume was not enough or the blow power was too uneven to analyze the breath sample.	Please perform a new test. Press the start button, the countdown will start again. Start breathing as soon as "rdY" appears on the display.

Snr	This means that the sensor is not ready for a breath sample. This happens if high concentration of alcohol residue or pollutant is found on the sensor after the last test.	Switch off the device and wait at least 5 minutes before starting it again.
rPt	The device could not complete the test successfully.	Please press the Power button and perform a new test.
Out	The testing cannot be performed because the device is turned on outside of the operating temperature.	Repeat the test after the unit has reached a temperature within the operation range (10°C up to 40°C).
Lo	The testing cannot be performed because the battery is low.	Replace the batteries with 2 new AA Alkaline batteries.

CALIBRATION

To maintain the accuracy of the breathalyzer, ACE Instruments recommends a calibration after 300 tests or approx. every 12 months (depending which incident happens first). For a calibration service you can send the device to ACE Instruments (see www.alkomat.net). The calibration is not mandatory, but the accuracy of the breathalyzer will decrease steadily without it and additionally the warranty for the sensor expires.

We recommend sending it as a parcel, so that in case of loss an inquiry or proof of delivery is possible.

BATTERY NOTICES

The device associated with this operating manual contains 2 AA Alkaline batteries (1.5 V) in delivery condition.

These batteries are not made for recharging. The use of a rechargeable battery is not possible with this device and can damage it. If the included batteries are depleted, they must not be thrown into the household waste. Used batteries may contain harmful substances that can cause environmental or health damage. Please return all depleted batteries to electrical appliance stores, who collect them for free.

BATTERY EXCHANGE

To replace the batteries, push the battery cover on the rear of the unit downwards and replace the discharged batteries with a new one. Be aware of the polarity when inserting the batteries (+/- pole). Close the battery compartment cover again. In the EU the return of used batteries is mandatory by law. All depleted batteries and also rechargeable batteries will be recycled. This way valuable resources like iron, zinc and nickel can be retrieved and are reusable then. Battery recycling is the easiest lesson in environmental protection – so please support it!

The shown garbage bins mean that batteries or rechargeable batteries must not be thrown into the household waste. The signs below the garbage bins are acronyms for the chemical substances inside the battery:



Hg

Cd

Pb

Hg: Battery contains Mercury
 Cd: Battery contains Cadmium
 Pb: Battery contains Lead

TECHNICAL DATA*

Sensor	Fuel Cell Sensor
Accuracy	+/- 0.05‰ (per mill) with reference to 1.00‰ at 25°C (per mill = default setting) OR +/- 0.005% BAC (Blood Alcohol Concentration) with reference to 1.00% BAC at 25°C OR +/- 0.025mg/L with reference to 0.50mg/L at 25°C
Detection Range	0.00 up to 4.00‰ (per mill) OR 0.00 up to 0.40% BAC (USA) OR 0.00 up to 2.00mg/L (UK)
Warm-up Time	Within 10 up to 15 seconds at 0.5‰, it may vary depending on the value of per mill / BAC / mg/L which was measured
Dimension	114 x 49 x 18mm (L x W x H)
Weight	116g (batteries included)
Power Supply	2 pieces of 1.5V AA Alkaline battery (= energy for up to max. 1,000 tests)
Working Temperature	10°C up to 40°C
Storage Temperature	10°C up to 40°C
Calibration	Recommendation: Every 12 months or after 300 tests (whatever comes first). For a calibration service you can send the device to ACE Instruments (see www.alkomat.net).

* The technical data are subject to change without prior notice for functional improvements.

WARRANTY AND LIABILITY

ACE Handels- und Entwicklungs GmbH (ACE Instruments) provides a warranty of two years after purchase for material and processing errors of the product (see attached warranty and liability declaration) in all versions and designations; and a warranty of one year for the sensor. This warranty includes the electronics as well as the casing and sensor without sampling components. Components that inevitably degrade over time (such as fuses) are not part of this warranty. The warranty is valid from the date of delivery or from the date of first activation (always the shorter period), if not stated otherwise in the accompanying ACE Instruments product literature.

LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY

1. PRODUCT DESCRIPTION

ACE Instruments rejects any further expressly stated or implied warranty, including the marketability and suitability for a determined purpose. This warranty especially excludes calibration. After changing the sensor, calibration is absolutely necessary. If an exchange of the sensor or a calibration is required for a product, the user may receive a cost estimate. Should the user reject the estimate, ACE Instruments will send the product back unrepaired/not calibrated and the product will be labelled accordingly. Should the product not fulfil the warranty, the claim of the buyer and the obligations of ACE Instruments are limited exclusively to the discretion of ACE Instruments for exchange, repair of the affected goods or reimbursement of the purchasing price for the faulty merchandise.

2. APPLICATION RESTRICTION

ACE Instruments is by no means liable for additional, incidental or consequential damage such as, among others, lost profit and downtime that result from selling, producing or using products that are part of this application restriction. This is independent of any claims emanating from, for instance, contracts, negligence or other culpable actions. The product, which is accompanied by this warranty and liability declaration (no matter the version or designation), in particular cannot be used in a legally binding manner to

determine one's capability to operate vehicles or execute action that could lead to personal injury or injury to others under the influence of alcohol.

The thorough check for damage of all products upon receipt, calibration suitable for the given use by the buyer and the proper use, maintenance and service according to the instructions of the accompanying ACE Instruments product literature are mandatory prerequisites of this warranty. Maintenance and service work performed by non-qualified persons as well as the use of non-approved consumables or spare parts results in the voiding of this warranty. As for all technically challenging products, it is a fundamental prerequisite and mandatory for ACE Instruments warranty that all users of these product are familiar with the properties and restrictions of the devices as stated in the respective literature.

3. ADVICE RESTRICTION

The buyer is solely responsible and confirms that they have checked the intended use and suitability of purchased goods for any purpose. Between the two parties it is expressly agreed that all technical or other advice given by ACE Instruments regarding the use of goods or services is free of charge and made under risk to the buyer exclusively. Therefore, no obligation or liability can result to ACE Instruments from any recommendation or their consequences.

RESPONSABILITÉ D'AUTEUR

Les présentes informations ont été rédigées avec soin et en supposant leur exactitude. Néanmoins, le rédacteur ne saurait être tenu pour responsable d'une quelconque utilisation et des conséquences en découlant. Le rédacteur n'est pas responsable des frais ou des débours liés aux dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté notre testeur d'alcool INNOMARK alpha! C'est un appareil de mesure facile à utiliser avec un capteur électrochimique. L'appareil mesure la concentration d'alcool dans l'air expiré et en déduit la le taux d'alcool dans le sang. Cela signifie que la marge d'erreur est de +/- 0,05‰ (pour mille = g/L) pour une valeur de référence de 1,00 pour mille et 25°C température ambiante. Les résultats mesurés sont affichés sous forme de valeur numérique à 3 chiffres avec 2 décimales (% ou mg/L) et sont interprétables 1:1 (si par ex. l'écran affiche la valeur 0,36 = 0,36 pour mille).

Le capteur intégré à l'appareil peut être étalonné. Pour maintenir la précision de mesure de cet appareil et la garantie du capteur, nous recommandons un étalonnage régulier. Vous pouvez envoyer l'appareil pour l'étalonnage à l'adresse de service indiquée sur www.alkomat.net.

L'appareil ne doit être utilisé que dans le complet respect des instructions d'utilisation. Toutes les valeurs mesurées déterminées par cet alcooltest sont toujours un guide seulement et ne sont pas juridiquement contraignantes. Les tests respiratoires doivent être effectués à l'aide d'embouts buccaux (un nouvel embout buccal doit être utilisé par test).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Éthylotest INNOMARK alpha avec un capteur électrochimique
- 5 Embouts
- 1 Guide de démarrage rapide
- 1 Mode d'emploi

Remarque : Deux (2) piles alcalines AA sont nécessaires pour utiliser l'instrument et ne sont pas incluses.

DÉSIGNATION DES DIFFÉRENTS CONSTITUANTS



1. Fente d'embout buccal
2. Sortie d'air (toujours garder cette pièce non bloquée)
3. Afficheur numérique à cristaux liquides
4. Bouton de fonctionnement gauche (pour démarrer un test manuel, pour naviguer dans les résultats du test)
5. Bouton d'alimentation (ON/OFF, rappel du nombre cumulé de tests, affichage du dernier résultat de test)
6. Bouton de fonctionnement droit (pour naviguer dans les résultats du test)
7. Couvercle du compartiment des piles (à l'arrière de l'appareil)

VOICI COMMENT OBTENIR LE RÉSULTAT LE PLUS PRÉCIS POSSIBLE

- A) Attendez au moins 15 minutes après la dernière gorgée d'alcool avant de tester votre alcoolémie. Pendant ce laps de temps, abstenez-vous de manger, de boire ou de fumer.
- B) N'ouvrez pas le boîtier.
- C) Stockez l'unité de test d'alcool à l'abri du froid ou de la chaleur, dans un endroit sec et bien aéré.
- D) Stockez l'unité de test d'alcool hors de portée des enfants.
- E) Après une longue durée sans utiliser l'appareil, effectuez trois tests de fonctionnement, avant de procéder au test effectif.
- F) Ne faites pas tomber l'unité de test d'alcool.
- G) Remplacez les piles lorsque la performance de l'appareil faiblit. Une capacité réduite des piles conduirait à des résultats erronés.
- H) Ne faites pas de test dans un endroit bruyant (les ondes sonores perturbent le capteur), exposé aux courants d'airs ou mal aérés.
- I) Après un résultat de 1,00 pour mille ou au-delà, le capteur a besoin d'un temps de repos plus long. Dans ce cas, attendez au moins trois minutes avant tout nouveau test.
- J) N'effectuez pas de test dans un environnement très froid ou très chaud, sans aération ou enfumé.
- K) Stockez l'unité de test d'alcool de sorte qu'aucune intrusion de poussière ou de liquide ne soit possible.
- L) Ne soufflez pas trop fort dans l'appareil, cela endommage le capteur (notamment si beaucoup de salive entre dans l'appareil).

PRÉPARATION POUR LE TEST

1. Installez 2 piles AA dans le compartiment à pile. Pour cela, ôtez soigneusement le couvercle du compartiment à pile à l'arrière de l'appareil et insérez 2 piles AA (alcaline, 1,5 V). Ce faisant, observez la polarité de la pile (+/-).
2. Placer un embout sur l'ouverture latérale pour la fixation des embouts (= l'ouverture sur le côté gauche de l'avant de l'appareil). Vérifiez que l'embout buccal soit bien fixé. Utilisez un nouvel embout buccal pour chaque personne.

PROCÉDURE DE TEST

Avec l'éthylotest INNOMARK alpha, vous pouvez effectuer des tests automatiques et manuels.

Test automatique : La façon la plus facile de prélever un échantillon pulmonaire profond. Le système d'écoulement de l'INNOMARK alpha surveille la respiration d'une personne et prélève automatiquement un échantillon vers la fin du flux respiratoire.

Test manuel : Normalement utilisé seulement si la personne testée n'est pas en mesure d'effectuer un test automatique.

1. Pour un **test automatique**, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton de démarrage à l'avant de l'appareil, puis vous entendez un bip sonore, en plus un compte à rebours commence et „WAIT” clignote dans le coin inférieur gauche.
2. Attendez jusqu'à la fin du compte à rebours, vous entendez 1 bip sonore, puis vous voyez „rDY” à l'écran.
3. Dès que vous voyez „rDY” sur l'écran commence à souffler régulièrement dans l'embout buccal pendant 4 secondes, l'appareil émet un bip constant pendant le test. Conseil : Soufflez comme si vous sifflez sans tonalité (mais sans pause).
4. Lorsque le bip sonore s'arrête et que vous entendez un double „claquement”, le test est terminé avec succès. Si l'échantillon d'haleine n'était pas suffisant, vous entendrez brièvement 2 bips sonores et vous verrez „C---” et ensuite „FLo” sur l'affichage. Cela signifie que l'échantillon d'haleine n'était pas suffisant, alors appuyez sur le bouton de démarrage et commencez un nouveau test.
5. Après un test réussi, l'appareil analyse l'échantillon d'haleine, vous voyez „C---” (= „Calcul”) à l'écran. Après quelques secondes, vous entendez 2 bips et le résultat du test est affiché (avec 3 chiffres et 2 décimales) sur % (g/L). Pour afficher en % d'alcoolémie ou en mg/L, appuyez sur le bouton de gauche - avec la 3ème pression, vous verrez à nouveau l'unité % (par ml = g/L).

1. Pour un **test manuel**, démarrez l'appareil comme décrit ci-dessus.
2. Dès que vous voyez „rdY” sur l'écran, appuyez sur le bouton gauche.
3. Le mode de test manuel démarre et affiche „C.--”, en plus vous entendez un bip sonore continu.
4. Inspirez profondément et soufflez modérément, avec une vitesse et une pression constante dans la direction de l'embout buccal. Soufflez jusqu'à ce que vous entendiez un double „claquement”, puis le test est terminé avec succès.
5. L'appareil analyse l'échantillon d'haleine, vous voyez „C.--” (= „Calcul”) à l'écran. Après quelques secondes, vous entendez 2 bips sonores et le résultat du test s'affiche. Pour l'afficher en % d'alcoolémie ou en mg/L, appuyez sur le bouton de gauche - avec la 3ème pression, vous verrez à nouveau l'unité ‰ (par mil = g/L).

Remarque : Il est recommandé d'attendre au moins 5 minutes entre deux tests pour éviter de surcharger le capteur et pour maintenir la qualité du capteur le plus longtemps possible. S'il n'est pas utilisé, l'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 30 secondes et vous entendrez en plus un bip sonore. Si vous souhaitez effectuer un nouveau test, veuillez appuyer sur le bouton de démarrage. Vous pouvez éteindre l'appareil manuellement si vous appuyez constamment sur le bouton de démarrage pendant 3 secondes.

MODE MÉMOIRE D'ENREGISTREMENT DE TEST

Rappeler le nombre cumulatif de tests

Appuyez brièvement sur le bouton de démarrage (1x) pendant le compte à rebours, afin de pouvoir afficher le nombre cumulé de tests - le nombre de tous les tests effectués jusqu'à présent. Ce numéro vous permet également de vérifier si un service de calibrage est nécessaire (voir chapitre „Calibrage” pour plus de détails). Vous pouvez réinitialiser ce compteur (ce qui n'est pas recommandé) en appuyant sur le bouton gauche jusqu'à ce que le compteur soit remis à zéro.

Rappeler les résultats des tests précédents (jusqu'à 50 enregistrements)

Appuyez brièvement sur le bouton de démarrage (2x) pendant le compte à rebours, afin de pouvoir afficher les derniers résultats de test (en commençant par le dernier test). Vous voyez d'abord le numéro du test, puis le résultat du test enregistré avec ce numéro. Si vous appuyez sur le bouton gauche, vous pouvez voir le prochain numéro de test enregistré suivi du résultat du test. Si vous voulez voir les résultats enregistrés dans l'ordre inverse, appuyez sur le bouton droit de la souris. Si vous voulez quitter le mode mémoire d'enregistrement de test et revenir au compte à rebours, appuyez brièvement (1x) sur la touche de démarrage.

RECOMMANDATIONS D'ACE INSTRUMENTS

- Utilisez un embout différent pour chaque personne faisant le test ! ACE Instruments décline toute responsabilité en cas de dommage causé par l'utilisation d'un même embout par plusieurs personnes ou pour plusieurs tests.
- Utilisez toujours les embouts ACE Instruments emballés de façon séparée et hygiénique. À chaque test, l'appareil entre en contact avec des sécrétions humaines externes comme internes (transpiration, salive, sang, etc.).
- Utilisez des gants lorsque vous retirez l'embout employé pour un test, surtout si le test a été effectué par une personne que vous ne connaissez pas. ACE Technik (www.ace-technik.de) propose, dans sa gamme de produits, des gants prévus à cet effet.

PRÉCISIONS IMPORTANTES

- Si vous avez mangé, bu de l'alcool ou fumé une cigarette, attendez au moins 15 minutes avant de commencer la mesure.
- Cette unité de test d'alcool est un appareil sensible et de grande qualité. Afin de préserver la précision de mesure du capteur, l'appareil doit être utilisé régulièrement. En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, le capteur peut s'assécher. Nous conseillons d'utiliser l'éthylotest au moins 2x par mois (même si vous n'avez pas bu d'alcool).
- Pour les valeurs en dessous de 0,10‰ (OU 0,01% BAC OU 0,05mg/L – selon le réglage), le résultat affiché sera 0,00‰. Cela s'explique par le fait que pour un faible niveau d'alcoolémie d'autres substances peuvent être contenues dans l'air expiré et influencer sur le résultat du test.
- Des modifications sur le produit peuvent aboutir à une modification des échéances annoncées. Cela peut se produire sans avertissement préalable et sans adaptation du mode d'emploi et ne constitue en rien un motif de réclamation, de retour ou de réduction du prix. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'identifier les divergences entre le mode d'emploi et l'utilisation effective et de réagir en conséquence.

SEULE L'UTILISATION DES EMBOUTS ORIGINAUX ACE INSTRUMENTS

- garantit la précision du résultat
- garantit une hygiène parfaite à 100%
- vous assure le bénéfice de la garantie de l'appareil

AVERTISSEMENT D'ACE INSTRUMENTS

Même si, après une prise d'alcool, l'appareil affiche une alcoolémie dans la zone de « sécurité », cela ne constitue en rien une autorisation à conduire un véhicule ou à entamer toute autre activité incompatible avec les effets de l'alcool.

AVERTISSEMENTS

AFFICHER	SENS	ACTION
H	Cette lettre signifie que l'appareil a détecté une concentration d'alcool hors plage élevée (= au-dessus de 4,00‰ (g/L) / 0,40% BAC / 2,00mg/L).	Aucune mesure n'est requise.
FLo	Le volume d'échantillonnage n'était pas suffisant ou la puissance de soufflage était trop inégale pour analyser l'échantillon d'haleine.	Veuillez effectuer un nouveau test. Appuyez sur le bouton de démarrage, le compte à rebours recommencera. Commencez à respirer dès que "rdY" s'affiche à l'écran.
Snr	Cela signifie que le capteur n'est pas prêt pour un échantillon d'haleine. Cela se produit si une concentration élevée de résidus d'alcool ou de polluants est détectée sur le capteur après le dernier test.	Eteignez l'appareil et attendez au moins 5 minutes avant de le rallumer.
rPt	L'appareil n'a pas réussi le test.	Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt et effectuez un nouveau test.

Out	Le test ne peut pas être effectué car l'appareil est allumé en dehors de la température de fonctionnement.	Répétez le test une fois que l'appareil a atteint une température dans la plage de fonctionnement (10°C jusqu'à 40°C).
Lo	Le test ne peut pas être effectué car la batterie est faible.	Remplacez les piles par 2 piles alcalines AA neuves.

CALIBRAGE

ACE Instruments recommande le calibrage du capteur intégré à l'appareil tous les 12 mois environ ou après 300 tests (quel que soit l'événement entre plus tôt). Le calibrage n'est pas obligatoire, cependant la précision du capteur intégré à l'unité d'alcool test diminue progressivement en l'absence de calibrage. Sans étalonnage, cependant, la garantie du capteur expire. Pour faire calibrer votre appareil, vous pouvez l'envoyer à l'adresse indiquée ici: www.alkomat.net.

Nous recommandons un envoi sous forme de colis, de sorte qu'en cas de perte il soit possible de produire une preuve de dépôt ou de faire une demande de recherche.

LES NOTES AFFÉRENTES AUX BATTERIES

L'appareil que concerne le présent mode d'emploi est livré avec 2 piles alcalines AA. Ces piles ne sont pas rechargeables. Toute tentative pour les recharger peut entraîner des dommages matériels et personnels. L'utilisation de piles rechargeables sur cet appareil n'est également pas possible, sous peine d'endommager l'appareil.

Une fois les piles déchargées, veuillez ne pas les jeter à la poubelle. Les piles usagées contiennent des substances toxiques qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Veuillez vous débarrasser des piles dans les endroits prévus à cet effet chez certains commerçants ou à la déchetterie de votre commune. Cette restitution est gratuite et obligatoire. Veuillez ne jeter les piles déchargées que dans les conteneurs prévus à cet effet et, dans le cas des piles au lithium, veuillez en coller les pôles.

CHANGEMENT DES PILES

Retirez le couvercle du compartiment à piles et remplacez les piles usagées par deux neuves. Pensez à respecter la polarité : le pôle moins des piles doit être en contact avec le ressort du réceptacle à piles. Fermez ensuite avec précaution le couvercle du compartiment des piles.

Le recyclage des piles est un jeu d'enfant. Le symbole « corbeille à papier » signifie que les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle. Elles peuvent être recyclées et les matières premières telles que le fer, le zinc et le nickel sont récupérées.

Les signes sur les poubelles signifient:



Hg

Cd

Pb

Hg: La pile contient du mercure

Cd: La pile contient du cadmium

Pb: La pile contient du plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Capteur	Capteur électrochimique
Précision	+/- 0,05‰ pour 1,00‰ (réglage fixe de base) OU +/- 0,005% BAC pour 0,10% BAC (USA) OU +/- 0,025 mg/L pour 0,50 mg/L (UK)
Indication du TA	0,00 à 4,00‰ (‰ = réglage fixe de base) OU dans d'autres la lecture 0,00 à 0,40% de TA (taux d'alcoolémie) OU 0,00 à 2,00 mg/L
Temps de réchauffement	10 - 15 secondes (pour 0,5 pour mille - plus élevée est la valeur pour mille calculée, plus le capteur nécessite de temps pour évacuer l'alcool mesuré dans l'air expiré)
Dimensions de l'appareil	114 x 49 x 18mm (H x L x P)
Poids	116g (y compris les piles)
Alimentation	2 piles AA 1,5 V, Alcaline (=énergie pour jusqu'à max. 1,000 tests)
Température d'exploitation	10°C à 40°C
Température de stockage	10°C à 40°C
Calibrage	Recommandation : Environ tous les 12 mois ou après 300 tests (selon la première éventualité). Pour faire calibrer votre appareil, vous pouvez l'envoyer à l'adresse indiquée ici: www.alkomat.net .

*Les données techniques peuvent être modifiées pour des améliorations fonctionnelles (sans préavis).

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Le produit auquel est jointe la présente déclaration de garantie et de responsabilité bénéficie – sur toutes les versions et dénominations – d'une garantie pour vices de matériel et de façonnage, assumée pendant une durée de deux ans après l'achat par la Sarl ACE Commerce et Développement (ACE Instruments); d'une garantie d'un an pour le capteur.

Cette garantie inclut l'électronique ainsi que le boîtier ou concerne le capteur sans les composants d'échantillonnage. Ne tombent pas sous le coup de la garantie, les composants qui sont inévitablement détruits au cours de l'activité (par exemple les fusibles de sécurité). La garantie est valable à partir de la date de livraison ou à partir de la date de première mise en service (est en vigueur le laps de temps chaque fois le plus court), à moins que ce ne soit indiqué différemment dans la littérature d'accompagnement du produit de la Sarl ACE Instruments.

GARANTIE ET RESTRICTION DE LA GARANTIE
1. RESTRICTION DU PRODUIT

La Sarl ACE Instruments décline toute autre garantie, expressément ou implicitement acceptée, y compris la négociabilité et la qualification dans un but déterminé. En particulier, la garantie n'est pas en vigueur pour le calibrage. Après le remplacement du capteur, le calibrage est impératif.

Si pour un produit donné, un remplacement de capteur et/ou un calibrage sont nécessaires, l'utilisateur reçoit un devis estimatif des frais. Si l'utilisateur refuse le devis estimatif des frais, la Sarl ACE Instruments renvoie le produit non réparé / non calibré et le produit est marqué en conséquence.

Si le produit ne remplit pas cette garantie, le droit de l'acquéreur et les devoirs de la Sarl ACE Instruments, au gré de la Sarl ACE Instruments, se limitent exclusivement au remplacement ou à la réparation des marchandises affectées ou au remboursement du prix d'achat des marchandises contestées.

2. RESTRICTION D'UTILISATION

La Sarl ACE Instruments ne se porte en aucun cas garante des dommages supplémentaires, subsidiaires ou consécutifs comme par exemple les pertes de bénéfice et privations de jouissance résultant de la vente, de la fabrication ou de l'exploitation des produits vendus aux termes de la présente restriction de garantie, indépendamment du fait que ces droits proviennent de contrats, de négligence ou d'autres actions fautives.

Indépendamment de sa version et dénomination, le produit auquel est jointe la présente reconnaissance de garantie et responsabilité ne peut pas, en particulier, être mis à contribution de manière juridiquement obligatoire pour établir l'aptitude d'une personne à conduire un véhicule ou à réaliser un acte qui sous l'effet de l'alcool aboutit à une menace de danger pour soi-même ou autrui.

Les conditions préalables contraignantes de cette garantie sont: la vérification soigneuse, au moment de la réception, des dommages subis par tous les produits, un calibrage approprié à l'utilisation courante de l'acquéreur et la jouissance conforme aux dispositions, la remise en état et l'entretien conformément aux instructions de la littérature du produit livré par la Sarl ACE Instruments. Les travaux de remise en état ou d'entretien par un personnel non qualifié ainsi que l'utilisation de consommables ou de pièces de rechange non validés entraînent, de même manière, la cessation de la garantie. Comme pour tous les produits techniquement sophistiqués, la condition préalable fondamentale et contraignante de la garantie de la Sarl ACE Instruments est que tous les utilisateurs de ces produits soient familiarisés avec l'utilisation, les capacités et les limitations du produit, telles qu'elles sont décrites dans la littérature relative au produit.

3. RESTRICTION DE CONSULTATION

Sous sa seule responsabilité l'acquéreur confirme qu'il a vérifié l'utilisation et la qualification envisagées pour tout usage prévu des marchandises achetées. Il est expressément stipulé entre les contractants que tout conseil technique ou autre donné par la Sarl ACE Instruments relativement à la jouissance des marchandises ou des prestations de service ont été fournis gratuitement et au risque exclusif de l'acquéreur. Aucune espèce d'engagement ou de responsabilité ne résulte donc des recommandations ou de leurs résultats pour la Sarl ACE Instruments.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AUTEUR

De hierin Aanwezige informatie werd nauwgezet en onder Aanvaarding van zijn juistheid opgesteld. De schrijver ervan kan zich echter niet aansprakelijk stellen voor welke vorm van gebruik dan ook en de daaruit ontstane consequenties. Hij is niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven voor schade die ontstaan uit het gebruik van de zich in dit document bevindende informatie. Wijzigingen in deze informatie zijn zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden.

INLEIDING

Bedankt voor het kopen van onze Alcoholtester INNOMARK alpha! Hij is een eenvoudig te gebruiken alcoholmeter met elektrochemische sensor. Hij meet de alcoholconcentratie in de lucht en berekent de alcoholconcentratie in het bloed. Dit apparaat levert testresultaten met een meettolerantie van +/- 0,05‰ (promille = g/L) bij een referentiewaarde van 1,00 promille en 25°C omgevingstemperatuur. De maateenheid ‰ (per duizend) = basisinstelling in de EU.

De meetresultaten verkregen per mille worden weergegeven als een getal van 3 cijfers met 2 decimalen en zijn interpreteerbaar 1:1 (het display geeft bijvoorbeeld de waarde 0,36 = 0,36 per duizend).

De sensor ingebouwd in de alcoholmeter kan worden gekalibreerd. Om de meetnauwkeurigheid van dit apparaat en de garantie van de sensor te behouden, raden we aan om regelmatig te kalibreren. U kunt het apparaat verzenden voor kalibratie naar het serviceadres dat is opgegeven op www.alkomat.net.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies in de bedieningsinstructies. Alle meetwaarden, die door dit alcoholtesttoestel worden gemeten, mogen alleen als indicatie worden beschouwd en zijn juridisch niet bindend. Voor elke ademtest moet een nieuw mondstuk worden gebruikt (om hygiënische redenen en om te foutieve meetgegevens te voorkomen die mogelijk door restalcohol uit een vorig gebruik worden geregistreerd).

LEVEROMVANG

- 1 Ademalcoholtester INNOMARK alpha met elektrochemische sensor
- 5 Mondstukken
- 1 Snelstartgids
- 1 Gebruiksaanwijzing

Opmerking: Twee (2) AA alkalinebatterijen zijn nodig om het instrument te gebruiken en worden niet meegeleverd.

IDENTIFICATIE VAN ELKE COMPONENT



1. Mondstukgleuf
2. Luchtuitlaat (houd dit onderdeel altijd gedeblokkeerd)
3. Digitaal LC-scherm
4. Linker bedieningsknop (om een handmatige test te starten, om te navigeren in de testresultaten)
5. Aan/uit-knop (AAN/UIT, gecumuleerde teststelling oproepen, laatste testresultaat tonen)
6. Rechter bedieningsknop (navigeer door de testresultaten)
7. Batterijvakdeksel (op de achterkant van het apparaat)

VOOR HET MEEST NAUWKEURIGE MEETRESULTAAT

- A) Wacht na de laatste slok alcohol minstens 15 minuten voor u de alcoholtest uitvoert. Eet, drink of rook niet tijdens deze wachttijd.
- B) Open de behuizing niet.
- C) Bewaar de alcohol testeenheid niet in een koude, warme, vochtige of slecht verluchte ruimte.
- D) Bewaar de alcohol testeenheid buiten het bereik van kinderen.
- E) Voer, wanneer het toestel lange tijd zonder gebruik werd bewaard, eerst drie "inlooptests" uit voor u de eigenlijke alcoholtest uitvoert.
- F) Laat de alcohol testeenheid niet vallen.
- G) Vervang de batterij wanneer de display moeilijk kan worden gelezen. Een lage batterijspanning kan eveneens voor gevolg hebben dat verkeerde metingen worden doorgevoerd.
- H) Voer geen test uit in een lawaaierige omgeving (lawaaï stoort de sensor) of in een slecht verluchte ruimte.
- I) Na een testresultaat van 1,00 promille of hoger moet de sensor langer tot rust komen. Wacht in dat geval ten minste drie minuten voor de volgende test.
- J) Voer geen tests uit in een zeer koude, zeer warme of slecht verluchte rokerige ruimte.
- K) Bewaar de alcohol testeenheid zo dat er geen stof of vloeistoffen in het toestel kunnen dringen.
- L) Blaas niet te hard op het toestel. Dit kan de sensor beschadigen (vooral wanneer bij het blazen voor speeksel in het toestel terechtkomt).

VOORBEREIDINGEN VOOR DE TEST:

1. Leg 2 AA-batterijen in het batterijvak. Verwijder hiervoor voorzichtig het deksel van het batterijvak aan de achterkant van het apparaat en leg 2 AA-batterijen (alkaline, 1,5 V). Let op de polariteit van de batterij (+/-).
2. Plaats een mondstuk op de zijopening voor het bevestigen van de mondstukken (= de opening aan de linkerkant van de voorkant van het instrument). Zorg ervoor dat het mondstuk goed vastzit. Gebruik per testpersoon een nieuw mondstuk.

UITVOEREN VAN DE TEST

Met de alcohol tester INNOMARK alpha kunt u automatische en handmatige tests uitvoeren.

Automatische test: De eenvoudigste manier om een diep longmonster te verzamelen. Het stromingssysteem van de INNOMARK alpha houdt de adem van een persoon in de gaten en neemt automatisch een monster aan het einde van de ademstroom.

Handmatige test: Normaal gesproken alleen gebruikt als de testpersoon niet in staat is om een automatische test uit te voeren.

1. Voor een **automatische test** drukt u gedurende 2 seconden op de startknop aan de voorkant van het apparaat, dan hoort u een pieptoon, daarnaast begint er een aftelklank en knippert „WAIT“ in de linker benedenhoek.
2. Wacht tot het einde van het aftellen hoort u 1 pieptoon en dan ziet u „rDY“ op het display.
3. Zodra u „rDY“ op het display ziet beginnen te blazen in het mondstuk gedurende 4 seconden, zal het apparaat tijdens de test een constante pieptoon laten horen. Tip: Blaas alsof u zonder toon (maar zonder pauze) zou fluiten.
4. Wanneer de pieptoon stopt en u een dubbele „clack“ toon hoort, dan is de test succesvol afgerond. Als het ademgasmonster niet voldoende was, hoort u kort 2 pieptonen en ziet u „C----“ en vervolgens „FLo“ op het display. Dit betekent dat het adem sample niet voldoende was, dus druk op de start knop en start een nieuwe test.
5. Na een succesvolle test analyseert het apparaat het ademgasmonster, u ziet „C----“ (= „Berekenen“) op het display. Na enkele seconden hoort u 2 pieptonen en wordt het testresultaat (met 3 cijfers en 2 decimalen) in ‰ (g/L) weergegeven. Om het in % BAC of in mg/L weer te geven, drukt u op de linker knop - bij de derde druk op de knop ziet u opnieuw de eenheid ‰ (per mil = g/L).

1. Voor een **handmatige test** start u het apparaat zoals hierboven beschreven.
2. Zodra u „rdY“ op het display ziet, drukt u op de linker knop.
3. De handmatige testmodus start en toont „C----“, bovendien hoort u een continue pieptoon.
4. Haal diep adem en blaas matig, met een constante snelheid en druk in de richting van het mondstuk. Blaas tot u een dubbele „klap“ toon hoort, dan is de test succesvol afgerond.
5. Het apparaat analyseert het ademgasmonster, u ziet „C---“ (= „Berekenen“) op het display. Na enkele seconden hoort u 2 pieptonen en het testresultaat wordt weergegeven. Om het in % BAC of in mg/L weer te geven, drukt u op de linker knop - bij de derde druk op de knop ziet u opnieuw de eenheid ‰ (per mil = g/L).

Opmerking: Het wordt aanbevolen om tussen twee tests minstens 5 minuten te wachten om overbelasting van de sensor te voorkomen en om de kwaliteit van de sensor zo lang mogelijk te behouden. Als het apparaat niet in gebruik is, schakelt het na 30 seconden automatisch uit en hoort u bovendien 1 pieptoon. Als u een nieuwe test wilt uitvoeren, druk dan op de startknop. U kunt het apparaat handmatig uitschakelen als u de startknop 3 seconden lang constant indrukt.

TEST DE GEHEUGENMODUS VOOR DE OPNAME

Cumulatieve instelling terugroepen

Druk tijdens het aftellen kortstondig op de startknop (1x), zodat u de cumulatieve instelling - het aantal van alle tests die tot nu toe zijn uitgevoerd - kunt weergeven. Dit nummer helpt u ook om te controleren of een kalibratiedienst nodig is (zie hoofdstuk „Kalibratie“ voor meer details). U kunt deze teller resetten (wat niet wordt aanbevolen) als u op de linker knop drukt totdat de teller op nul wordt gezet.

Herinneren aan eerdere testresultaten (tot 50 records)

Druk tijdens het aftellen kortstondig op de startknop (2x), zodat u de laatste testresultaten (te beginnen met de laatste test) kunt weergeven. Eerst ziet u het testnummer en vervolgens het testresultaat dat met dit nummer is opgeslagen. Als u op de linker knop drukt, ziet u het volgende opgeslagen testnummer gevolgd door het testresultaat. Als u de opgeslagen resultaten in omgekeerde volgorde wilt zien, druk dan op de rechter knop. Als u de test record memory mode wilt verlaten en terug wilt gaan naar het aftellen, druk dan kort (1x) op de start knop.

AANBEVELINGEN VAN ACE INSTRUMENTS

- Gebruik voor elke testpersoon een nieuw mondstuk! ACE Instruments erkent geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade die is ontstaan door gebruik van hetzelfde mondstuk door meerdere personen in meerdere tests.
- Gebruik steeds een hygiënisch afzonderlijk verpakt mondstuk van ACE Instruments. Het testtoestel komt bij elke test in contact met menselijke sappen (zweet, speeksel, bloed, enz.).
- Gebruik handschoenen wanneer u mondstukken, die u voor de test gebruikt, wisselt, vooral wanneer het toestel wordt gebruikt om u vreemde personen te testen. ACE Technik (www.ace-technik.de) heeft in haar assortiment geschikt handschoenen.

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN

- Wanneer u iets hebt gegeten, alcohol hebt gebruikt of een sigaret hebt gerookt, moet u minstens 15 minuten wachten voor u de test uitvoert.
- Deze alcohol testeenheid is is een hoogwaardig en gevoelig meettoestel. Om de meetnauwkeurigheid van de sensor te vrijwaren, moet het toestel regelmatig worden gebruikt. Wanneer het toestel regelmatig worden gebruikt. Wanneer het toestel voor een langere periode niet wordt gebruikt, kan de sensor uitdrogen. We adviseren om de alcoholtester ten minste twee keer per maand te gebruiken om te testen op alcohol (ook wanneer u geen alcohol hebt gedronken).

- Bij meetwaarden lager dan 0,10‰ (OF 0,01% BAC OF 0,05mg/L – afhankelijk van de instelling) wordt het testresultaat aangegeven als 0,00‰. Dit gebeurt omdat bij deze geringe alcoholhoeveelheid andere substanties in de ingeademde lucht kunnen zitten die het resultaat van de ademtest kunnen beïnvloeden.
- Door productwijzigingen kunnen de voorgeschreven processen veranderen. Dit gebeurt zonder aankondiging vooraf en eventueel zelfs zonder aanpassing van deze gebruiksaanwijzing. Dergelijke aanpassingen vormen geen grond voor een klacht, retour of korting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om verschillen tussen de gebruiksaanwijzing en de eigenlijke bediening op te merken en dienovereenkomstig te handelen.

GEBRUIK ALLEEN DE ORIGINELE ACE INSTRUMENTS-MONDSTUKKEN

- zo niet kan de nauwkeurigheid van de meetresultaten niet worden gewaarborgd.
- deze resultaten kunnen alleen 100 % worden gewaarborgd bij hygiënisch gebruik
- zo niet vervalt de garantieperiode

WAARSCHUWING ACE INSTRUMENTS

Ook wanneer het toestel het alcoholgehalte als "veilig" aanduidt, mag dit niet als een vrijgeleide worden beschouwd om alcohol te drinken en achter het stuur te kruipen of een andere activiteit uit te voeren die niet mag worden uitgevoerd onder invloed van alcohol.

WAARSCHUWINGSMELDINGEN

DISPLAY	BETEKENIS	ACTIE
<i>H</i>	Deze letter betekent dat het apparaat een buiten bereik hoge alcoholconcentratie (= boven 4.00‰ (g/L) / 0,40% BAC / 2.00mg/L) heeft gedetecteerd.	Geen actie nodig.
<i>FLo</i>	Het bemonsteringsvolume was niet voldoende of de slagkracht was te ongelijk om het ademgasmonster te analyseren.	Voer een nieuwe test uit. Druk op de startknop, het aftellen begint opnieuw. Start de ademhaling zodra "rdY" op het display verschijnt.
<i>Snr</i>	Dit betekent dat de sensor niet klaar is voor een ademtest. Dit gebeurt als er na de laatste test een hoge concentratie alcoholresidu of vervuiling van de sensor wordt gevonden.	Schakel het apparaat uit en wacht minstens 5 minuten voordat u het opnieuw start.
<i>rPt</i>	Het apparaat kon de test niet succesvol afronden.	Druk op de aan/uit-knop en voer een nieuwe test uit.

Out	De test kan niet worden uitgevoerd omdat het apparaat buiten de bedrijfstemperatuur is ingeschakeld.	Herhaal de test nadat het apparaat een temperatuur heeft bereikt binnen het werkingsbereik (10°C tot 40°C).
Lo	De test kan niet worden uitgevoerd omdat de batterij bijna leeg is.	Vervang de batterijen door 2 nieuwe AA-alkalinebatterijen.

KALIBRATIE

ACE Instruments adviseert om de sensor in het toestel om de 12 maanden of na 300 tests opnieuw te laten kalibreren (afhankelijk welke van de twee voorwaarden eerst is bereikt). Deze kalibrering is niet verplicht, maar zonder kalibrering zal de nauwkeurigheid van de ingebouwde sensor automatisch verminderen en zonder kalibratie vervalt de garantie van de sensor. U kunt de toestel ter kalibrering opsturen naar een van de serviceadressen vermeld op www.walkomat.net.

We adviseren dat u het toestel als pakket verzend, waardoor het pakket u zal worden teruggestuurd in het geval de geadresseerde niet kan worden gevonden.

DE BATTERIJ NOTITIES

Het toestel waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking heeft wordt geleverd met 2 AA alkaline batterijen. Deze batterijen zijn niet oplaadbaar. De poging om deze batterijen op te laden kan personen kwetsen en stoffelijke schade veroorzaken. Bovendien mogen in dit toestel geen oplaadbare batterijen worden gebruikt. Deze kunnen het toestel beschadigen.


Als de batterijen leeg zijn, mogen ze niet met het huishoudafval worden afgevoerd. Alkaline batterijen bevatten schadelijke stoffen die het milieu en de volksgezondheid kunnen schaden. Breng de batterijen binnen in de winkel of geef ze af in het gemeentelijk containerpark. Deze ophaling is verplicht en wettelijk voorgeschreven. Werp lege batterijen weg in de daartoe bestemde container en kleef de polen van lithiumbatterijen af.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Verwijder de klep van het batterijvak van het toestel en vervang de gebruikte batterijen door twee nieuwe. Let op de polariteit: de minpool van de batterij moet contact maken tegen het veertje van het batterijvak. Sluit vervolgens voorzichtig het deksel van het batterijvak.

Het recyclen van batterijen is de gemakkelijkste manier om te zorgen voor het milieu. Onderstaande pictogrammen geven aan dat oude batterijen en accu's niet bij het huisvuil mogen worden geplaatst. Ze kunnen opnieuw worden gebruikt en waardevolle grondstoffen zoals ijzer, zink en nikkel kunnen worden gerecycled.

De tekens onder de vuilnisbakken staan voor:

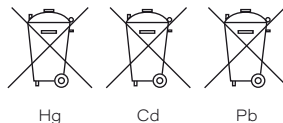

Hg: Batterij bevat kwik
 Cd: Batterij bevat cadmium
 Pb: Batterij bevat lood

TECHNISCHE GEGEVENS*

Sensor	Elektrochemische sensor
Nauwkeurigheid	+/- 0,05‰ bij 1,00‰ en 25°C (Promille = basisinstelling) OF (afhankelijk van de instelling) +/- 0,005% BAC bij 0,10% BAC (USA) OF +/- 0,025mg/L bij 0,50mg/L (UK)
Weergave BAK (Bloedalcohol- concentratie)	0,00 tot 4,00‰ (Promille = basisinstelling) OF 0,00 tot 0,40% BAC (USA) OF 0,00 tot 2,00mg/L (UK)
Opwarmingstijd	10 - 15 seconden (bij 0,5 promille, hoe hoger de gemeten promillewaarden hoe meer tijd de sensor nodig heeft om het in de uitgedaemde lucht gemeten alcoholgehalte te verdampen)
Afmetingen van het toestel	114 x 49 x 18mm (H x B x D)
Gewicht	116g (inclusief batterijen)
Stroom	2 AA alkaline batterijen van 1,5 V (=energie voor maximaal 1000 tests)
Bedrijfs- temperatuur	10°C tot 40°C
Bewar- temperatuur	10°C tot 40°C
Kalibrering	Aanbeveling: Ongeveer om de 12 maanden of na 300 tests (afhankelijk van welke voorwaarde het eerst wordt bereikt). Als het apparaat moet worden gekalibreerd, stuur het dan naar een van de serviceadressen vermeld op www.alkomat.net .

*Voor functionele verbeteringen de specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De ACE Instruments (ACE Handels- und Entwicklungs GmbH) geeft voor het product, waarbij deze garantie- en aansprakelijkheidsverklaring is bijgesloten - in alle versies en aanduidingen - een garantie van twee jaar na aankoop op materiaal- en afwerkingsfouten; een garantie van één jaar op de sensor zonder componenten voor het nemen van een monster. Niet onder de garantie vallen componenten die bij werkzaamheid onvermijdelijk vernietigd worden (bijv. zekeringen). De garantie geldt vanaf de datum van uitlevering of vanaf de datum van de eerste ingebruikname (hier geldt steeds het kortere tijdsbestek), wanneer dit in de meegeleverde documenten van het product van de ACE Instruments niet anders vermeld is.

GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 1. PRODUCTBEPERKING

De ACE Instruments wijst iedere verdere uitdrukkelijke of stilzwijgend aangenomen garantie af, inclusief de geschiktheid op de markt voor een bepaald doel. De garantie geldt in het bijzonder niet voor kalibratie. Na het vervangen van de sensor is de kalibratie in ieder geval noodzakelijk. Zijn bij een product het vervangen van de sensor en/of de kalibratie noodzakelijk, ontvangt de gebruiker eventueel een prijsopgave. Wijst hij deze van de hand, zendt de ACE Instruments het product niet gerepareerd / niet gekalibreerd terug en op het product wordt dit ook vermeld. Mocht het product deze waarborg niet vervullen, blijven de aanspraak van de koper en de plichten van de ACE Instruments uitsluitend en naar diens vrije beoordeling beperkt tot het vervangen of de reparatie van de getroffen goederen of een restitutie van de gereclameerde goederen.

2. TOEPASSINGSBEPERKING

De ACE Instruments stelt zich in geen geval aansprakelijk voor extra schade, bijkomende of naderhand ontstane schade zoals onder meer niet verkregen winsten en uitvallen van het gebruik die ontstaan uit verkoop, fabricage of gebruik van de onder deze producten, onafhankelijk van het feit of deze aanspraken worden afgeleid uit contracten, nalatigheid of andere opzettelijke.

Het product, waarbij deze garantie- en aansprakelijkheidsverklaring is bijgevoegd, onverschillig in welke versie en aanduiding, kan in het bijzonder niet juridisch bindend erbij gehaald worden om de geschiktheid van een persoon tot het besturen van een voertuig of tot het verrichten van een handeling die voor zichzelf of andere personen vast te stellen.

De zorgvuldige controle van alle producten bij levering op beschadigingen, een voor de gegeven toepassing van de koper geschikte kalibratie en het reglementaire gebruik, onderhoud en de reparatie volgens de aanwijzingen in de door de ACE Instruments geleverde productliteratuur zijn noodzakelijke voorwaarden voor deze garantie. Reparatie- of onderhoudswerkzaamheden door ongekwalificeerd personeel leiden net zo tot wegvallen van de garantie als niet vrijgegeven gebruiksmaterialen of reserveonderdelen. Zoals bij alle technisch veeleisende producten is het een ACE Instruments noodzakelijke voorwaarde dat alle gebruikers van deze producten vertrouwd zijn met het gebruik, de mogelijkheden en beperkingen van het product, zoals deze beschreven zijn in de betreffende productliteratuur.

3. ADVIESBEPERKING

De koper bevestigt dat hij het voorgenomen gebruik en de geschiktheid van de gekochte goederen voor ieder gebruiksdoel als enige verantwoordelijke heeft gecontroleerd. Tussen de partijen wordt nadrukkelijk overeengekomen dat ieder technisch of ander advies door de ACE Instruments met betrekking tot het gebruik van de goederen of dienstverleningen kosteloos en uitsluitend op risico van de koper gegeven werd. Daardoor ontstaat voor de ACE Instruments uit de aanbevelingen of de resultaten ervan.

RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE

Le informazioni ivi contenute sono state fornite in coscienza e si presuppone la loro esattezza. Il produttore tuttavia non può assumersi la responsabilità per l'utilizzo e per le conseguenze da esso derivanti. Il produttore non è responsabile per le spese o i costi sostenuti a seguito di danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questo documento. Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche a queste istruzioni senza alcun preavviso.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro Alcohol Tester INNOMARK alpha. Il dispositivo è facile da usare e ha un sensore elettrochimico che misura la concentrazione di alcol nel respiro e calcola la concentrazione di alcol nel sangue. Questo dispositivo fornisce risultati di prova con una tolleranza di misurazione di +/- 0,05‰ (per mille = g/L) al livello di riferimento di 1,00‰ e 25°C temperatura ambiente.

I risultati, misurati in grammi per litro, sono visualizzati come valori numerici a 3 cifre con 2 posizioni decimali (sull'unità di misura ‰ e mg/L) con il misuratore del livello di alcol nel sangue e possono essere interpretati proporzionalmente 1:1 (il display mostra ad esempio, il valore di 0,36 = 0,36 grammi per litro).

Il sensore integrato nel dispositivo può essere calibrato. Per mantenere la precisione di misura di questo dispositivo e la garanzia del sensore, si consiglia una calibrazione regolare. È possibile inviare il dispositivo all'indirizzo di servizio specificato su www.alkomat.net.

Prove di respiro sempre deve essere eseguite utilizzando i plug-un boccaglio (utilizzarlo un nuovo boccaglio per ogni test – per motivi di igiene e perché alcol riposo può essere in un boccaglio utilizzata).

Questo dispositivo può essere usato soltanto in conformità con le istruzioni per l'uso. Tutti i valori misurati determinati da questo etilometro sono sempre solo una guida e non sono legalmente vincolanti. I test respiratori devono essere eseguiti utilizzando boccagli clip-on (per ogni test deve essere utilizzato un nuovo boccaglio).

DETTAGLI PRODOTTO

- 1 Etilometro INNOMARK alpha con sensore elettrochimico
- 5 Boccagli originali
- 1 Guida rapida
- 1 Manuale con istruzioni d'uso

Nota: Due (2) batterie alcaline AA sono necessarie per utilizzare lo strumento e non sono incluse.

DESCRIZIONE DELLA PARTE PRINCIPALE



1. Connessione per il boccaglio
2. Uscita per l'aria (sempre mantenere libero)
3. LC Display digitale
4. Pulsante operativo sinistro (per avviare un test manuale, per navigare nei risultati del test)
5. Pulsante di accensione (ON/OFF, richiama il conteggio cumulativo del test, mostra l'ultimo risultato del test).
6. Pulsante operativo destro (per navigare tra i risultati dei test)
7. Coperchio del vano batterie (sul retro dell'apparecchio)

IN QUESTO MODO SARÀ POSSIBILE OTTENERE IL RISULTATO PIÙ AFFIDABILE POSSIBILE

- A) Dopo l'ultimo sorso d'alcol attendere almeno 15 minuti prima di effettuare l'esame. Durante questi 15 minuti non si deve mangiare, bere o fumare.
- B) Non aprire l'alloggiamento.
- C) Non custodire l'unità di alcol test in un luogo freddo o caldo o umido o male arieggiato.
- D) Conservare l'unità di alcol test lontano dalla portata dei bambini.
- E) Dopo un lungo periodo di immagazzinaggio, effettuare tre test di prova prima di effettuare il test vero e proprio. Effettuare la prova del tasso alcolico.
- F) Non lasciare mai cadere l'unità di alcol test.
- G) Sostituire le batterie se scatta l'avviso batteria. La ridotta capacità della batteria può determinare il fallimento del test.
- H) Non effettuare i test in luoghi rumorosi (le onde acustiche disturbano il sensore), esposti alle correnti d'aria o non ventilati.
- I) Dopo un risultato del test pari o superiore all'1,00 per mille, il sensore deve essere fatto riposare per un periodo di recupero. In questo caso attendere almeno tre minuti fino al test seguente.
- J) Non effettuare prove in ambienti molto freddi, molto caldi o non ventilati, fumosi.
- K) Conservare l'unità di alcol test in modo tale da evitare che penetrino polvere e liquidi.
- L) Non soffiare troppo forte nel boccaglio che è dannoso per Sensore (soprattutto quando molto di saliva penetrare l'apparecchio).

PREPARAZIONE PER IL TEST

1. Inserire 2 batterie AA nel vano batterie. Rimuovere con attenzione il coperchio del vano batterie sul lato posteriore dell'apparecchio e inserire 2 batterie AA (alcalina da 1,5 V). Prestare attenzione alla polarità della batteria (+/-).
2. Posizionare un bocchino sull'apertura laterale per il fissaggio dei bocchini (= l'apertura sul lato sinistro del pannello frontale). Assicurarsi che il bocchino sia correttamente fissato. Utilizzare un nuovo bocchino per ciascun utente da testare.

ESECUZIONE DEL TEST ALCOLICO

Con l'etilometro INNOMARK alfa è possibile effettuare test automatici e manuali.

Test automatico: Il modo più semplice per raccogliere un campione polmonare profondo. Il sistema di flusso dell'INNOMARK alfa controlla il respiro di una persona e preleva automaticamente un campione vicino alla fine del flusso respiratorio.

Test manuale: Normalmente utilizzato solo se la persona sottoposta al test non è in grado di condurre un test automatico.

1. Per un **test automatico**, premere per 2 secondi il pulsante di avvio sulla parte anteriore dell'apparecchio, poi si sente un segnale acustico, inoltre si avvia un conto alla rovescia e „WAIT” lampeggia nell'angolo in basso a sinistra.
2. Attendere fino alla fine del conto alla rovescia si sente 1 segnale acustico e poi si vede „rDY” sul display.
3. Non appena si vede „rDY” sul display inizia a soffiare costantemente nel boccaglio per 4 secondi, il dispositivo emette un segnale acustico costante durante il test. Suggerimento: Soffiare come si fischierebbe senza tono (ma senza interruzione).
4. Quando il segnale acustico si ferma e si sente un doppio „clack”, il test è terminato con successo. Se il campione di respiro non era sufficiente, a breve sentirete 2 segnali acustici e vedrete „C-----” e poi „FLo” sul display. Questo significa che il campione di respiro non era sufficiente, quindi premere il pulsante di avvio e iniziare un nuovo test.
5. Dopo un test riuscito il dispositivo sta analizzando il campione di respiro, si vede „C-----”. (= „Calcolo”) sul display. Dopo alcuni secondi si sentono 2 segnali acustici e il risultato del test viene visualizzato (con 3 cifre e 2 decimali) in ‰ (g/L). Per visualizzarlo in ‰ BAC o in mg/l, premere il tasto sinistro - con la terza pressione si vede l'unità ‰ (per mil = g/L).

1. Per un **test manuale** si avvia l'apparecchio come descritto sopra.
2. Non appena viene visualizzato „rdY“ sul display, premere il tasto sinistro.
3. Si avvia la modalità di test manuale che visualizza „C-----“, inoltre si sente un segnale acustico continuo.
4. Fai un respiro profondo e soffia moderatamente, con una velocità e una pressione costanti nella direzione del bocchaglio. Soffiare fino a quando non si sente un doppio „clack“ tono, poi il test è terminato con successo.
5. Il dispositivo sta analizzando il campione di respiro, vedi „C-----“ (= „Calcolo“) sul display. Dopo alcuni secondi si sentono 2 segnali acustici e viene visualizzato il risultato del test. Per visualizzarlo in % BAC o in mg/l, premere il tasto sinistro - con la terza pressione si vede l'unità ‰ (per mil = g/L).

Nota: Si raccomanda di attendere almeno 5 minuti tra due prove per evitare di sovraccaricare il sensore e mantenere la qualità del sensore il più a lungo possibile. Se non viene utilizzato, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 secondi, inoltre si sente un segnale acustico. Se si desidera effettuare un nuovo test, premere il pulsante di avvio. È possibile spegnere manualmente il dispositivo se si preme costantemente il pulsante di avvio per 3 secondi.

MODALITÀ DI MEMORIA DI REGISTRAZIONE DEL TEST

Richiamo del conteggio cumulativo del test

Premere brevemente il pulsante di avvio (1x) durante il conto alla rovescia, in modo da poter visualizzare il conteggio cumulativo dei test - il numero di tutti i test effettuati finora. Questo numero aiuta anche a verificare se è necessario un servizio di calibrazione (vedere il capitolo „Calibrazione“ per maggiori dettagli). È possibile azzerare questo contatore (cosa che non è raccomandata) se si preme il tasto sinistro finché il contatore non viene azzerato.

Richiamo dei risultati dei test precedenti (fino a 50 record)

Premere brevemente il pulsante di avvio (2 volte) durante il conto alla rovescia, in modo da poter visualizzare gli ultimi risultati dei test (a partire dall'ultimo test). Prima viene visualizzato il numero del test e poi il risultato del test salvato con questo numero. Premendo il tasto sinistro è possibile visualizzare il successivo numero di test salvato seguito dal risultato del test. Se si desidera visualizzare i risultati salvati in ordine inverso, premere il pulsante destro. Se si desidera uscire dalla modalità di memoria delle registrazioni di prova e tornare al conto alla rovescia, premere brevemente (1x) il pulsante di avvio.

ACE INSTRUMENTS CONSIGLIA

- Utilizzate un bocchino nuovo per ogni persona da controllare!
L'ACE Instruments non si assume nessuna responsabilità per alcun danno causato dall'utilizzo di un bocchino da parte di più persone e per più test.
- Utilizzate sempre i bocchini ACE Instruments igienici e in confezione singola. Questa unità alcol test per ogni test entra in contatto internamente ed esternamente con secreti umani (sudore, saliva, sangue ecc.).
- Utilizzate i guanti quando togliete i bocchini utilizzati per un test dal misuratore, soprattutto se il test è stato eseguito da persone estranee. L'ACE Technik (www.ace-technik.de) mette a disposizione nella sua gamma di prodotti dei guanti appositi.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Se avete mangiato qualcosa, bevuto dell'alcol oppure fumato una sigaretta aspettate almeno 15 minuti prima di procedere alla misurazione.
- Questa unità alcol test è un misuratore pregiato e sensibile. Onde mantenere la precisione di misurazione del sensore, l'apparecchio va utilizzato regolarmente. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo il sensore potrebbe seccarsi. Consigliamo di utilizzare l'etilometro eseguendo test di tasso alcolemico di almeno 2 volte al mese (anche se non avete bevuto dell'alcol).

- In caso risultassero valori inferiori allo 0,10‰ (OPPURE 0,01% BAC OPPURE 0,05mg/L – a seconda dell'impostazione) il risultato del test viene indicato con 0,00‰. Ciò avviene perché in caso di un basso livello d'alcol possono essere presenti altre sostanze nell'aria espirata, le quali possono influenzare il risultato della prova.
- A seguito di modifiche del prodotto le sequenze operative possono subire dei cambiamenti. Ciò può accadere senza comunicazione preliminare e con adeguamento delle istruzioni per l'uso e non costituisce motivo di reclamo, restituzione o riduzione del prezzo. L'utente, è tenuto a riconoscere le differenze tra le istruzioni per l'uso e l'uso effettivo e a reagire di conseguenza.

SOLO L'UTILIZZO DI BOCCHINI ORIGINALI ACE INSTRUMENTS

- garantisce la precisione dei risultati di misurazione
- garantisce la sicurezza dell'igiene al 100 %
- garantisce la garanzia integrale dell'apparecchio

L'ACE INSTRUMENTS AVVERTE

dopo il consumo di alcolici, anche se l'apparecchio segnala un tasso alcolemico di un livello „sicuro“, ciò non rappresenta carta bianca per la guida di un'autovettura o per un'altra attività che non dovrebbe essere eseguita sotto l'effetto di alcol.

SEGNALAZIONI DI AVVERTIMENTO

INDICAZIONE	SENSO	AZIONE
H	Questa lettera significa che il dispositivo ha rilevato un'alta concentrazione alcolica fuori range (= superiore a 4.00‰ (g/L) / 0.40% BAC / 2.00mg/L).	Non è necessaria alcuna azione.
FLo	Il volume di campionamento non era sufficiente o la potenza di soffiaggio era troppo irregolare per analizzare il campione di respiro.	Eseguire un nuovo test. Premere il pulsante di avvio, il conto alla rovescia ricomincerà. Iniziare a respirare non appena viene visualizzato "rdY" sul display.
Snr	Ciò significa che il sensore non è pronto per un campione di respiro. Questo accade se dopo l'ultimo test viene rilevata sul sensore un'alta concentrazione di residui di alcool o sostanze inquinanti.	Spegnere l'apparecchio e attendere almeno 5 minuti prima di riavviarlo.
rPt	Il dispositivo non è riuscito a completare il test con successo.	Premere il pulsante di accensione ed eseguire un nuovo test.

Out	Il test non può essere eseguito perché l'apparecchio viene acceso al di fuori della temperatura di esercizio.	Ripetere il test dopo che l'unità ha raggiunto una temperatura compresa nell'intervallo di funzionamento (10°C fino a 40°C).
Lo	Il test non può essere eseguito perché la batteria è scarica.	Sostituire le batterie con 2 nuove batterie alcaline AA.

CALIBRATURA

Per ottenere la precisione dell'apparecchio, ACE Instruments consigliamo la calibratura con un intervallo di dopo 300 test o dopo circa 12 mesi (a seconda di quale delle due è la prima). La calibratura non essere coattivo, tuttavia la precisione cala senza la calibratura e inoltre, la garanzia per il sensore scade. L'apparecchio può essere inviato per la calibratura all'indirizzo dal sito www.alkomat.net.

Si consiglia di inviare l'apparecchio come pacco postale così in caso di irreperibilità della ricevuta di consegna per esempio, sia possibile l'indagine dell'ordine.

NOTE ALLE BATTERIE

Il dispositivo a cui si riferiscono queste istruzioni per l'uso contiene 2 batterie AA (1,5V, Alcalini). Queste batterie non possono essere ricaricate. Se si tenta di ricaricarle si possono causare danni agli oggetti e lesioni alle persone. Non è consentito neppure l'uso di batterie ricaricabili, poiché queste potrebbero danneggiare il dispositivo stesso. Le batterie scariche non possono essere gettate nei rifiuti domestici. Le batterie vecchie possono contenere sostanze inquinanti che possono nuocere all'ambiente e alla salute. Si prega di smaltire le batterie nelle rivendite specializzate o nei centri di riciclaggio dei Comuni. La restituzione è gratuita e prescritta dalla legge. Si prega di gettare solo le batterie scariche negli appositi contenitori e, in caso di batterie al litio, di scollegare i poli.

CAMBIO BATTERIA

Per cambiare le batterie estrarre il coperchio del vano batterie e sostituire le batterie vecchie con delle batterie nuove. Rispettare la polarità: i poli negativi delle batterie devono essere a contatto con le molle all'interno del vano. Quindi chiudere con cautela il coperchio del vano batterie. Tutte le batterie vengono riciclate. Possono essere riciclate materie prime importanti come ferro, zinco o nichel: non lasciate che queste vadano perse. Il riciclaggio delle batterie è il modo più facile per rispettare l'ambiente.

Il simbolo del cassonetto significa che: le batterie non possono essere gettate nei rifiuti domestici. Le indicazioni sotto i cassonetti corrispondono a:



Hg

Cd

Pb

Hg: La batteria contiene mercurio
 Cd: La batteria contiene cadmio
 Pb: La batteria contiene piombo

DATI TECNICI*

Sensore	Sensore elettrochimico
Precisione	± 0,05‰ a 1,00‰ (‰ = impostazione di base) e 25°C O (dipendente dell'unità di misura) ± 0,005% BAC a 0,10% BAC (USA) e 25°C O ± 0,025mg/L a 0,50mg/L (UK) e 25°C
Intervalli di misura	0,00 fino a 4,00‰ (‰ = impostazione di base) O 0,00 fino a 0,40% BAC (se l'unità di misura desiderata è % BAC, lo si può modificare con ACE Instruments) O 0,00 fino a 2,00mg/L (se l'unità di misura desiderata è mg/L, lo si può modificare so con ACE Instruments)
Tempo di riscaldamento	10 - 15 secondi (a 1,00 per mille – se il risultato del test è elevata, allora il sensore ha bisogno di più tempo per evaporare l'alcol)
Misure	114 x 49 x 18mm (A x L x P)
Peso	116g (incluso le batterie)
Alimentazione elettrica	2 batterie AA 1,5V, Alkaline (= energia per un massimo di 1000 tests)
Le condizioni ambientali temperature	10°C fino a 40°C
Temperatura del supporto	10°C fino a 40°C

Taratura	Raccomandazione: Dopo 300 tests o dopo circa 12 mesi (a seconda di quale delle due è la prima). Potete inviare l'apparecchio per la calibrazione all'indirizzo assistenza indicato sotto www.alkomat.net
----------	--

*I dati tecnici possono essere modificati per miglioramenti funzionali (senza preavviso).

GARANZIA E RESPONSABILITÀ

La ACE Instruments (ACE Handels- und Entwicklungs GmbH) assicura una garanzia su errori di materiale e di elaborazione di due anni dopo l'acquisto per il prodotto al quale si riferiscono questa garanzia e la dichiarazione di responsabilità (in tutte le versioni e le denominazioni); una garanzia di un anno sul sensore. Questa garanzia include l'elettronica e l'alloggiamento e/o si riferisce al sensore senza i componenti di campionatura. Sono esclusi dalla garanzia quei componenti che in caso di inefficacia devono essere inevitabilmente distrutti (ad es. i fusibili). La garanzia si applica a partire dalla data della consegna o della prima messa in servizio (si applica l'intervallo più breve), qualora non venga diversamente indicato nella documentazione della ACE Instruments.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA GARANZIA

1. LIMITAZIONE DEL PRODOTTO

La ACE Instruments respinge qualsiasi ulteriore garanzia assunta espressamente o tacitamente, inclusa la vendibilità del prodotto e la sua idoneità per un determinato uso. La garanzia non si applica per la taratura. Dopo la sostituzione del sensore la taratura è assolutamente necessaria. Se per un prodotto sono necessarie una sostituzione di sensore e/o una taratura, l'utente riceverà un preventivo di spesa. Se l'utente rifiuterà il preventivo di spesa, la ACE Instruments restituirà il prodotto non riparato/ non calibrato ed il prodotto verrà contrassegnato di conseguenza. Se il prodotto non dovesse adempiere a questa prestazione di garanzia, i diritti dell'acquirente verrebbero limitati, e con essi gli obblighi della ACE Instruments, con esclusiva discrezione della ACE Instruments in materia di sostituzione o riparazione delle merci interessate o di rimborso del prezzo d'acquisto per le merci contestate.

2. LIMITAZIONE DELL'USO

La ACE Instruments declina qualsiasi responsabilità in caso di danni supplementari, danni collaterali o danni come mancato lucro e mancato uso derivati dalla vendita, dalla

produzione o dall'utilizzo dei prodotti venduti in relazione a questa limitazione di responsabilità, indipendentemente dal fatto che questi requisiti derivino da contratti, negligenza o da altre azioni con colpa.

Il prodotto a cui è legata questa dichiarazione di garanzia e di responsabilità, non importa in quale versione e in quale denominazione, non può essere chiamato in causa in modo giuridicamente vincolante per determinare l'idoneità di una persona a guidare un veicolo o ad eseguire un'azione che potrebbe presentare rischi per sé e per gli altri se si è sotto l'influenza dell'alcol.

L'esame attento di tutti i prodotti al momento della consegna, per verificare la presenza di eventuali danni, una taratura conforme all'uso previsto dal compratore e all'uso conforme, la riparazione e la manutenzione realizzate in conformità con le istruzioni presenti nella documentazione della ACE Instruments sono prerequisiti per questa garanzia. Se gli interventi di manutenzione o di riparazione vengono effettuati da personale non qualificato e se si utilizzano di materiali di consumo e parti di ricambio non approvati, questa garanzia decade. Come per tutti i prodotti tecnici è prerequisito fondamentale e necessario ai fini della garanzia della ACE Instruments che tutti gli utenti di questi prodotti abbiano confidenza con l'utilizzo, le capacità e i limiti di tale prodotto, come indicato nella rispettiva documentazione.

3. LIMITAZIONE DI CONSULENZA

L'acquirente conferma di aver verificato l'idoneità all'uso dei beni acquistati per lo scopo previsto. Tra le parti viene espressamente convenuto che qualsiasi consulenza tecnica o di altro genere da parte dell'ACE Instruments in materia di utilizzo di merci e servizi avverrà gratuitamente e a rischio esclusivo dell'acquirente. Dei propri consigli o dei risultati di tali consigli l'ACE Instruments non si assume nessun tipo di responsabilità.

RESPONSABILIDAD DEL AUTOR

La información contenida en este documento ha sido cuidadosamente elaborada bajo la premisa de su exactitud. Sin embargo, el autor no puede asumir responsabilidad alguna por el uso de dicha información y por las consecuencias que pudieran resultar. El autor no se hace responsable de ningún costo o gasto por daños y perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. Reservado el derecho de modificación de esta información sin previo aviso.

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por comprar nuestro probador de alcohol INNOMARK alpha! El alcoholímetro es un aparato medidor con sensor electroquímico. El alcoholímetro mide la concentración de alcohol en el aire espirado y calcula, a partir del valor obtenido, la concentración de alcohol en sangre. Este aparato tiene una tolerancia de medición de +/- 0.05‰ (por mil = g/L) con el valor de referencia de 1.00 por mil y 25°C temperatura ambiente.

Los resultados obtenidos se muestran como un valor de 3 cifras con 2 decimales (en la unidad de medida ‰ y mg/L) que equivale a g de alcohol por kg de sangre (es decir, si se muestra un valor de 0.36, eso quiere decir que el valor registrado es de 0.36 g de alcohol/kg de sangre).

El sensor integrado en el alcoholímetro se puede calibrar. Para mantener la precisión de medición de este dispositivo y la garantía del sensor, recomendamos una calibración regular. Pueden enviar el aparato para calibrar a la dirección indicada en www.alkomat.net.

El aparato sólo puede ser usado conforme a las instrucciones del manual de instrucciones. Todos los valores de medición indicados por este aparato de pruebas de alcohol sirven siempre sólo como punto de referencia y no son legalmente vinculantes. En cada test de respiración se debe usar una boquilla nueva (por razones higiénicas y para evitar mediciones defectuosas que pueden resultar por posibles restos de alcohol en una boquilla ya utilizada).

ELEMENTOS ENTREGADOS

- 1 Probador de alcohol por respiración INNOMARK alpha con sensor electroquímico
- 5 Boquillas
- 1 Guía de inicio rápido
- 1 Manual de instrucciones

Nota: Se necesitan dos (2) pilas alcalinas AA para usar el instrumento y no están incluidas.

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES PARTES DEL APARATO



1. Ranura de la boquilla
2. Salida de aire (siempre mantenga esta parte desbloqueada)
3. Pantalla LC digital
4. Botón de funcionamiento izquierdo (para iniciar una prueba manual, para navegar en los resultados de la prueba)
5. Botón de encendido (ON/OFF, recuperar el conteo acumulativo de pruebas, mostrar el resultado de la última prueba)
6. Botón de funcionamiento derecho (navegar a través de los resultados de la prueba)
7. Cubierta del compartimento de la batería (en la parte posterior del dispositivo)

ASÍ SE OBTIENE UN POSIBLE UN RESULTADO EXACTO

- A) Esperar al menos 15 Minutos después del último trago de alcohol hasta la prueba de alcohol. No comer, beber ni fumar durante este tiempo.
- B) No abrir la carcasa. No guardar la unidad de prueba de alcohol en un lugar frío, caliente, húmedo o mal ventilado.
- C) Mantenga la unidad de prueba de alcohol fuera del alcance de los niños.
- D) Después de estar guardado mucho tiempo, haga tres pruebas antes de efectuar la verdadera prueba de alcohol.
- E) No deje caer la unidad de prueba de alcohol.
- F) Reemplazar la pila si el rendimiento es bajo. Una pila baja produce resultados de prueba falsos.
- G) No realice ninguna prueba si hay ruido fuerte (la ondas sonoras afectan al sensor), o con corrientes de aire o en lugares mal ventilados.
- H) Después de un resultado de prueba de 1.00 por mil o superior el sensor necesita más tiempo de recuperación. Espere en este caso al menos tres minutos hasta la prueba siguiente.
- I) Después de un resultado de prueba de 1.00 por mil o superior el sensor necesita más tiempo de recuperación. Espere en este caso al menos tres minutos hasta la prueba siguiente.
- J) Guarde la unidad de prueba de alcohol de forma que no le entre polvo ni líquidos.
- K) No sople con demasiada fuerza sobre el aparato, pues esto puede dañar el sensor (ante todo, si al soplar llega mucha saliva al aparato).

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA

1. Coloque 2 baterías AA en el compartimento correspondiente. Para ello, retire con cuidado la tapa del compartimento en la parte posterior del medidor e introduzca 2 baterías AA (alcalina, 1,5 V). Al hacerlo, tenga en cuenta la polaridad (+/-).
2. Coloca una boquilla en la abertura lateral para sujetar las boquillas (= la abertura en el lado izquierdo de la parte delantera del instrumento). Asegúrese de que la boquilla queda bien sujeta. Utilice una boquilla nueva para cada persona que realice la prueba.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Con el alcoholímetro INNOMARK alpha puede realizar pruebas automáticas y manuales.

Prueba automática: La forma más fácil de tomar una muestra de pulmón profundo. El sistema de flujo del INNOMARK alpha monitorea la respiración de una persona y automáticamente toma una muestra cerca del final del flujo respiratorio.

Prueba manual: Normalmente se utiliza sólo si la persona de prueba no puede realizar una prueba automática.

1. Para una **prueba automática**, presione el botón de inicio en la parte frontal del dispositivo durante 2 segundos, luego escuchará un pitido, además se iniciará una cuenta atrás y „WAIT” parpadeará en la esquina inferior izquierda.
2. Espere hasta que al final de la cuenta atrás escuche 1 tono y luego verá „rDY” en la pantalla.
3. Tan pronto como vea „rDY” en la pantalla empiece a soplar constantemente en la boquilla durante 4 segundos, el dispositivo emitirá un pitido constante durante la prueba. Consejo: Sopla como si silbaras sin tono (pero sin pausa).
4. Cuando el pitido cesa y se oye un doble tono „clack”, la prueba finaliza con éxito. Si la muestra de aliento no es suficiente, en breve escuchará 2 tonos y verá „C.--” y luego „FLo” en la pantalla. Esto significa que la muestra de aliento no fue suficiente, así que presione el botón de inicio y comience una nueva prueba.
5. Después de una prueba exitosa, el dispositivo está analizando la muestra de aliento. (= „Calculando”) en la pantalla. Después de unos segundos se escuchan 2 tonos y el resultado de la prueba se muestra (con 3 dígitos y 2 decimales) en ‰ (g/L). Para visualizarlo en ‰ BAC o en mg/L, presione el botón izquierdo - con la tercera pulsación verá de nuevo la unidad ‰ (por mil = g/L).

1. Para una **prueba manual**, inicie el dispositivo como se describe anteriormente.
2. En cuanto vea „rDY” en la pantalla, pulse el botón izquierdo.
3. Se inicia el modo de prueba manual y muestra „C.--”, además se oye un pitido continuo.

4. Respire profundamente y sople moderadamente, con una velocidad y presión constantes en la dirección de la boquilla. Sople hasta que escuche un doble tono „clack“, y entonces la prueba habrá terminado con éxito.
5. El dispositivo está analizando la muestra de aliento, verá „C---“ (= „Calculando“) en la pantalla. Después de unos segundos se escuchan 2 tonos y se muestra el resultado de la prueba. Para visualizarlo en % BAC o en mg/L, presione el botón izquierdo - con la tercera pulsación verá de nuevo la unidad ‰ (por mil = g/L).

Nota: Se recomienda esperar al menos 5 minutos entre dos pruebas para evitar sobrecargar el sensor y mantener la calidad del sensor durante el mayor tiempo posible. Si no está en uso, el dispositivo se apagará automáticamente al cabo de 30 segundos, además se oye un pitido. Si desea realizar una nueva prueba, pulse el botón de inicio. Puede apagar el dispositivo manualmente si presiona constantemente el botón de inicio durante 3 segundos.

MODO DE MEMORIA DE REGISTRO DE PRUEBA

Recordar el recuento acumulativo de pruebas

Presione brevemente el botón de inicio (1x) durante la cuenta atrás, para que pueda mostrar el conteo acumulativo de pruebas, es decir, el número de todas las pruebas que se han realizado hasta ahora. Este número también le ayuda a comprobar si es necesario un servicio de calibración (ver capítulo „Calibración“ para más detalles). Puede reiniciar este contador (lo cual no es recomendable) si presiona el botón izquierdo hasta que el contador se reinicie a cero.

Recordar los resultados de pruebas anteriores (hasta 50 registros)

Presione brevemente el botón de inicio (2x) durante la cuenta atrás, para que pueda ver los últimos resultados de la prueba (comenzando con la última prueba). Primero verá el número de prueba y luego el resultado de la prueba guardado con este número. Si presiona el botón izquierdo, podrá ver el siguiente número de prueba guardado seguido del resultado de la prueba. Si desea ver los resultados guardados en orden inverso, presione el botón derecho. Si desea salir del modo de memoria

de registro de prueba y volver a la cuenta atrás, pulse brevemente (1x) el botón de inicio.

ACE INSTRUMENTS RECOMIENDA

- ¡Utilice siempre una boquilla nueva para cada persona! ACE Instruments no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por el uso de una boquilla para varias personas.
- Utilice siempre la boquilla ACE Instruments higiénica y envasada individualmente. En cada prueba con el aparato de pruebas entra en contacto excreciones humanas (sudor, saliva, sangre, etc.).
- Utilice guantes para quitar una boquilla usada, especialmente si se ha usado con personas extrañas. ACE Technik (www.ace-technik.de) incluye guantes apropiados en su surtido.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

- Si ha comido algo, ha bebido alcohol o ha fumado un cigarrillo, debe esperar al menos 15 minutos antes de empezar con la medición.
- Esta unidad de prueba de alcohol es un medidor de alta calidad y sensible. Para mantener la precisión del sensor, el aparato debe ser utilizado regularmente. Si el aparato no se utilizado durante un período de tiempo largo, el sensor puede secarse. Por mes recomendamos realizar al menos 2 pruebas de alcohol (incluso si no se ha bebido alcohol).
- En valores de medición menores de 0.10‰ (O BIEN 0.01% BAC O BIEN 0.05mg/L según ajuste) el resultado de la prueba se indica como 0.00‰. Esto sucede porque en niveles muy bajos de alcohol puede haber otras sustancias en el aire aspirado que influyen en el resultado de la prueba.
- Las modificaciones del producto pueden cambiar el funcionamiento descrito. Esto puede realizarse sin previo aviso y la adaptación de las instrucciones no es ninguna razón para realizar reclamaciones, devoluciones o reducción del precio. Es responsabilidad del usuario reconocer y reaccionar a las divergencias entre el manual de instrucciones y el funcionamiento real.

UTILICE SOLAMENTE BOQUILLAS ORIGINALES
ACE INSTRUMENTS

- Asegúrese de la precisión de los resultados
- Garantice el 100% de seguridad de higiene
- Asegure la garantía completa del aparato

ACE INSTRUMENTS AVISA

Incluso si el aparato indica el nivel "seguro", después de beber alcohol no hay garantía para conducir un vehículo u otra actividad que no se debe realizar bajo la influencia del alcohol.

ADVERTENCIAS

VISUALIZACIÓN	SIGNIFICACIÓN	ACCIÓN
H	Esta letra significa que el dispositivo detectó una alta concentración de alcohol fuera de rango (= superior a 400‰ (g/L) / 0.40% BAC / 2.00mg/L).	No se requiere ninguna acción.
FLo	El volumen de muestreo no era suficiente o la potencia del golpe era demasiado desigual para analizar la muestra de aliento.	Por favor, realice una nueva prueba. Presione el botón de inicio, la cuenta atrás comenzará de nuevo. Comience a respirar en cuanto aparezca "rdY" en la pantalla.

Snr	Esto significa que el sensor no está listo para una muestra de aliento. Esto sucede si se encuentra una alta concentración de residuos de alcohol o contaminantes en el sensor después de la última prueba.	Apague el dispositivo y espere menos 5 minutos antes de volver a encenderlo.
rPt	El dispositivo no pudo completar la prueba con éxito.	Por favor, pulse el botón de encendido y realice una nueva prueba.
Out	La prueba no se puede realizar porque el dispositivo se enciende fuera de la temperatura de funcionamiento.	Repita la prueba después de que la unidad haya alcanzado una temperatura dentro del rango de funcionamiento (10°C hasta 40°C).
Lo	La prueba no se puede realizar porque la batería está baja.	Reemplace las pilas con 2 pilas alcalinas AA nuevas.

CALIBRACIÓN

ACE Instruments recomienda la calibración del sensor del aparato aproximadamente cada 12 meses o después de 300 pruebas (lo que ocurra primero). La calibración no necesariamente tiene que hacerse, pero la precisión del sensor integrado está disminuyendo constantemente y la garantía del sensor se anula. Puede enviar el aparato para calibración a la dirección de servicio indicada en www.alkomat.net.

Recomendamos el envío como paquete para que en caso pérdida se pueda localizar mediante seguimiento.

NOTAS PARA LA BATERÍA

El aparato al que se refiere este manual de instrucciones contiene 2 baterías alcalinas AA. Estas baterías no son adecuadas para ser recargadas. El intento de recarga puede causar daños a personas y cosas. No se pueden emplear pilas recargables en el aparato, puesto que pueden dañar el aparato.

Si las baterías están vacías no se pueden tirar con la basura doméstica. Las pilas usadas contienen contaminantes que pueden dañar el medio ambiente y la salud. Las pilas se deben entregar en el comercio o en los puntos de reciclaje del municipio. La devolución es gratuita y legalmente obligatoria. Debe tirar solo pilas vacías en los contenedores apropiados y cubrir los terminales de las pilas de litio con cinta adhesiva.

CAMBIO DE LAS PILAS

Quite la tapa del compartimento de baterías y sustituya las pilas gastadas por dos nuevas. Preste atención a la polaridad: El polo negativo de las pilas debe tener contacto con la cavidad de las pilas. A continuación, cierre con cuidado la tapa del compartimento de las pilas.

El reciclaje de la pila es la actividad ecológica más fácil del mundo. Los cubos de la basura indican que las pilas y baterías viejas no se deben ser tirar junto con la basura doméstica. Pueden ser reutilizadas y recuperar materias primas valiosas como hierro, cinc y níquel.

Las denominaciones que se encuentran debajo de los contenedores tachados significan lo siguiente:



Hg

Cd

Pb

Hg: Baterías que contienen mercurio

Cd: Baterías que contienen cadmio

Pb: baterías que contienen plomo

DATOS TÉCNICOS*

Sensor	Sensor electroquímico
Precisión	+/- 0.05‰ a 1.00‰ y 25°C (‰ = ajuste básico fijo) O +/- 0.005% a 0.10% BAC y 25°C (% BAC = unidad de medida en América) O +/- 0.025mg/L a 0.50mg/L y 25°C (mg/L = unidad de medida en Gran Bretaña)
Indicación de la concentración de alcohol en sangre	0.00 hasta 4.00‰ (‰ = ajuste básico fijo) O 0.00 hasta 0.40% BAC (USA) O 0.00 hasta 2.00mg/L (Gran Bretaña)
Tiempo de calentamiento	10 - 15 segundos (con 0.50 por mil, cuanto mayor es el valor por mil, más tiempo necesita el sensor para evaporar el contenido de alcohol del aire medido)
Dimensiones del aparato	114 x 49 x 18mm (A x A x P)
Peso	116g (incluyendo las baterías)

Alimentación eléctrica	2 baterías AA 1.5 v, alcalinas (= energía para hasta máximo 1000 pruebas)
Temperatura de servicio	10°C a 40°C
Temperatura de almacenaje	10°C a 40°C
Calibración	Recomendado: Aproximadamente cada 12 meses o tras 300 pruebas (lo que ocurra primero). Pueden enviar el aparato para calibrar a la dirección indicada en www.alkomat.net .

*Los datos técnicos pueden cambiar para mejoras funcionales (sin previo aviso).

GARANTÍA Y RESPONSABILIDADES

La empresa ACE Instruments (ACE Handels- und Entwicklungs GmbH) otorga para este producto, que se entrega con su correspondiente declaración de garantía y responsabilidades, en todas sus versiones y denominaciones, una garantía de dos años desde la fecha de su adquisición, garantía que cubre fallos tanto materiales como de fabricación; la garantía para el sensor es de un año. Esta garantía incluye la electrónica y la carcasa del aparato o hace referencia al sensor sin los componentes destinados a la toma de la prueba. Los componentes que al activarse son destruidos (por ejemplo fusibles) no se incluyen en la garantía. La garantía es válida desde la fecha de entrega o fecha de la primera puesta en servicio (siendo válido el período más corto), siempre y cuando en la documentación que acompaña al producto de la empresa ACE Instruments no conste otra cosa.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA Y DE LAS RESPONSABILIDADES

1. LIMITACIÓN DEL PRODUCTO

La empresa ACE Instruments declina cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo la comerciabilidad o idoneidad para un determinado propósito. Especialmente, la garantía no es aplicable a la calibración del aparato. Después de un reemplazo del sensor es imperativo volver a calibrar el aparato.

Cuando en un producto se hiciera necesario reemplazar el sensor y/o realizar una calibración, bajo demanda el usuario recibirá un presupuesto. Si el usuario rechazara este presupuesto, la empresa ACE Instruments se limitará a devolver el producto no reparado / no calibrado, y dicho producto será identificado como tal.

En caso de que el producto no cumpliera con las condiciones de esta garantía, las exigencias del comprador y las obligaciones de la empresa ACE Instruments se limitarán – exclusivamente y según los criterios de ACE Instruments – al reemplazo o la reparación de las mercancías afectadas, o a la devolución del precio de compra de las mercancías reclamadas.

2. LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN

La empresa ACE Instruments en ningún caso se hace responsable de eventuales daños y perjuicios adicionales, daños incidentales o consecuentes, incluyendo eventuales reducciones de beneficios y pérdidas de uso que podrían resultar de la venta, fabricación o utilización de los productos vendidos bajo esta exención de responsabilidades, independientemente de si estas exigencias derivan de contratos, negligencias u otros actos ilícitos.

El producto al que se adjunta esta declaración de garantía y responsabilidad, independientemente de su versión o denominación, no podrá utilizarse de modo legalmente vinculante para evaluar la capacidad de una persona para conducir un vehículo o realizar cualquier otra acción cuya ejecución bajo la influencia del alcohol pudiera poner en peligro a dicha persona o a terceros.

Una inspección cuidadosa del producto en el momento de su entrega, una calibración adecuada para las aplicaciones específicas del comprador, la utilización exclusiva del aparato con los fines previstos así como la realización de las reparaciones y del mantenimiento según las instrucciones contenidas en la documentación del producto entregada por la empresa ACE Instruments son requisitos imperativos para la validez de esta garantía. Cualquier reparación o mantenimiento realizados por personal no cualificado o la utilización de materiales consumibles o piezas de recambio no autorizados tendrá como consecuencia la anulación de esta garantía. Como en todos los productos técnicamente sofisticados, una de las condiciones fundamentales y vinculantes para la garantía otorgada por la empresa ACE Instruments es que todos los usuarios de estos productos estén familiarizados con con el uso y con las capacidades y limitaciones del producto, tal como se describen en la documentación del producto.

3. LIMITACIÓN DE ASESORAMIENTO

El comprador confirma haber examinado bajo su propia responsabilidad la intención de utilización y la adecuación de los productos adquiridos para las aplicaciones previstas por él. Entre las partes queda explícitamente acordado que cualquier asesoramiento técnico o de otra índole por parte de la empresa ACE Instruments con respecto al uso de mercancías o servicios se ha hecho de forma gratuita y bajo el riesgo exclusivo del comprador. Por este motivo, la empresa ACE Instruments declina toda obligación o responsabilidad derivada de las recomendaciones o de sus resultados.

ACE Handels- & Entwicklungs GmbH
Staufenstraße 1
83395 Freilassing
Deutschland/Germany

Tel +49(0)8654 / 588 38-0
Fax +49(0)8654 / 588 38-98

info@alkomat.net
www.alkomat.net