

Istruzioni d'installazione dello stativo

KERN PCD-A03


Versione 1.0

08/2011

I



PCD-A03-IA-i-1110

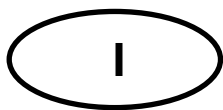

KERN PCD-A03

Versione 1.0 08/2011

Istruzioni d'installazione dello stativo

Contenuto della fornitura:



Nr pz.	Elementi di costruzione
1	Stativo
4	Viti
1	Guida del cavo

Dati tecnici:

Altezza stativo	25 cm
Dimensioni	195 x 195 x 250 mm

Montaggio

Ci sono più possibilità di uso dello stativo PCD-A03:


Variante 1:

Stativo appoggiato su un piede accanto alla bilancia.

Variante 2:


Stativo montato presso la piattaforma della bilancia.

- ⇒ Svitare le 4 viti a retro del display e rimuovere le protezioni in plastica [1].

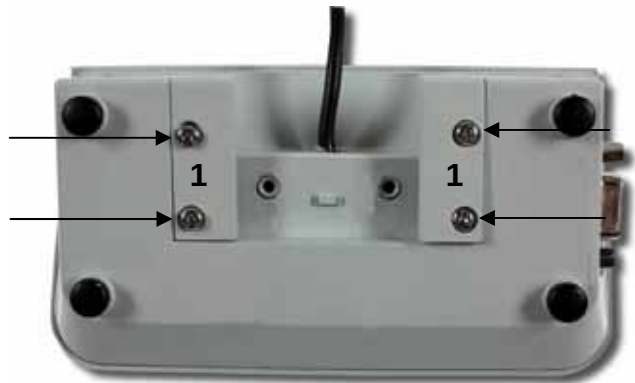


- ⇒ Collegare il display con lo stativo inserendo uno nell'altro come evidenziato al disegno.

Far passare il cavo attraverso il suo foro [2].

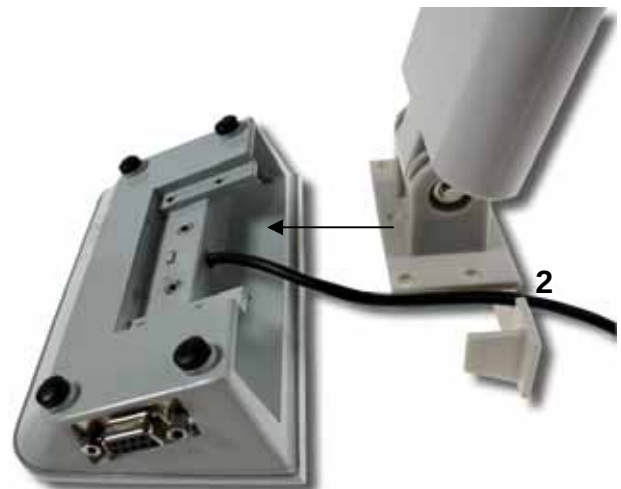


- ⇒ Avvitare le 4 viti..

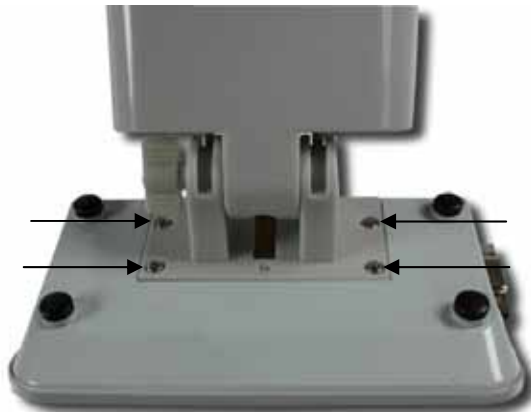

Variante 1:

- ⇒ Mettere il cavo al retro dello stativo nella sua canalina e avvitare con le 4 viti.

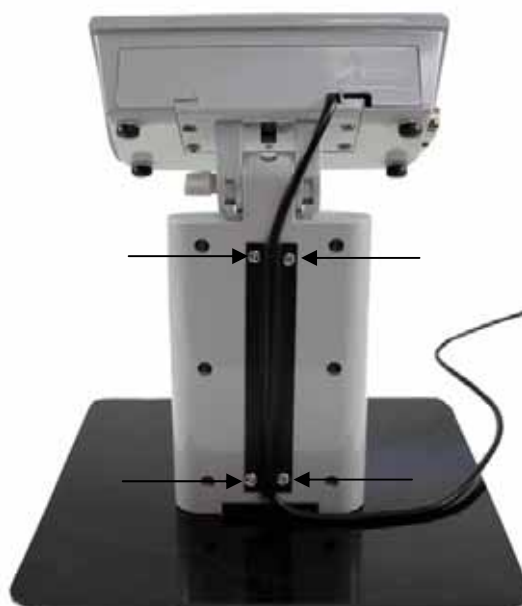

Variante 2:


⇒ Svitare le 2 viti in basso del piedino.



⇒ Collegare lo stativo e il portapiattaforma, inserendo l'uno nell'altra.



⇒ Fissare con le viti.

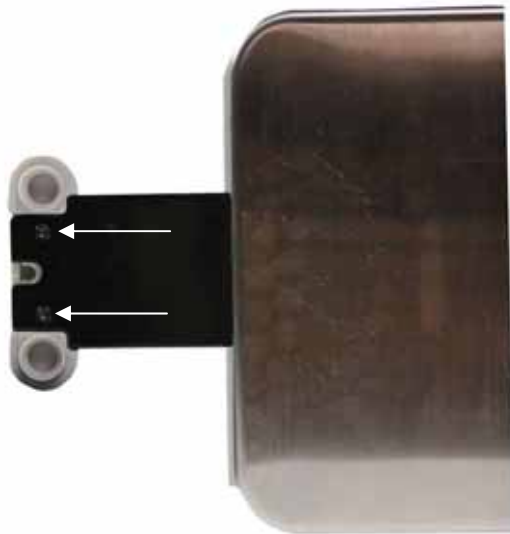

⇒ Mettere il cavo dietro lo stativo nella canalina del cavo e fissarla con le 4 viti.



