

MEDISANA TERMOMETRO FTC IT


Istruzioni per l'uso. Si prega di leggere attentamente!

Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!

Avete acquistato un prodotto di qualità del marchio MEDISANA, un'azienda leader nel mercato dei prodotti sanitari.

Per raggiungere i risultati auspicati e per utilizzare al meglio il termometro FTC MEDISANA, raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni per l'uso e la manutenzione.

MEDISANA AG

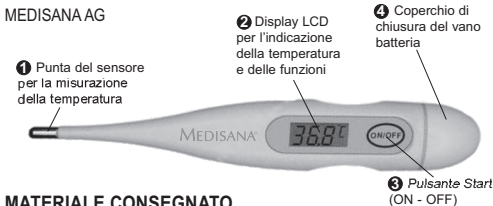

MATERIALE CONSEGNATO

Innanzitutto controllate che l'apparecchio consegnato sia completo.

Il materiale consegnato consta di:

- Termometro FTC MEDISANA
- Batteria tipo AG3 o LR41 (già inserita)
- Astuccio per la custodia
- Un libretto d'istruzioni per l'uso

NORME DI SICUREZZA

1. Il termometro è composto di parti di piccole dimensioni che potrebbero essere ingerite dai bambini. Si raccomanda, pertanto, di non lasciare il termometro incustodito in mano ai bambini.
2. Utilizzare il termometro esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea.
3. L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.
4. In caso di guasti non procedere da soli alla riparazione dell'apparecchio e non continuare a utilizzarlo. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato e fare eseguire le riparazioni esclusivamente dal centro di assistenza MEDISANA.
5. Per mantenere a lungo la perfetta funzionalità del termometro FTC MEDISANA, rispettare le modalità di funzionamento e di conservazione menzionate.

INFORMAZIONI SUL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA CON IL TERMOMETRO FTC MEDISANA

Cos'è la febbre?

La nostra temperatura corporea normale si aggira tra il 36 °C e i 37,5 °C. A seconda dei momenti della giornata e dello stato fisico, ad es. durante il ciclo mestruale di una donna, è assolutamente normale che si verifichino delle oscillazioni. Se però la temperatura corporea sale oltre i 38 °C, si parla di febbre.

Se la febbre sale oltre i 39 °C e non cala dopo 1 o 2 giorni, bisogna assolutamente rivolgersi a un medico.

Misurare la febbre in modo rapido e corretto!

Una malattia che comporta uno stato febbrile è spesso accompagnata da stanchezza, dolori articolari, brividi di freddo e tremolii convulsi. Si può controllare meglio il decorso della malattia, se si misura la febbre da 2 a 3 volte al giorno a intervalli di 4/6 ore. La misurazione dovrebbe essere eseguita sempre nella stessa zona del corpo e all'incirca alla stessa ora, al fine di poter confrontare i risultati.

Con il termometro FTC MEDISANA si può rilevare la temperatura corporea del momento in modo semplice e rapido, evitando quasi del tutto gli inconvenienti usuali, quali periodi di misurazione troppo brevi.

Un rilevamento della temperatura può essere effettuato nei modi seguenti:

- a) sotto la lingua (orale)
- b) nel cavo ascellare (ascellare)
- c) nell'ano (rettale)

MESSA IN FUNZIONE

Inserimento/estrazione della batteria:

Il termometro FTC MEDISANA è subito pronto per l'uso, perché è fornito con una batteria già inserita. Se, tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo dovesse comparire sulla destra del display il simbolo "L", occorre inserire una nuova batteria. A questo scopo togliere il coperchietto di chiusura 4 del vano batteria ed estrarre quest'ultimo di ca. 18mm dal termometro. Togliere la batteria mediante un piccolo giravite e sostituirla con una nuova dello stesso tipo. Controllare il corretto orientamento del polo della batteria (il polo "+" e "-" sia visibile).

Richiudere il vano di batteria con il tappo di chiusura.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Misurazione

Accendere l'apparecchio premendo il pulsante Start 3. Per ca. due secondi sul display appariranno tutti i simboli e si udirà un breve segnale acustico. Dopodiché viene indicato nella visualizzazione LCD 2 il valore ultimo misurato (in tal caso compare inoltre una piccola "M" al bordo di visualizzazione destro). Nel caso in cui la temperatura sia inferiore a 32 °C, sul display LCD 2 compare una "Lo" e il simbolo "°C" lampeggianti. A questo punto il termometro FTC MEDISANA è pronto per l'uso. Posizionare la punta del sensore 1 nel cavo orale o ascellare o nell'ano; il termometro inizia automaticamente il rilevamento della temperatura. Durante la misurazione, l'apparecchio indica costantemente la temperatura del momento. Non appena la misurazione è conclusa, si sentono 10 segnali acustici e la temperatura misurata viene visualizzata sul display 2. Quando il termometro segna una temperatura superiore a 37,7°C emette per 10 volte un triplice bip come segnale di allarme febbre. Il termometro si spegne automaticamente otto minuti dopo la misurazione. Per prolungare la durata della batteria, tuttavia, si consiglia di disattivare il termometro dopo la lettura, premendo il tasto Start 3.

Misurazioni in diverse parti del corpo

Il termometro FTC MEDISANA è adatto a rilevare la temperatura corporea orale (in bocca), ascellare (nel cavo ascellare) o rettale (nell'ano). L'apparecchio è completamente impermeabile. Dopo circa 1 minuto vi sono 10 brevi segnali acustici ed il risultato della misurazione viene visualizzato sul display LCD 2. Ora si può togliere il termometro. Per poter effettuare una misurazione esatta e sicura, sarebbe opportuno attenersi a quanto segue nel posizionamento del termometro:

MISURAZIONE ORALE:

Mettere il termometro con la punta del sensore 1 sotto la lingua e chiudere la bocca. Durante la misurazione respirare con il naso per evitare di alterare i valori rilevati.

MISURAZIONE RETTALE:

La misurazione rettale, ritenuta fastidiosa da molti pazienti, dà invece risultati precisi. Inserire con cautela la punta del sensore 1 nel retto per ca. 3,5 cm.

MISURAZIONE SOTTO IL CAVO ASCELLARE:

Prima di effettuare la misurazione, pulire l'ascella. Mettere il termometro con la punta del sensore 1 nel cavo ascellare. Abbassare il braccio e premerlo leggermente contro il corpo durante la misurazione.

FUNZIONE DI MEMORIA

Il termometro FTC MEDISANA dispone di una funzione memoria che consente di richiamare l'ultimo dato rilevato. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante Start 3. Per ca. due secondi sul display appariranno tutti i simboli e si udirà un breve segnale acustico. Dopodiché viene indicato nella visualizzazione LCD 2 il valore ultimo misurato (in tal caso compare inoltre una piccola "M" al bordo di visualizzazione destro).

PULIZIA E DISINFEZIONE

Il termometro FTC MEDISANA è impermeabile e quindi si può pulire e disinfettare facilmente. Detergere il termometro prima e dopo ogni misurazione con un panno imbevuto in una soluzione alcolica delicata. Si può, inoltre, immergere il termometro in un'apposita soluzione disinfettante. Il vostro rivenditore specializzato sarà lieto di raccomandarvi dei prodotti detergenti adeguati e di consigliarvi sull'uso degli stessi.

DATI TECNICI

Nome e modello: Termometro FTC
 Campo di misurazione: 32,0 °C - 42,0 °C
 Graduazione: 0,1 °C
 Precisione di misurazione: ± 0,1 °C (deviazione dalla temperatura corporea effettiva nel campo di misura compreso tra 35,5 °C - 42 °C) non estrapolando i valori ca. 2500 misurazioni
 Durata: ca. 2500 misurazioni
 Condizioni di funzionamento: da 10 °C a 40 °C
 Condizioni di conservazione: da -10 °C a + 60 °C
 Dimensioni: 10 mm (A), 128 mm (L), 19 mm (P)
 Peso: 9,8 g
 Batterie: 1 batteria 1,5 V (tipo Ag3 oppure LR41)
 Articolo n°: 77030
 Codice a barre europeo: 40 15588 77030 2



L'apparecchio corrisponde alla classe di sicurezza B



Si prega di leggere le istruzioni per l'uso



Numero LOT



Produttore



Data di produzione

Il marchio CE si riferisce alla direttiva CE 93/42/EEC. La forma e la produzione sono state effettuate in osservanza delle seguenti norme europee: EN 12470-3 (termometro medico), EN 980 (simboli), EN 60601-1 (Sicurezza elettrica per dispositivi medici).

Compatibilità elettromagnetica:

l'apparecchio soddisfa i requisiti della norma EN 60601-1-2 per la compatibilità elettromagnetica. Per informazioni dettagliate di questi dati di misurazione è possibile rivolgersi a MEDISANA.

Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.

SMALTIMENTO



L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente. Togliere le pile prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei rifiuti domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i rivenditori specializzati. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

GARANZIA

In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il centro di assistenza. Se dovesse essere necessario spedire l'apparecchio, specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Valgono le seguenti condizioni di garanzia:

1. I prodotti MEDISANA hanno una garanzia di tre anni a partire dalla data di vendita. La data di acquisto deve essere comprovata in caso di garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a errori di materiale o di lavorazione vengono eliminati immediatamente.
3. Una prestazione di garanzia non dà diritto al prolungamento del periodo di garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
4. La garanzia non include:
 - a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall'inosservanza delle istruzioni d'uso,
 - b. i danni riconducibili a manutenzione o a interventi effettuati dall'acquirente o da terzi non autorizzati,
 - c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante l'invio al servizio clienti,
 - d. gli accessori soggetti a normale usura (batterie ecc.).
5. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o indiretti causati dall'apparecchio quando il danno all'apparecchio viene riconosciuto come caso di garanzia.



MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, GERMANIA
 eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

In caso assistenza e per accessori e parti di ricambio, rivolgersi a:

AF Italia srl

Via Monte Rosa, 28
 20868 Concorezzo (MB)
 Italy

Tel.: 039 - 8951381
 eMail: assistenza@afitalia.it
 Internet: www.afitalia.it