



**D**

## **Mobiles Wärmekissen, kabellos**

### **Gebrauchsanweisung Artikel 4684**

Vor Gebrauch des Gerätes bitte genau durchlesen!


# Deutsch

<b>1. Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>2. Die Komponenten</b>	<b>3</b>
<b>3. Funktionsbeschreibung</b>	<b>3</b>
<b>4. Inbetriebnahme</b>	<b>4</b>
<b>5. Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
<b>6. Lieferumfang</b>	<b>5</b>
<b>7. Technische Daten:</b>	<b>5</b>
<b>8. Gewährleistung:</b>	<b>5</b>

# 1. Einleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für das „Mobile Wärmekissen, kabellos“ entschieden haben. Dieses Produkt ist als zusätzliche Wärmequelle für Personen gedacht, die unabhängig von der Verkabelung mit dem Stromnetz Wärme nutzen wollen.

## 2. Die Komponenten

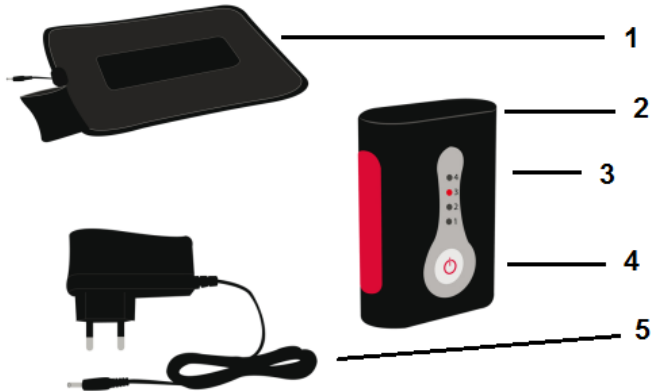

- 1) Mobiles Wärmekissen, kabellos
- 2) Bedienteil mit Steuerelektronik
- 3) Leuchtdioden (LEDs)
- 4) Start/Stopp-Taste
- 5) Ladegerät

## 3. Funktionsbeschreibung

Das „Mobile Wärmekissen, kabellos“ wird durch einen Lithium Ionen Akku, der im Bedienteil integriert ist, mit Energie versorgt. Dieses Bedienteil wird mit dem Wärmekissen per Kabel verbunden, und anschließend in eine Seitentasche gesteckt. Die Wärme lässt sich in 4 Stufen zwischen 38° und 55° Celsius einstellen.

Die Steuerelektronik mit Li-Ion Akku kann unter der Ersatzteilnummer 4681.1.33 bezogen werden, falls ein 2. Akku zum Austausch gewünscht wird.

## 4. Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Li-Ion Akku für ca. 3-4 Stunden aufgeladen werden. Hierzu das Ladegerät (5) in eine Netzsteckdose stecken und das Ladekabel mit der Steuerelektronik (2) verbinden. Der Ladevorgang wird durch Leuchten der roten LED (3) an der Steuerelektronik angezeigt.

Anschließend:

- a) Verbindungskabel des Kissens (1) mit der Steuerelektronik (2) verbinden.
- b) Start/Stopp-Taste (4) für 2 Sekunden gedrückt halten.
- c) Durch mehrfaches betätigen der Start/Stopp-Taste (4) die gewünschte Wärmestufe einstellen.
- d) Steuerelektronik (2) mit Akku in der Seitentasche verstauen.
- e) Ausschalten des Kissens durch gedrückt halten der Start/Stopp-Taste (4) für 2 Sekunden

Um das Wärmekissen wieder abzuschalten, Start/Stopp-Taste (4) für 2 Sekunden gedrückt halten. Die LED, die die zuvor gewählte Wärmestufe anzeigt, erlischt.

## 5. Sicherheitshinweise



- Anweisung sorgfältig lesen
- Keine Nadeln oder andere spitze Gegenstände in den Wärmegürtel stechen
- Das Wärmekissen
  - nicht in geknicktem oder gefaltetem Zustand benutzen
  - nicht für Wärme unempfindliche Personen, Kleinkinder, oder Tiere benutzen
- Benutzung durch Kinder nur unter Aufsicht
- Personen, die Wärme nur bis zu einem bestimmten Grad empfinden, sollten das Wärmekissen nur unter Aufsicht benutzen
- nicht falten wenn Kissen noch warm ist
- Keine schweren oder kantigen Gegenstände auf das Wärmekissen legen, damit die Stromleitungen im inneren nicht beschädigt werden
- Steuerelektronik (2) nicht mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
- Keine anderen Heizgeräte oder wärme erzeugenden Gegenstände auf das Gerät legen, wenn es eingeschaltet ist.

## 6. Lieferumfang

- 1) Wärmegürtel wieder aufladbar
- 2) Steuerelektronik mit Li-Ion Akku
- 3) Ladegerät

## 7. Technische Daten:

Model/Typ	LH-115R
Ladegerät	100-240V~ 50-60Hz/8,4V
Produkt-Maße in mm:	ca. 100cm x 16,5cm
Gewicht	ca. 250g



## 8. Gewährleistung:

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum auf Herstellungsfehler in Material und Qualität. Als Nachweis dient der Kaufbeleg. Diese Gewährleistung ist nur gültig, wenn die Hinweise der Gebrauchsanweisung beachtet werden. Bei Schäden durch Gewaltanwendung, Missbrauch und unsachgemäßer Anwendung oder Service von unberechtigten Personen erlischt die Gewährleistung.

### Sehr geehrte Kunden,

solte der von Ihnen erworbene Artikel einmal nicht richtig funktionieren, senden Sie ihn nicht gleich zurück. Eventuell kann Ihnen unsere Hotline unter 069/954061-24 weiterhelfen. Kann das Problem trotzdem nicht behoben werden, haben Sie innerhalb der BRD die Möglichkeit, Artikel mit einem Warenwert ab 40 €, innerhalb der Gewährleistungsbestimmungen kostenlos zur Prüfung abholen zu lassen. Wir benötigen hierzu ihre Adresse.

Diese können Sie telefonisch unter der unten genannten Hotline-Nummer oder schriftlich per Email: [technik@hydas.de](mailto:technik@hydas.de) an uns mitteilen. Machen Sie die Rücklieferung bitte versandfertig und fügen Sie eine Kopie des Kaufbeleges sowie eine Mängelbeschreibung bei. Wir bitten um Verständnis, dass unfrei gesendete Pakete leider nicht angenommen werden können.

### Ihre Hydas – Kundenbetreuung

### Adresse für Gewährleistung und Service:

Hydas GmbH & Co. KG, Am Hohlen Weg 37, 34369 Hofgeismar

### Haben Sie noch Fragen?

Hotline: 069 – 95406124

Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, Verpackungsmaterial der Wiederverwertung (Sammelstelle) zuzuführen.

## Entsorgung Altgeräte und Batterien



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.



[www.hydas.de](http://www.hydas.de)

© by **Hydas GmbH & Co. KG**, Am Hohlen Weg 37, D-34369 Hofgeismar, Germany  
4684\_Gad0212pf