



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Telepítési útmutató


KERN GAB-A04 akku

Verzió: 1.0

11/2010

D

GAB-A04-IA-d-1010

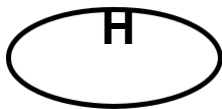

KERN GAB-A04 akku

Verzió: 1.0 11/2010

Telepítési útmutató Akkumulátor



Az akku **GAB-A04** a következő készülékekbe építhető be:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

1 Műszaki adatok

| Mérleg | Működési idő | Töltési idő: |
|----------------|----------------------------|--------------|
| GAB-N | Háttérvilágítás BE: 70 óra | 12 óra |
| | Háttérvilágítás KI: 90 óra | |
| CFS | Háttérvilágítás BE: 70 óra | 12 óra |
| | Háttérvilágítás KI: 90 óra | |
| CPB-D/N | Háttérvilágítás BE: 50 óra | 12 óra |
| | Háttérvilágítás KI: 90 óra | |
| RPB-D | Háttérvilágítás BE: 40 óra | 14 óra |
| | Háttérvilágítás KI: 80 óra | |

2 A szállítás tartalma

- Akkublokk; 6V 4Ah

3 Akku telepítése:

- Ö Válassza le a mérleget a hálózatról
- Ö Távolítsa el a mérőlemezt és a mérőlemez tartót

Ö Vegye le az akkutartó fedelét



Ö Csatlakoztassa az akkublokk dugóit a megfelelő vezetékhez (ügyeljen a színekre!)



Ö Helyezze be az akkublokkot az akkutartóba

☒ Óvja meg az akkublokkot a habanyaggal az elcsúszástól

Ö Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábelek ne csípődjenek be

Ö A csatlakozókábeleket nem szabad visszatolni a mérő belsejébe (ld. a nyílakat)



Ö Zárja vissza az akkutartót



Ö Helyezze vissza a tartót és a mérőlemezt

4 Első üzembe helyezés

Az akku a mérleg tápegységén keresztül töltődik. Az első használat előtt 15 óráig kell tölteni. Az akku üzemideje a "Műszaki adatok" fejezetben található.