

**1. Szerzői felelősség:** Az ebben foglalt információk lelkiismeretesen és helyességük feltételezése mellett lettek összeállítva.

A szerző nem felel semmilyen fajta használatért és az abból adódó következményekért. A szerző nem tehető felelőssé károkkal kapcsolatos költségeikért és kiadásokért, amelyek jelen dokumentumban foglalt információk alkalmazásából erednek. Jelen információk külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.

**2. Rövid leírás:** Az AL5500 egy digitális alkohol- szonda, amely a kilélegzett levegő alkohol koncentrációját méri, és ebből kiszámítja a véralkohol szintet.

**3. A szállítás tartalma:** Alkoholszonda AL5500 két ceruzaelem öt eredeti gyári fúvóka Használati útmutató, ajándékdobozba csomagolva.

**4. Mi micsoda:**



## 5. Alkohol-teszt az ALCOSCAN AL5500-al:

**5.1. Elemek behelyezése:** Nyomja meg az elemtartó fedélen a ponttal jelölt nyilat és húzza le a fedelet. Helyezzen be két ceruzaelemet az elemtartó rekeszbe. Vigyázzon a helyes polarításra. Ezt az elemtartó rekeszbe rajzolt elem szimbólumok mutatják. Tolja fel az elemtartó fedelet a készülékre, annyira, hogy bekattanjon. Az elemtartó rekesz lezárásához ne próbálja meg a rekesz fedelét felülről rányomni a rekeszre. Ez tönkretesz az elemtartó rekesz befogását. A ház hosszában csúsztassa fel a fedelet.


### 5.2. Az alkohol-próba lefolytatása:

**5.2.1.** Nyomja meg röviden a kezelő gombot. Megjegyzés: Ha a kezelő gombot hosszabban tartja megnyomva, akkor felváltva az eddigi alkohol próbák száma és az utolsó próba eredménye jelenik meg. Ebben az esetben az alkohol próbát a kezelő gomb elengedésével indíthatja meg.

**5.2.2.** Ez után a műszer visszaszámlál O-ig. Megjegyzés: A visszaszámlálás hosszabb ideig tart az AL5500 »hidegindítása« után és gyorsabban fut le, ha már előtte egy vizsgálatot elvégzett.

**5.2.3.** Mihelyt a kijelzőn O látható, az AL5500 készülék vizsgálatra kész. Megjegyzés: Ha nem folytat le vizsgálatot, az áramtakarékosági funkció az AL5500-t rövid időn belül kikapcsolja.

**5.2.4.** Az AL5500 műszeren a fúváspróbát három módon végezheti:

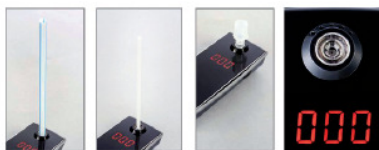

- g A fúvóka megfújásával (legnagyobb pontosság)
- g Szívószállal (jó pontosság)
- g A kilélegzett levegő ráfújásával az érzékelő nyílásra (elfogadható pontosság)

Mihelyt az AL5500 kilélegzett levegőt észlel, egy folyamatos hangjelzés hallható és a kijelzőn látható O elkezdi balról jobbra vándorolni. Ha a vizsgált kilélegzett levegő mennyiség nem elegendő, az AL5500-en FLO jelenik meg. Kapcsolja ki a készüléket és ismétlje meg a próbát. Fújjon kihagyás nélkül, közepes erősséggel. Használja ki ennek során az összehúzódó tüdővel kifejezhető nyomást is.

**5.2.5.** Elegendő légzésminta után kettős hangjelzés hallható, és az AL5500-en megjelenik az alkoholos befolyásoltság mértéke #.## % alakban.

**5.2.6.** A kijelzett érték kb. 10-szer villog. Ezután minden villogással együtt egy hangjelzés is hallható és az AL5500 ötszöri villogás után kikapcsol.

**5.2.7.** A kézi kikapcsoláshoz tartsa a kezelőgombot megnyomva. A kijelzőn OUT (ki) látható. Néhány másodperc után a képernyő kikapcsol.

## 6. Különleges jelzések:

Kijelző	Jelentés	Teendő
BAT	Elem kimerült	Helyezzen be friss alkáli ceruzaelemeket. <b>Ne használjon akkukat!</b> Küldje be a készüléket kalibrálásra az ACE GmbH-hoz (lásd 9.).
CAL	Emlékeztető a kalibrálásra	Küldje be a készüléket javításra. <b>Az érzékelő cseréje nem vonatkozik a garancia, az költségekkel jár.</b>
SEN	Érzékelő hiba	

A termék módosításaival a fent leírt folyamatok változhatnak. Ez előzetes értesítés nélkül, a használati útmutató hozzáigazításával is történhet, erre nem alapozható reklamáció, a termék visszavétele vagy árengedmény. A felhasználó felelőssége a használati útmutató és az AL5500 tényleges kezelése közötti eltérések felismerése, és az annak megfelelő reagálás.

## 7. Így érhető el a lehető legjobb eredmény:

Várjon az alkohol teszttel az utolsó korty alkohol után legalább 15 percig. Ezen idő alatt ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Ne nyissa fel a hátat. Az AL5500-at ne tárolja hideg, forró, nedves, poros vagy rosszul szellőzött helyiségben. Az AL5500 készüléket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá. Hosszabb tárolási idő után folytasson le először három „bejáratási tesztet”, mielőtt a tényleges alkohol tesztet lefolytatná. Ne ejtse le az AL5500-at. Az elem elhasználódás jelzéskor cserélje ki az elemeket. A csökkent elem teljesítmény hibás vizsgálati eredményhez vezet.

Ne folytasson le vizsgálatot zajos, huzatos vagy rosszul szellőzött helyiségben (a hanghullámok zavarják az érzékelőt).

1,00 ezrelékes vagy azt meghaladó vizsgálati eredmény után az érzékelőnek hosszabb regenerációs időre van szüksége. Ilyen esetben legalább három percig várni kell a következő vizsgálatig.

## 8. Az elemekre vonatkozó törvénnyel (BattG) kapcsolatos tanácsok - Elemcsere:

A készülékben, amelyre a használati útmutató vonatkozik, kiszállításkor két alkáli-mangán elem van. Ezek az elemek nem alkalmasak újbóli feltöltésre. Az újbóli feltöltési kísérlet anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat. Feltölthető elemeket nem szabad használni a készülékben, mivel ettől károsodhat a készülék. Az elhasználdott elemeknek nincs helye a háztartási szemétkben. Az elhasználdott elemek káros anyagokat tartalmaznak, amelyek egészséget és a környezetet károsítják. Kérjük adja le az elemeket/akkukat a kereskedőnél vagy a hatósági újrafelhasználási gyűjtőhelyeken.

A visszaadás ingyenes és törvény kötelez rá. Csak kisütött elemeket dobjon a felállított gyűjtő edényekbe és lítium elemeknél kérjük szigetelje le a pólusokat. Az elemcseréhez húzza le az elemtartó rekesz fedelét a készülékről és cserélje ki az elhasználdott elemeket újakra. Eközben ügyeljen a polarításra: az elemek mínusz pólusa az elem teknőben lévő rugóhoz érintkezik. Tolja vissza az elemtartó rekesz fedelét a házra úgy, hogy bekattanjon. Minden elemet és akkut újrahasznosítanak. Ezekből értékes nyersanyagokat, vasat, horganyt vagy nikkelt lehet újra kinyerni. Az elem újrahasznosítás a világon a legkönnyebb környezetvédelmi gyakorlat. Köszönjük, hogy ebben velünk tart.


Az elemeken a szeméttároló edény ikon jelzi, hogy az elemek és akkuk nem kerülhetnek a

háztartási szemétkbe. A szeméttároló edény alatti jelzések azt jelzik, hogy

Pb = az elem ólmot tartalmaz,

Cd = az elem kadmiumot tartalmaz,

Hg = az elem higanyt tartalmaz.

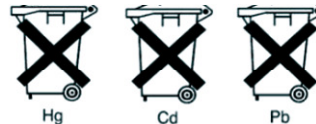

## 9. Kalibrálás

Az AL5500 pontosságának fenntartásához ajánlott féléves időközönként a készülék kalibrálása.

A kalibrálást nem kötelező elvégezni, de az AL5500 pontossága kalibrálás nélkül fokozatosan csökken. Küldje be az AL5500-t „Alkomat Kalibrierservice” kiegészítéssel a számlán / szállítólevélen megadott cég címre.

**A beküldés csomagként történjen, hogy ha elvesz a készülék, a küldés igazolása, ill. a küldemény utáni nyomozás lehetséges legyen.**