KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com
Telefono +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Sito web: www.kern-sohn.com

Istruzioni di montaggio
Porta batterie

KERN PWS-A01

Versione 1.0
2022-09
I



I

KERN PWS-A01

Versione 1.0 2022-09


Istruzioni di montaggio
Porta batterie

1 Volume di fornitura

- Porta pile
- Istruzioni di montaggio


2 Montaggio

1. Svitare le due viti sul retro della bilancia e rimuovere il coperchio.

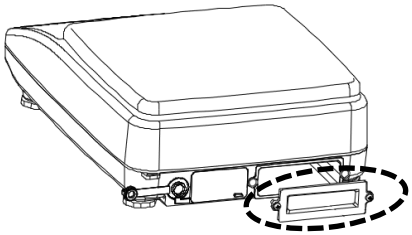


2. Inserire le pile/batterie nel porta batterie: 1,5 V, tipo AAA, 4 pz.

   Prestare attenzione alla polarità durante l'inserimento.

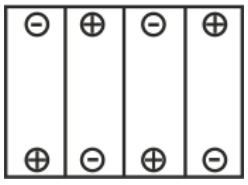

3. Inserire il porta batterie nel foro e avvitare con le manopole.

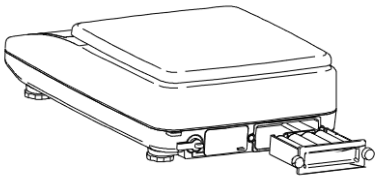

Si prega di notare che le batterie non possono essere caricate dalla bilancia.

3 Indicatore di livello della carica

Simbolo	Descrizione
	Stato di carica: normale
	Stato di carica: basso
	Stato di carica: scarico (simbolo lampeggiante)